



ALL RIGHTS RESERVED
**PATENT
PENDING**
ALL RIGHTS RESERVED



reddot award 2015
winner

Invacare®

Myon HC

Det perfekta valet
för din livsstil

Trusted Solutions,
Passionate People



Invacare **MyOn^{HC}** är designad för den mer aktive användaren som vill ha en stol med god körprestanda. Den kan lätt fällas ihop och blir därför enkel att hantera, förvara och transportera. Det finns två patent för MyOnHC och den har en lätt konstruktion som ger användarna en stol de kan lita på. Bland de viktigaste funktionerna finns:

- **Unik hopfällningsmekanism**
- **Stabilitet som påminner om en fastramsstol**
- **Snabb, steglös justering**
- **Mycket konfigurerbar**



Unik hopfällningsmekanism



- Stolens innovativa design gör att ramen blir **betydligt mindre** och ryggstödet kan fällas över sitsen, vilket gör stolen **kompakt**
- Att fälla ihop stolen gör man i ett handgrepp och den kan då enkelt **förvaras och transporteras**



Stabilitet som liknar en fastramsstol



- Den patenterade H-formade horisontella hopfällningsmekanismen, ger **ökad stabilitet** jämfört med andra hopfällbara stolar på marknaden
- Den självlåsande funktionen garanterar en säker sittposition och gör att stolen blir lätt att köra, **med förbättrade körprestanda**

Justering av stolen när användaren sitter kvar

- Vår unika, patenterade teknik gör att ryggstödet vinkel kan justeras samtidigt som **användaren sitter kvar i stolen**
- Den steglösa justeringen gör **att stolen snabbt och enkelt kan ställas in**, vilket ger en perfekt passform för användaren
- En inbyggda gradering gör att **ryggstödsvinkeln kan ställas in på ett mer exakt sätt**



Gör den personlig

- Det finns många olika färger att välja bland, vilket ger användaren frihet att designa stolen utifrån sin egen personlighet
- **MyOn^{HC}** kan **konfigureras utifrån användarens behov**, från att välja ett mer aktivt utseende med den fasta ramen till swingaway versionen som gör den ännu enklare att fälla ihop och transportera
- På de följande två sidorna beskrivs utbudet av tillval som är tillgängliga för **MyOn^{HC}**
- **MyOn^{HC}** är också **kompatibel** med andra Invacare-produkter, bland annat Alber-sortimentet med drivaggregat.



Prisbelönt

- **MyOn^{HC}** från Invacare är **prisbelönt** och har tilldelats Red Dot Award för produktdesign
- Priset Red Dot Award är inte bara den största produkttävlingen i världen, utan också ett av de mest prestigefyllda designpriserna



reddot award 2015
winner



ATT KONFIGURERA



Sits där spänning och sitsdjup kan justeras

Justeringar kan göras med hjälp av remmar som är enkla att använda.



Balansering

Kan justeras totalt 100 mm i steg om 12 mm.



Camber

Standardjusteringar är på 0-2°, med justeringar på 3 och 4° som tillval, om så krävs.

BENSTÖDSALTERNATIV



Benstöd som kan svängas bort, swingaway

Benstöden kan svängas antingen inåt eller utåt.



Fast frontram

En fast frontram på 80° är tillgänglig för mer självständiga användare.



Urval av benstödsalternativ

Välj mellan benstöd på 70, 80 eller 90°, vinkelställbara eller benstöd för amputerade

TILLBEHÖR



Ryggstödsöverdrag

Har en ryggstödsficka och ett reflexband för ökad synlighet.



Aktivt tippskydd

Kan fällas fram av både användaren och vårdgivaren.



Framhjul

Ett urval av länkhjul mellan 4 och 7 tum är tillgängliga, inklusive det eleganta och lätttrullande aluminiumhjulet

ARMSTÖD



Däckskydd

De eleganta däckskydden är lätta, vilket bidrar till att rullstolens totala vikt kan hållas så låg som möjligt.



Konventionella armstöd som kan justeras i höjd

Djupet kan justeras genom att de förflyttas på sitskenan.



Hemi-armstöd

Detta tillvalsarmstöd ger användaren ytterligare komfort då armstödet höjd, djup och vinkel kan justeras.

NYA FÄLLBARA OCH LÖSTAGBARA ARMSTÖD



Nya fällbara och löstagbara armstöd

Åtkomliga för användaren och fälls bakåt vilket är till hjälp när användaren vill förflytta sig.




Höjdjustering

Med en enkel tryckknapp kan höjden lätt justeras.



Låsspak

Armstödet kan lätt frigöras och fällas bakåt också av personer med begränsad funktion i händerna.

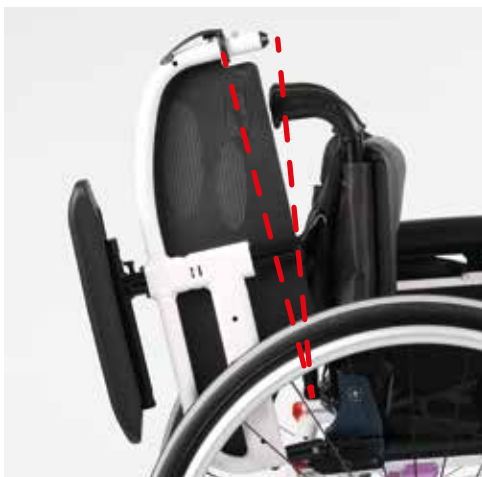

Position för bakåtfällning

En enkel inställning med en skruv gör att armstödet position kan fixeras för enkel åtkomst när det fälls bakåt.



Vändbar armstödsdyna

Armstödet position kan lätt vändas och ge en kort och en lång armstödsdyna i ett.

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

	Sittbredd	Sittdjup	Sitsvinkel	Sitthöjd	Intervall ryggstödsvinkel	Ryggstödshöjd	Benstödsvinkel
Invacare MyOn ^{HC}	305 / 330 / 355 / 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 / 530 mm	350 / 375 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm	0 - 9 °	Fram 360-535 mm i steg om 25 mm Bak: 360-510 mm i 25 mm intervaller	Fast 90° Eller steglös 90° -15°/+15°	Fast 300 / 325 / 350 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm Justerbar 360-400 och 410-490 mm	Fast front 80° Swing away benstöd 70° / 80° & 90° Vinkelställbara benstöd 0-80°

	Benstödslängd	Intervall armstödshöjd	Hjulbas	Bredd ihopfälld	Totallängd inkl fotplatta	Totallängd utan benstöd	Totalhöjd
Invacare MyOn ^{HC}	Swing away ram: 200-510 mm Fast ram: 300-530 mm	150-265 mm 205-280 mm 250-375 mm	SW +180 mm till SW+ 250 mm	320 -380 mm	845 -1205 mm	670 -860 mm	701 -1108 mm

	Max lutning vid användning av parkeringsbroms	Svängradie	Max brukarvikt	Vikt	Transportvikt	Mått ihopfälld ¹
Invacare MyOn ^{HC}	7°	625 mm	100 & 130 kg	Från 12,3 kg	Från 8,3 kg	



1. Mått ihopfälld
Höjd = 450 - 720 mm
Djup = 620 - 1020 mm
Bredd = 320 - 380 mm

RAMFÄRGER



KLÄDSEL

Black Nylon / Grey mesh



ACCENT FÄRGER

Silver

Blue

Purple



Stolens färger kan skilja sig jämfört med färgerna som visas här.

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



Yes, you can.®

