

NordBed Kid



En säker och bekväm säng
för barn med olika behov

SÄKER | ANPASSNINGSBAR | BEKVÄM



NordBed Kid

En säker, anpassningsbar säng som kan växa med barnet

Vår nya barnsäng, NordBed Kid är den idealiska sängen för hem- och vårdmiljöer.

Designad för att passa barnet

NordBed Kid passar barn i åldrarna 3-12 år och som är 75-154 cm långa. Sängarna finns i tre olika längder. Olika långsidor/grindar möjliggör att sängen kan anpassas för att möta barnets behov.

Det finns vikbara grindar, nedfällbara/fasta långsidor och sidor med plexiglas, alla dessa tillgängliga i 40 cm höjd. I 80 cm höjd finns vikbara grindar och fasta långsidor så att du kan välja det som passar ditt barn bäst.

Sängbotten har reglerbar rygg-, lår- och bendel och har designats baserat på antropometriska mått för att ge ett optimalt stöd med utmärkt komfort.

Som tillbehör finns även polstring med hygienöverdrag för montering på grindarnas insida som skydd för barnet.

Säkerhet

Vid framtagandet av vår nya barnsäng har säkerhet varit i fokus. Allt ifrån säkerhetslåset för de vikbara grindarna till hållaren där manöverdosan förvaras utom räckhåll för barnet. NordBed Kid uppfyller den nya EU-standarderna för medicinska barnsängar, EN5063:2017 samtidigt som sängen har en modern och hemlik design.

Säker arbetsmiljö för vårdaren

Våra NordBed Kid barnsängar är höjdjusterbara från så låg höjd som 30 cm för att möjliggöra säkra förflyttningar för barnet upp till 80 cm arbetshöjd för vårdaren. Centralbroms (valbar), nedfällbar långsida med utlösarmekanism på utsidan och fullt elreglerbar sängbotten har utvecklats för att försäkra en säker och ergonomisk arbetsmiljö för vårdaren.



Nyckelfunktioner hos NordBed Kid

1. Säkerhetslås

- ▶ De vikbara grindarna har ett säkerhetslås upptill som är enkelt för vårdaren att hantera
- ▶ Låset är designat för att garantera barnets säkerhet när det befinner sig i sängen

2. Manöverdosa som är enkel att hantera med valbar låsfunktion

- ▶ Manöverdosans knappar är färgkodade för enkel igenkänning
- ▶ Den magnetiska låsfunktionen garanterar korrekt och säker användning



3. Säker förvaring av manöverdosan

- ▶ Manöverdosan placeras enkelt och säkert i hållaren på sänggavelns nederdel, för att säkerställa att enbart vårdaren hanterar sängens funktioner



4. Höjdjusterbar

- ▶ Från så låg höjd som 30 cm för de barn som kan förflytta sig själva i och ur säng upp till 80 cm arbetshöjd för vårdaren



Vi erbjuder
madrasser
särskilt designade för
NordBed

Se vårt produktblad för
madrasser för
information



Säkerhetsstandard EN50637:2017

Designad för att uppfylla EU's nya säkerhetsstandard för barnsängar



Design

Modern, hemlik design med trädetaljer i ljus bok



Flera olika storlekar

Tillgänglig i tre olika längder (small, medium och large) för att garantera att det finns en säng som passar alla barn

ojuder
er som är
signade för
ed Kid

blad för Dacapo
för ytterligare
nation



5. Urval av grindar


- ▶ Möjlighet till olika grindar gör att sängen kan anpassas efter barnets behov
- ▶ Välj mellan vikbara grindar, nedfällbara och fasta långsidor med spjälor eller plexiglas
- ▶ Höjd 40 eller 80 cm (minsta sängen enbart 80 cm)

6. Anpassningsbar sängbotten


- ▶ Sängbottens indelning är designad baserat på antropometriska mått för bästa stöd och utmärkt komfort för barnet

7. Reglerbar sängbotten

- ▶ Fast sängbotten utan regleringsmöjlighet, sängbotten där vissa delar regleras elektriskt med manöverdosa och bendelen manuellt med rastofix alternativt fullt elektriskt manövrerad för optimal support

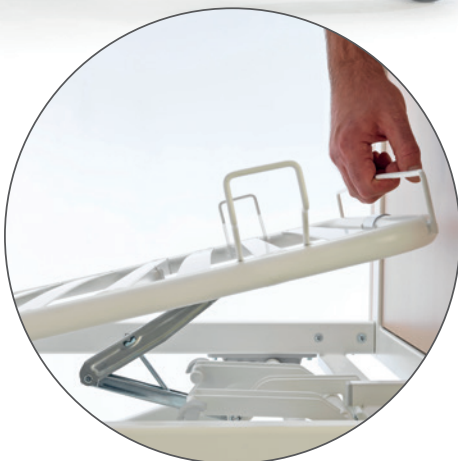

Möjliga konfigurationer av NordBed Kid sängbotten

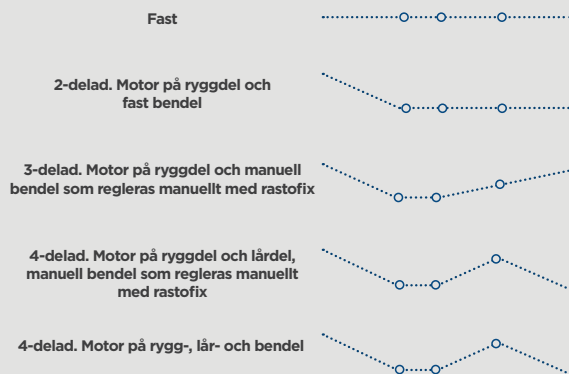

Designad för komfort och säkerhet

NordBed Kid erbjuder maximal komfort samtidigt som den uppfyller den nya strikta EU standarden

Urval av grindar

NordBed Kid kan anpassas med olika grindar baserat på barnets behov. Grindarna har designats med ökad styrka och stabilitet för att möta kraven i standarden EN50637:2017. Nedan visas de olika valmöjligheterna som finns.

Vikbara grindar

- ▶ Grindarna kan öppnas fullt eller delvis för att enkelt kunna komma åt barnet samtidigt som sängens stabilitet och säkerhet bibehålls
- ▶ Säkerhetslås som är enkelt att använda samtidigt som det håller grinden säkert stängd
- ▶ Säkerhetslåsets design som garanterar smidig användning och barnets säkerhet när det befinner sig i sängen
- ▶ Tillgänglig i 40 cm höjd för medium och large sängarna, och 80 cm för alla tre sängstorlekarna

Nedfällbar grind

- ▶ Sänks smidigt ner i en rörelse för att enkelt kunna komma åt barnet
- ▶ Lätthanterlig utlösarmekanism i grindens överkant möjliggör för vårdaren att stå kvar framför barnet
- ▶ Finns endast i 40 cm höjd och för de två största sängarna

Plexiglassidor

- ▶ Alternativ speciallösning
- ▶ Transparent för optimal sikt

Fasta sidor

- ▶ Fasta grindar finns i 40 cm och 80 cm höjd

Polstring

- ▶ Skyddande polstring med hygienöverdrag finns till samtliga grindar för att ge extra skydd till barnet och trygghet för vårdaren
- ▶ Alla grindar kan hanteras samtidigt som polstringen sitter kvar på dem



Tekniska data ▼


Ytterligare information om NordBed Kid och dess tillbehör så som manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se



Yttermått
Innermått ▼



Utvändig längd
Invändig längd ▼

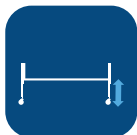

Lyftintervall ▼



Sängbotten-
indelning ▼



Frigång under
sängen ▼



Ryggstöds-
vinkel ▼

	Yttermått Innermått ▼	Utvändig längd Invändig längd ▼	Lyftintervall ▼	Sängbotten- indelning ▼	Frigång under sängen ▼	Ryggstöds- vinkel ▼
Small	90/80cm	140/146cm	30-80cm	62-7-16-48cm	15cm	0-70°
Medium	90/80cm	160/166cm	30-80cm	67-13-18-55cm	15cm	0-70°
Large	90/80cm	179/185cm	30-80cm	78-15-23-57cm	15cm	0-70°



Lårdelsvinkel ▼



Bendelsvinkel ▼



Max brukarvikt ▼




Total vikt (utan
sänggavlar) ▼



Tyngsta
separata del ▼

	Lårdelsvinkel ▼	Bendelsvinkel ▼	Max brukarvikt ▼	Total vikt (utan sänggavlar) ▼	Tyngsta separata del ▼
Small	0-12°	0-24°	70kg	86kg	33kg
Medium	0-12°	0-30°	70kg	95kg	40kg
Large	0-12°	0-30°	70kg	97kg	42kg

Ramfärg ▼

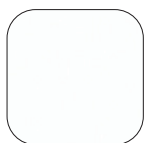

Vit

RAL: 9016



Bok (trä)



Testad av TÜV mot
Standard EN50637:2017

Please note: Colours may vary slightly from those displayed above.

Regulatoriska data ▼

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



Yes, you can.®