

INVACARE INFORMERAR

www.invacare.se

OKTOBER 2021



I detta nummer:

Manuella rullstolar	s 2-3
Elrullstolar, Scootrar, Drivaggregat & Oxygen	s 4-5
Madrasser, sitt- & ryggsystem	s 6-7
Hygienstolar	s 8-11
Hitta din kontaktperson	s 12-14

INVACARE INFORMERAR

Manuella rullstolar & Sportprodukter

*Nya brukarbromsar till **Azalea** med 22" eller 24" drivhjul*

Vi kommer att byta ut brukarbromsen för **Azalea** med drivhjul i storlek 22" eller 24", artikelnummer, SP1588553 och SP1588552 och låta dem utgå ur vårt sortiment.

I och med detta önskar vi förbättra och förenkla för användaren att nå bromsgreppet men även underlätta genom att minska antalet varianter av bromsar.

De bromsar som kommer ersätta har artikelnummer SP1588568 och SP1588567 och används idag redan på varianter av **Azalea** och **Dahlia**.

Utgående bromsar
SP1588553
SP1588552

Nya bromsar
SP1588568
SP1588567

Skillnaden mellan bromsarna är att den broms som ersätter (SP1588568 och SP1588567) har ett grepp som är vinklat. Broms (SP1588553 och SP1588552) har ett grepp som är rakt. Funktion och inställningar är desamma.

Den nya bromsen är 100% bakåt kompatibel.

Mera information om tidpunkten om skiftet kommer längre fram.

*Nytt kombinationsavtal med **Decon & Küschall***

Vi har glädjen att meddela: nu finns det ett kombinationsavtal med Decon Adventus påhängshjul tillsammans med två modeller av Küschall-rullstolar, K-serie 2.0 och KSL 2.0.

Kombinationsavtalet innebär att montering av ett Adventus-hjul på en Küschall-rullstol med standard-fotbåge av aluminium är godkänt.

Ingen förstärkt fotbåge krävs.



INVACARE INFORMERAR

Manuella rullstolar & Sportprodukter

*Harmonisering av tillbehör till **REA Spirea4 & XLT***

För att ytterligare förbättra och förenkla så kommer vårt sortiment av drivhjul och länkhjul harmoniseras. Det kommer innebära att XLT och Spirea4 får likadana hjul som idag används till Azalea och Dahlia.

Planen är att det ska ske till första januari 2022, mer exakt information kommer senare i höst. Då kommer även en lista över vilka delar som försvinner och vilka som ersätter.

En del av harmoniseringen är också att de vinkelställbara benstöden som använts till Azalea under en längre tid också numera används på Spirea4 och XLT Swing.

Välkommen in på vår hemsida för att läsa mer!

Hälsningar
Joakim Sköldfelt
Produktchef Manuella rullstolar och Sportprodukter
jskoldfe@invacare.com, 070-598 84 05

INVACARE INFORMERAR

Eldrivna rullstolar, Scootrar, Drivaggregat

DuoDrive ny kontrollenhet till e-Motion M25

Med **DuoDrive**-kontrollenheten i driftläget kan e-motion enkelt växlas mellan traditionell körning där navmotorerna hjälper till att föra rullstolen framåt, eller Cruise-kontroll (Farthållare).

Cruise-kontroll aktiveras genom att man för vridhjulet på kontrollenheten framåt. Med vridhjulet så ställer man in önskad hastighet. Vid stillastående så kan man välja och växla mellan körprofil 1 och 2 (Likt funktionen på ECS-fjärrkontroll).

E-motion DuoDrive säljs komplett med ett hjulpar inklusive batteri & laddare samt en kontrollenhet. Monteringssats till rullstol säljs separat.
Det går inte att uppdatera befintliga e-motion hjul med DuoDrive kontrollenhet.



INVACARE INFORMERAR

Eldrivna rullstolar, Scootrar, Drivaggregat & Oxygen

Action Esprit den nya generationen elrullstolar

Den nya elrullstolen **Action Esprit** är en ihopfällbar elrullstol, som i komfort-hänseende går att jämföra med en klassisk Action-rullstol.

Action Esprit kombineras enkelt med de flesta tillbehör, dynor och ryggar för vårt manuella rullstolssortiment från REA.

Den eldrivna rullstolen är krocktestad och med sitt avtagbara batteri och möjlighet till att fälla ihop kan rullstolen tas med på de flesta resor.



Välkommen in på vår hemsida för att läsa mer!

Hälsningar
Mikael Forsman
Produktchef Elrullstolar, Scootrar, Drivaggregat & Oxygen
mforsman@invacare.com, 08-5223 70 44

INVACARE INFORMERAR

Madrasser

InvaSoft Hybrid en madrass utan pump

InvaSoft Hybridmadrass utan pump som är lämplig för patienter med hög risk för tryckskador. Även om det inte finns någon allmänt accepterad definition av en hybridmadrass, kombinerar hybridmadrasser skum och luft för att maximera fördelarna med tryckavlastning.

InvaSoft Hybrid använder en innovativ kombination av material och teknik för att förbättra tryckfördelningen, minska skjuv & friktion och säkerställer en mycket effektiv mikroklimathantering.

Madrassen är oberoende testad på Berliner Cert gällande tryck, skjuv och mikroklimat med mycket goda resultat.

InvaSoft Hybrid är uppbyggd i moduler av olika tekniker

- Åtta horisontellt placerade luftceller i kombination med ett innovativt nudelmaterial och skum ger ett öppet och lågt reaktivt mottryck.
- Ett unikt designat nudellager av polyester precis under komfortskiktet och ovanpå de automatiskt justerande luftcellerna ger det nödvändiga stödet och bidrar till att hantera mikroklimat
- Tre luft inlopp på vardera sidan genererar en venturi effekt. Detta stöder det interna luftflödet.
- Den 5° sluttande hälsektionen hjälper till att ta bort vikt från hälområdet. Det specialiserade anti-skjuv lagret erbjuder extra skydd för de sårbara hälarna.
- Det släta och elastiska överdraget är ett mycket ventilerande polyuretanbelagt överdrag som är tåligt gällande flera rengörings- och desinfektionsmetoder.

InvaSoft Hybrid finns i 2 bredder 83/88 och är 17 cm hög

Artikelnummer	1633301	83x200x17
	1633303	88x200x17



INVACARE INFORMERAR

Sitt- & Ryggdynor

Vicair Hygiendyna NYHET

Sedan en tid tillbaka har vi fått förfrågningar gällande tryckavlastande sittdyna i hög risk från Vicair för hygienstolar. Nu har vi glädjen att informera er alla att den kommit.

Vicair hygien är en dyna som är uppbyggd i 4 sektioner med möjlighet till anpassning om behov finns, precis som andra dynor i Vicairs sortiment. Dynan är framtagen att passa främst till vår Ocean Ergo men går att använda på andra märken av hygienstolar efter en riskanalys. Dynan fäst fast med 4 fästband i vartdera hörnet som säkerställer att dynan ligger på plats. Ovansidan är ett vätske avvisande material medan undersidan är i ett nätmaterial, allt för att underlätta rengöring av dynan. Självklart går den att tvätta i maskin 60°.

Vicair hygien finns i en storlek 48x45x8 cm

Artikelnummer VHY/4845



Liten väska som tillbehör NYHET

Vicair Active O2 sittdyna har en inbyggd väska fastsydd på dynan.

Nu kan vi informera er om att enbart väskan går att få som tillbehör. Passar att placera både på rullstol eller rollator.

Den är liten och diskret och fästs med dubbelhäftande kardborrband vart än behovet finns.

Artikelnummer 01100005



Välkommen in på vår hemsida för att läsa mer!

Hälsningar
Stina Dalhbeck
Produktchef Dynor & Madrasser, Selar & Bälten
sdahlbec@invacare.com, 08-5223 7045

INVACARE INFORMERAR

Hygienhjälpmedel

Nya tillbehör till **Aquatec Ocean Ergo-familjen**



*Aquatec Ocean Ergo familjen
levereras nu med nya armstöd 2.0*



*Armstöd 2.0, passar både
Aquatec Ocean-familjen
och Aquatec Ocean Ergo-familjen.*



*Armstödsdyna mjuk,
passar till armstöd 2.0*



*Armstödslåsning,
passar till armstöd 2.0*



*Barriär 2.0 standard (54 cm bred) och
Barriär 2.0 XL (62 cm bred) passar armstöd 2.0.*

INVACARE INFORMERAR

Hygienhjälpmedel

Tiltstopp för **Aquatec Ocean Vip Ergo & Dual Vip Ergo**



Tiltstopp för sits i framåt tilt, finns nu som tillbehör för Ocean Vip Ergo och Dual Vip Ergo.

Artikelnummer	Beskrivning		
SP1647583	Armstöd 2.0 inkl hållare/ skruv HÖ	R	Passar Ocean Ergo fam och Ocean fam
SP1647584	Armstöd 2.0 inkl hållare/ skruv VÄ	R	Passar Ocean Ergo fam och Ocean fam
AP1643748	Armstödsdyna, mjuk (armstöd 2.0) st	T	Passar armstöd 2.0
AP60123732	Barriär 2.0 std Ergo (armstöd 2.0)	T	Passar armstöd 2.0
AP60123771	Barriär 2.0 XL Ergo (armstöd 2.0)	T	Passar Ocean Ergo XL med armstöd 2.0
SP1643752	Lock till armstöd 2.0 sidan Ergo	R	Passar armstöd 2.0
SP1647608	skruvset för armstöd 2.0	R	Passar armstöd 2.0
AP1643760	Armstödslåsning för armstöd 2.0 (st)	T	Passar armstöd 2.0
SP60129114	Skruvset för sitthöjd, ny lägre Ocean Ergo	R	Passar Ocean Ergo/ XL / 24"
AP60129156	Tiltstop framåt, sits	T	Passar Ocean Vip Ergo och Dual Vip Ergo



INVACARE INFORMERAR

Hygienhjälpmedel

*Två nya sitthöjder i **Aquatec Ocean Ergo***

Ocean Ergo, Ergo XL och Ergo 24" har fått två lägre sitthöjder.

Jämförelse tidigare och nya sitthöjden, se C1 och C2.

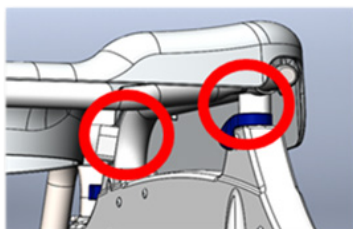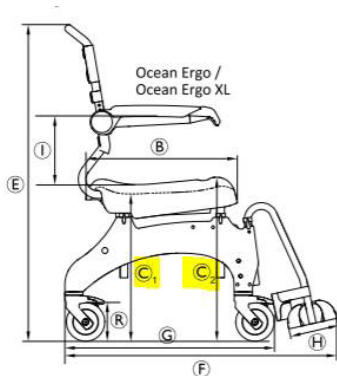

Ocean Ergo	Höjdjustering
Sitthöjd C1 förr	475 - 600 mm
Sitthöjd C2 förr	533 - 658 mm
Sitthöjd C1 ny	440 - 600 mm
Sitthöjd C2 ny	498 - 658 mm

Ocean Ergo modell:	Serienummer start för ny lägre sitthöjd	Serienummer start för armstöd 2.0
Ocean Ergo	21FVP100001-216	21BVP100150-184
Ocean Ergo med riktningsspärrat hjul	21EVP110000	21EVP110000
Ocean Ergo XL	21FVP120001-12	21BVP120009-16
Ocean Ergo XL med riktningsspärrat hjul	21EVP130000	EVP130000
Ocean Vip Ergo		21BVP300047-106
Ocean Vip Ergo med riktningsspärrat hjul		CVP310001-30
Ocean Dual Vip Ergo		EVP340000
Ocean Dual Vip Ergo m riktningsspärrat hjul		CVP350001-30

Är du nyfiken på den uppdaterade Ocean Ergo-familjen, kom in till oss på mässan så berättar vi mer! Fokus Hjälpmedel i Umeå den 12 - 13 oktober, och Fokus Hjälpmedel på Kistamässan den 17 - 18 november.

Varmt välkomna!

INVACARE INFORMERAR

Hygienhjälpmedel

*Våra storsäljande **Aquatec Ocean** har ersatts*

Tidigare Aquatec Ocean Vip och Ocean Dual Vip har ersatts av Aquatec Ocean Vip Ergo och Ocean Dual Vip Ergo överst på sidan.



Gamla Aquatec Ocean Vip.

Välkommen in på vår hemsida för att läsa mer!

Hälsningar
Marie-Louise Tham
Produktchef Gång- och Hygienhjälpmedel
mltham@invacare.com, 08-5223 7020

INVACARE INFORMERAR

Hitta din kontaktperson

Manuella rullstolar, Dynor, Sitt- och Ryggssystem



Johanna Koch
Distriktsansvarig
Stockholm,
Uppsala, Gotland,
Södermanland,
Östergötland,
Västernorrland



Håkan Johansson
Distriktsansvarig
Värmland,
Västmanland,
Gävleborg,
Dalarna, Örebro



Martin Tornberg
Distriktsansvarig
Norrbotten,
Västerbotten,
Jämtland



Dan Emmertz
Distriktsansvarig
Skåne, Blekinge,
Halland, Kronoberg,
Kalmar



Rasmus Wallgren
Distriktsansvarig
Västra Götaland,
Jönköping

jkoch@invacare.com
070-224 58 82

hjohanss@invacare.com
070-575 92 50

mtornber@invacare.com
070-347 63 96

demmertz@invacare.com
070-190 21 63

rwallgre@invacare.com
070-340 32 53

Elrullstolar, Scootrar, Drivaggregat, Sitt- och Ryggssystem



Peder Tägtström
Distriktsansvarig
Västra Götaland,
Jönköping, Kalmar,
Västervik, Blekinge,
Kronoberg, Halland,
Skåne, Gotland,
Östergötland



Bertil Lundh
Distriktsansvarig
Stockholm,
Uppsala,
Västernorrland



Håkan Johansson
Distriktsansvarig
Dalarna,
Västmanland,
Södermanland,
Gävleborg,
Örebro, Värmland



Martin Tornberg
Distriktsansvarig
Norrbotten,
Västerbotten,
Jämtland

ptagtstr@invacare.com
070-313 70 33

blundh@invacare.com
070-202 43 32

hjohanss@invacare.com
070-575 92 50

mtornber@invacare.com
070-347 63 96

INVACARE INFORMERAR

Hitta din kontaktperson

Sängar, Personlyftar och Madrasser




Martin Tornberg
Distriktsansvarig
Norrbotten,
Västerbotten,
Jämtland



Maths Fuxinger
Distriktsansvarig
Västra Götaland



Mats Adelros
Distriktsansvarig
Halland, Blekinge,
Kronoberg, Skåne,
Jönköping

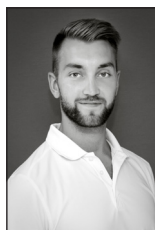

Anton Enlund
Distriktsansvarig
Stockholm,
Gotland, Kalmar,
Södermanland,
Östergötland



Per-Olof Fallemark
Distriktsansvarig
Värmland, Uppsala,
Västmanland,
Södermanland
Örebro, Gävleborg,
Dalarna

mtornber@invacare.com
070-347 63 96

mfuxinge@invacare.com
0708-32 07 75

madelros@invacare.com
070-677 33 80


aenlund@invacare.com
0720-70 52 71

pfallema@invacare.com
070-204 67 60

Gång- och Hygienhjälpmedel



Christina Nilsson
Distriktsansvarig
Jönköping,
Blekinge,
Kalmar, Skåne,
Kronoberg,
Östergötland,
Halland

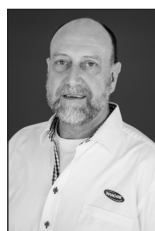

Per Danielsson
Distriktsansvarig
Västra Götaland,
Värmland



Bertil Lundh
Distriktsansvarig
Stockholm,
Uppsala, Gotland,
Västmanland,
Södermanland,
Gävleborg,
Örebro, Dalarna,
Västernorrland

cnilsson@invacare.com
070-558 84 69

pdaniels@invacare.com
073-274 44 19

blundh@invacare.com
070-202 43 32

Hitta din kontaktperson

Oxygenprodukter



Martin Tornberg

Distriktsansvarig
Norrbotten,
Västerbotten,
Jämtland

mtornber@invacare.com
070-347 63 96



Bertil Lundh

Distriktsansvarig
Stockholm,
Gotland, Värmland,
Uppsala,
Västmanland,
Södermanland,
Örebro, Gävleborg,-
Dalarna,
Västernorrland

blundh@invacare.com
070-202 43 32



Christina Nilsson

Distriktsansvarig
Jönköping,
Blekinge,
Kalmar, Skåne,
Kronoberg,
Östergötland,
Västra Götaland,
Halland

cnilsson@invacare.com
070-558 84 69

Key Account Managers



Johan Bergkvist

Key Account Manager

jbergkvi@invacare.com
070-191 90 75



Christer Nyqwist

Key Account Manager

cnyqwist@invacare.com
070-459 97 22

Du vet väl att vi finns på Facebook, klicka förbi direkt och Gilla vår sida!



På vår Facebook-sida kan du följa oss på nära håll, se spännande nyheter, läsa artiklar, delta i tävlingar och mycket mer. Dessutom kommer vi att dela några av de många inläggen från vår bloggsida Passionate people!

Välkommen in!

www.facebook.com/InvacareSverige