



INVACARE INFORMERAR
FEBRUARI 2024



Yes, you can.®

Innehåll

Invacare Informerar Februari 2024

Så når du oss på Invacare	s 2-3
Manuella rullstolar	s 4-5
Drivaggregat & Elrullstolar	s 6-8
Sängar & Personlyftar	s 9
Dynor & Madrasser	s 10-11
Hygienhjälpmedel	s 12
Hitta din kontaktperson	s 14-16

Kundservice når du snabbt och enkelt

Manuella rullstolar:

kundservice.manuella@invacare.com 08-5223 70 27

Gång & Hygien:

kundservice.ganghygien@invacare.com 08-5223 70 28

Eldrivna rullstolar, Scootrar och Drivaggregat:

kundservice.el@invacare.com 08-5223 70 25

Sängar, Personlyftar & Madrasser:

kundservice.sangar@invacare.com 08-5223 70 26

Teknisk Service


sinvacare@invacare.com 08-761 70 90

YouTube Invacare Sverige

Enkla instruktionsfilmer i vardagen

Vår YouTube-kanal är platsen där du som förskrivare eller anhörig till en användare/brukare av Invacares produkter finner information och instruktionsfilmer. Få guidning till att på ett enkelt sätt justera och anpassa utrustningen individuellt.

[www.youtube.com InvacareSverige](https://www.youtube.com/InvacareSverige)

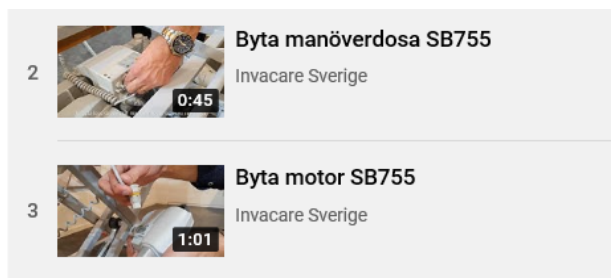

Sociala medier - håll er ajour!

klicka förbi direkt och Gilla vår sida!



Välkommen in!

www.facebook.com/InvacareSverige



Välkommen in!

www.instagram.com/invacare_sverige

Kostnadsfria utbildningar

*Digitala utbildningar eller utbildningar på plats
Håll dig uppdaterad via våra nyhetsbrev*

Manuella rullstolar

Förkorta sittdjupet på *REA Azalea Max*

Det har uttryckts önskemål om att få ett kortare sittdjup på Azalea Max. Nu finns möjligheten att korta sittdjupet med 50 mm. Det kan göras vid nybeställning men även på stolar som redan används idag.

Det görs genom att montera en distans på höger respektive vänster ryggrör som gör att ryggen kommer 50 mm längre fram.

Bild 1 visar hur ryggen är monterad som standard.

Bild 2 visar när distansen är monterad, blå markering.

OBS! Med distanser monterade är rullstolen inte godkänd för transport i bil och märklappar för transportfästen och själva transportfästet skall tas bort.

Artikelnummer: DE261483

Benämning: Distanser 50mm f kortare sd Aza Max

Artikeln finns i Hjälpmedelstjänsten



Bild 1

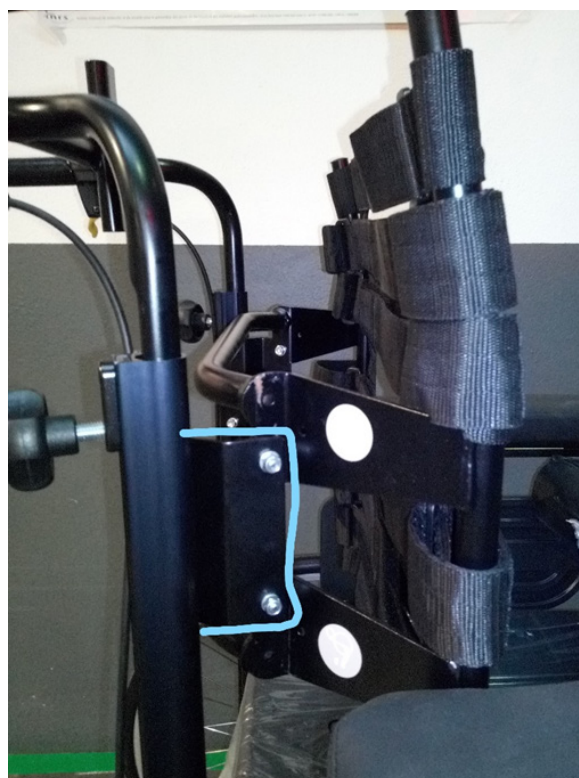


Bild 2

Manuella rullstolar

NYTT amputationsbenstöd till rullstol XLT Swing


De nya amputationsbenstöden är enbart till för XLT Swing och finns i en storlek som passar alla sittbredder av XLT Swing.

Att använda amputationsbenstöd både på höger och vänster sida samtidigt fungerar enbart på sittbredd 43 och bredare

Nya artikelnummer

1512727, Benstöd amp XLT f sb 43-50,5 hö


1512728, Benstöd amp XLT f sb 43-50,5 vä

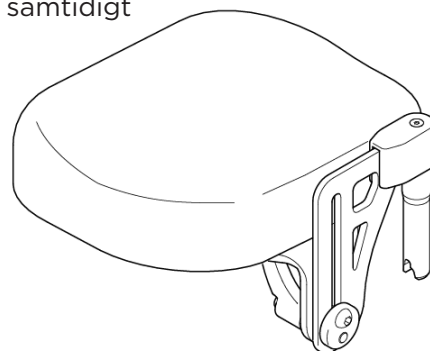

Amputationsstödet som **utgår**, var för XLT men passade även andra rullstolar och elrullstolar, se bild nedan.

1429191-0509 hö och 1429212-0509 hö, ersätts av 1512727

1429192-0509 vä och 1429211-0509 vä, ersätts av 1512728

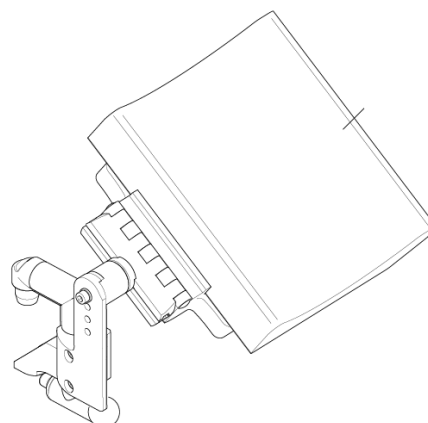

<u>Utgår</u>		<u>Ersätter</u>
1429192-0509	Benstöd amputation sb 38-43cm vä XLT Swing	1512728
1429191-0509	Benstöd amputation sb 38-43cm hö XLT Swing	1512727
1429211-0509	Benstöd amputation sb 45,5-50,5cm vä XLT Swing	1512728
1429212-0509	Benstöd amputation sb 45,5-50,5cm hö XLT Swing	1512727

Joakim Sköldfelt

Produktchef Manuella rullstolar och Sportprodukter

jskoldfe@invacare.com, 070-598 84 05

Drivaggregat

NYHET Alber Via GO drivaggregat

Den kraftfulla & lättanvända påskjutshjälpen för manuella rullstolar. Via GO, passar de flera manuella rullstolar på den svenska marknaden, välj mellan tre olika bredder på monteringsfästet. Den ger assistans för den som skall skjuta rullstolen och hjälper med liten ansträngning till att komma framåt i vardagen. Lätt vikt, endast knappt 7 kg men klarar 180 kg i brukarvikt och en sträcka på upp till 16 km.

Batteriet laddas enkelt direkt i vägguttaget.

Via GO passar perfekt på vårdboenden, och i entrehallen på en större vårdmottagning med långa korridorer eller liknande.



Nytt monteringsbeslag för Alber Viamobil V25 till HD Balance

Vi har utvecklat ett nytt monteringsbeslag för Viamobil V25 till rullstolsmodell HD Balance. Det nya beslaget underlättar då man skall plocka av eller docka på sin Viamobil. Det gamla beslaget kommer att finnas kvar.

Art Nr 1594796

Elrullstolar

NYHET *Erivo* hopfällbar rullstol


För den självständiga brukaren, aktiv i vardagen, har vi nu lanserat en hopfällbar elrullstol. I sitt hopfällda läge är den i storlek som en större resväska, passar i de flesta baggage-utrymmen och går att ta med på flyget (med det mindre batteriet), tar användaren upp till 17 km, max brukarvikt 150 kg.

En av de viktigaste faktorerna att ta i beaktande vid val av en elrullstol är sittkomforten. *erivo* erbjuder en genomtänkt ergonomi och bra materialval.

Bakhjulsupphängning med fjädring i kombination med luftfyllda däck tryggar en enastående åkkomfort. De stora framhjulen är punkteringsfria och idealiska då man ska övervinna små hinder.

Ytterligare fördelar;

- Batteripaket: två versioner (17/36km)
- Snabbladdning på bara 6 timmar
- Undanfällbar manöverenhet
- Möjlighet till vårdarstyrning som tillbehör
- Uppfällbara armstöd
- Höjdjusterbart fotstöd
- Innovativ design
- Låg vikt och kompakt design

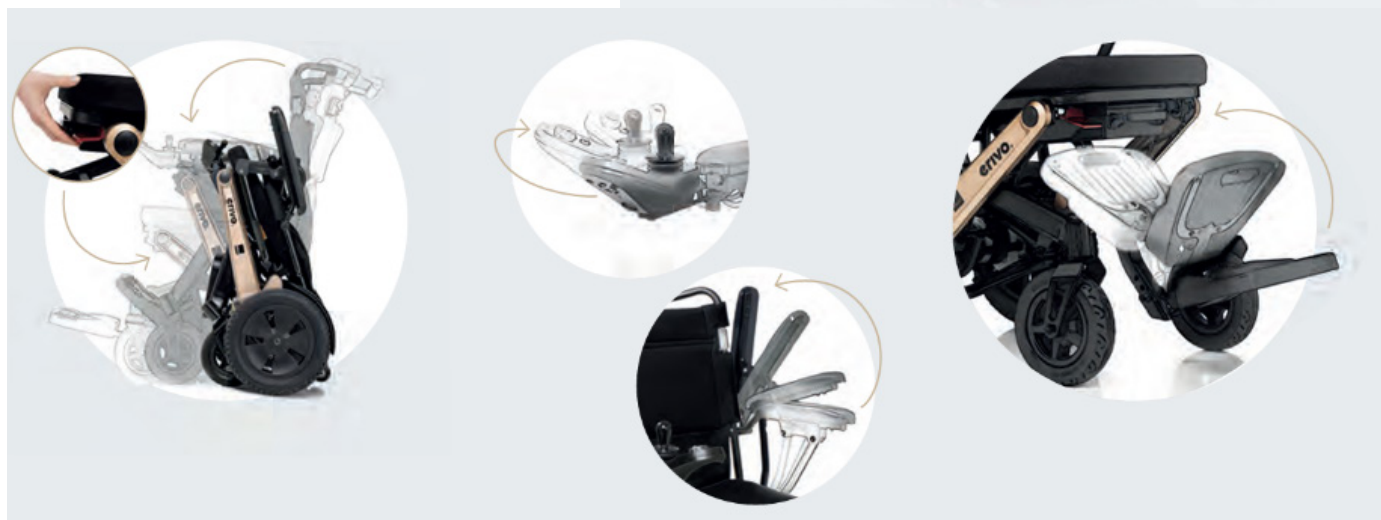

Mikael Forsman

Produktchef eldrivna rullstolar, scooter,
påskjutsaggregat & oxygen
mforsman@invacare.com, 070 528 62 86

Drivaggregat & Manuella rullstolar

Kostnadsfritt - föreläsningar och prova-på-utställning

Invacare, Alber & Yasmin Nilson
bjuder in till
föreläsningar &
prova-på-utställning



Under våren kommer Invacare att besöka Göteborg och Sundsvall där vi anordnar en eftermiddag tillsammans med er. Vi kommer även till Stockholm/Kista (Hjultorget) men i ett något annorlunda format. Ni får bla lyssna till Yasmin Nilson (journalist, poddare och programledare) Ambassadör för Invacare och hennes erfarenheter av livet i rullstol, dessutom en föreläsning om möjligheterna att främja fysisk aktivitet och förebygga psykisk ohälsa genom att fler rullstolsanvändare får tillgång till drivaggregat. I samband med detta erbjuder vi en prova-på-utställning med fokus på Alber-produkter, drivaggregat du kopplar till valfri manuell rullstol.

Kom och lär dig om det senaste på marknaden, testkör våra produkter inom området för drivaggregat och rullstolar.

Målgrupp är främst du som arbetar som hjälpmedelstekniker, konsulent eller förskrivare av drivaggregat eller manuella rullstolar, men även övriga professioner som har ett intresse.

[OBS, begränsat antal platser. Anmäl dig här](#)

Sängar & Personlyftar

Ny elektronik i Birdie EVO Compact

Vi har bytt elektronik i Birdie EVO Compact. Den nya elektroniken kommer från Timotion och har många nya finesser, tex avtagbart batteri, batteriindikator både på elektroniken och manöverdosan. Detta gäller from hösten 2023.



Johan Bergkvist
 Produktchef Sängar & Personlyftar
jbergkvi@invacare.com, 070-191 90 75

Madrasser

Dacapo skummadrasser, uppdaterat sortiment

I över 20 år har Dacapo varit vårt pålitliga sortiment av tryckfördelande madrasser, som erbjuder komfort och stöd till användare med risk för tryckskador. Madrasserna är designade i samråd med experter med klinisk kunskap i kombination med vårt team för innovativ design.

Nu har vi uppdaterat vårt sortiment av Dacapo skummadrasser. Flera av våra tidigare modeller har utgått och ersatta av nya. Det uppdaterade sortimentet har ett omfattande utbud av tryckfördelande skummadrasser



Tryckfördelning

Alla våra kliniska madrasser erbjuder effektivt tryck fördelning för varje användares position.

Reducering av skjuv- och friktion

Vårt multistretchtyg i flera riktningar hjälper till att minska skjuv och friktion. Madrasserna har ett heltäckande elastiskt hygienöverdrag utrustat med två bärhandtag.

Mikroklimathantering

Skumstrukturer som säkerställer optimal mikroklimathantering.

Extra tillbehör

Vissa modeller går att få med evakueringsöverdrag samt förvaring/transportväska finns som tillbehör

Madrasser

Dacapo skummadrasser, delar som utgått och ersatts

Madrasser som utgått och blivit ersatta

Dacapo Top ersatt av Dacapo Top Pro

Dacapo Comfort/ Comfort Plus ersatt av Dacapo Excel

Dacapo Heavy User Light ersatt av Dacapo Ampla

Denna uppdatering innebär även att alla madrasser har fått nya artikelnummer

Läs mer om madrasserna på www.invacare.se

Utbildning, digital & kostnadsfri

Ökad kunskap kring trycksador och olika typer av madrasser, dess uppbyggnad och funktioner.

I den här utbildningen tar vi upp ämnen som:

- Introduktion av EPUAP Guidelines rekommendationer
- Trycksår ett stort och kostsamt problem
- Definition av trycksår
- Trycksårs uppkomst och dess kategorier
- Vem riskerar att få trycksår -inre/ yttre faktorer
- Varför är ett bra mikroklimat viktigt
- Vikten av re-positionering
- Att välja underlag

[Anmäl dig kostandsfritt idag](#)

Stina Dalhbeck

Utbildningschef/ Produktchef dynor och madrasser

sdahlbec@invacare.com, 070-374 07 50



Hygienhjälpmedel

Multijusterbart nackstöd till Aquatec Ocean VIP Ergo-familjen

Vi på Invacare vill informera om ett byte av artikelnummer:

Stag - AP1531613 till Multijusterbart nackstöd, vinkelställbart 2.0
ersätter

- Stag - 1531613 som utgår ur vårt sortiment.

AP1531613 erbjuder följande funktioner:

- Fyra riktningsmöjligheter som styrs av tre snabbskruvar.
- Framåt/bakåt
- Höger/vänster
- Nedgång/uppgång
- Rotation
- Plus: upp/ner via handskruven vid körstängan

Ytterligare information:

Snabb, effektiv, verktygsfri installation och justering

Ersätter tidigare modell 1531613

Finns som tillbehör för alla tilt-modeller,

Aquatec Ocean Vip Ergo,

Aquatec Ocean Dual Vip Ergo.



Utbildning, digital & kostnadsfri

Tips & trix, med Hygienstolen, en genomgång för vårdteamet

Under denna 1-timmes utbildning kommer vår produktspecialist Jeanette Riglert att besvara de vanligaste handhavandefrågorna genom åren, till exempel; var en tiltningsspärr ska placeras, hur ett benstöd justeras och förlängs. Vi kommer att belysa med "hands on" hur en justering görs och även påtala de ergonomiska fördelarna i flera av våra funktioner & tillbehör. Vissa tillbehör passar vissa typer av brukare, nyttja resurserna rätt.

[Anmäl dig kostandsfritt idag](#)

Jeanette Riglert
Produktchef gång- och hygienhjälpmedel
jriglert@invacare.com, 070-538 33 80



Hitta din kontaktperson

Manuella rullstolar, Dynor, Sitt- och Ryggssystem



Johanna Koch

Distriktsansvarig
Stockholm, Uppsala,
Gotland,
Östergötland

jkoch@invacare.com
070-224 58 82



Martin Tornberg

Distriktsansvarig
Norrbotten,
Västerbotten,
Jämtland/
Härjedalen,
Västernorrland

mtornber@invacare.com
070-347 63 96



Dan Emmertz

Distriktsansvarig
Skåne, Blekinge,
Halland, Kronoberg,
Kalmar

demmertz@invacare.com
070-190 21 63



Rasmus Wallgren

Distriktsansvarig
Västra Götaland,
Jönköping

rwallgre@invacare.com
070-340 32 53



Mikael Fagerström

Distriktsansvarig
Värmland, Dalarna
Örebro län
Västmanland
Sörmland
Gävleborg
Uppsala

mfagerst@invacare.com
070-575 92 50

Elrullstolar, Scootrar, Drivaggregat, Sitt- och Ryggssystem



Peder Tägtström

Distriktsansvarig
Västra Götaland,
Jönköping, Kalmar,
Blekinge,
Kronoberg, Halland,
Skåne, Gotland,
Östergötland

ptagtstr@invacare.com
070-313 70 33



Bertil Lundh

Distriktsansvarig
Stockholm,
Uppsala,
Västernorrland,
Värmland,
Dalarna

blundh@invacare.com
070-202 43 32



Martin Tornberg

Distriktsansvarig
Norrbotten,
Västerbotten,
Jämtland/Härjedalen

mtornber@invacare.com
070-347 63 96

Hitta din kontaktperson

Sängar, Personlyftar och Madrasser



Martin Tornberg

Distriktsansvarig
Norrbotten,
Västerbotten,
Jämtland/
Härjedalen

mtornber@invacare.com
070-347 63 96



Maths Fuxinger

Distriktsansvarig
Västra Götaland

mfuxinge@invacare.com
0708-32 07 75



Mats Adellos

Distriktsansvarig
Halland, Blekinge,
Kronoberg, Skåne,
Jönköping

madelros@invacare.com
070-677 33 80



Anton Enlund

Distriktsansvarig
Stockholm,
Gotland, Kalmar,
Sörmland,
Östergötland

aenlund@invacare.com
0720-70 52 71



Per-Olof Fallemark

Distriktsansvarig
Värmland, Uppsala,
Västmanland,
Sörmland, Väster-
norrand, Gävle-
borg, Dalarna

pfallema@invacare.com
070-204 67 60

Gång- & Hygienhjälpmedel



Maria Larsson

Distriktsansvarig
Jönköping,
Blekinge, Kalmar,
Skåne,
Kronoberg,
Halland

mlarsson@invacare.com
070-558 84 69



Mikael Fagerström

Distriktsansvarig
Värmland, Dalarna
Örebro län
Västmanland
Sörmland
Gävleborg
Uppsala

mfagerst@invacare.com
070-575 92 50



Martin Tornberg

Distriktsansvarig
Norrbotten,
Västerbotten,
Jämtland

mtornber@invacare.com
070-347 63 96



Jeanette Rigler

Gotland
Stockholm
Östergötland

jriglert@invacare.com
070-538 33 80

Hitta din kontaktperson

Oxygenprodukter



Martin Tornberg

Distriktsansvarig
Norrbotten,
Västerbotten,
Jämtland/
Härjedalen

mtornber@invacare.com
070-347 63 96



Bertil Lundh

Distriktsansvarig
Stockholm,
Gotland, Värmland,
Uppsala, Västman-
land, Sörmland,
Örebro, Gävleborg,
Dalarna,
Västernorrland

blundh@invacare.com
070-202 43 32



Maria Larsson

Distriktsansvarig
Jönköping,
Blekinge,
Kalmar, Skåne,
Kronoberg,
Östergötland,
Halland, Västra
Götaland

mlarsson@invacare.com
070-558 84 69