



Invacare[®] | **Soft Tilt**

Innovativ lösning för tryckavlastning



Invacare **Soft Tilt** är ett nytt, innovativt system som designats för att automatiskt ändra brukarens läge i sängen samtidigt som det underlättar för personalen i samband med förflyttningar i det dagliga vårdarbetet.

Soft Tilt installeras enkelt på Invacare **SB® 755** sängbotten och fungerar tillsammans med sängens övriga funktioner och madrass.

- Automatisk tryckavlastning
- Underlättar ensamarbete
- Optimerad brukar- och vårdarkomfort



Automatisk tryckavlastning

Soft Tilt kan programmeras för att under natten automatiskt, med förbestämda tidsintervall och vinklar ändra brukarens läge. Användning minskar tryck och förebygger utvecklingen av trycksår. Vid automatisk användning kommer vingarna aldrig att höjas mer än 30°, detta för att garantera optimal säkerhet och komfort medan brukaren sover.


Endast en vårdare behövs

Soft Tilt kan hanteras manuellt av en person vilket gör den idealisk för användning i vårdsituationer med begränsade resurser. Den lätthanterade manöverdosan tillåter vårdaren att höja vingarna upp till 60°, vilket underlättar omvårdnad och applicering av lyftselar och glidlakan. När **Soft Tilt** används tillsammans med sängens övriga funktioner, hjälper den vårdaren att med minsta ansträngning, på ett säkert sätt förflytta brukaren från liggande i säng till sittande på sängkant och stående.

Optimerad brukar- och vårdarkomfort

Tack vare de tysta, smidiga och automatiska rörelserna hos **Soft Tilt**, möjliggörs en lugnare och mer ostörd sömn. Dessutom förbättras vårdarens arbetsmiljö och risken för arbetsskador i samband med förflyttning och omvårdnad kan undvikas.



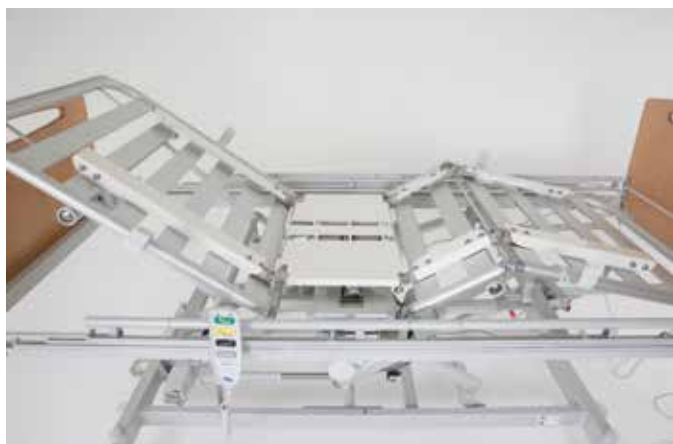

Sängbotten

Soft Tilt fungerar i kombination med sängbottens rörelser för att göra det bekvämt för brukaren och underlätta vid förflyttningar.



Bekväm och automatisk tryckavlastning

Vid användning av det automatiska programmet kommer den motsatta vingen att resa sig något för att ge ytterligare stöd för brukaren. Så snart brukaren förflyttats till önskad position återgår den motsatta vingen till horisontalläge.



Hantering

Vid manuell hantering via manöverdosan kan vingarna höjas till 60° i samband med förflyttning, omvårdnad och placering av lyftsele och glidlakan.



Programmerbar kontrollbox

Den lätthanterade kontrollboxen levereras med ett förinställt program (auto) och två program som kan anpassas för individuella brukarbehov. Efter programmering aktiveras programmet genom att aktuell knapp trycks in.



Lägesändring för komfort

Soft Tilt kan programmeras för att med båda vingarna höjda samtidigt försiktigt vända brukaren från sida till sida.



Manöverdosa

Tydlig och lättanvänd manöverdosa för manuell användning.









Överdrag

Blått överdrag med elastiska band som håller madrassen på plats. Tvättbar i maskin upp till 80 grader.

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

	Max vinkel i manuellt läge	Max vinkel i automatiskt läge	Tidsintervall i automatiskt läge	Max brukarvikt	Produktens tyngsta del	Tvättbart överdrag
						
Soft Tilt	60 °	30 °	0 - 180 minuter	165 kg SWL 185 kg	15 kg	80°

Viktigt!


Sängen skall inte användas av brukare under 12 år eller av brukare vars kroppstorlek motsvarar en 12-åring eller mindre.

Uppfyller kraven i IEC 60601-2-52

Soft Tilt ska endast användas tillsammans med **SB 755**.

Ramfärg

Vit



Vänligen notera att färgen kan variera något från den som visas ovan.

Soft Tilt tillverkas av GDV Technology på uppdrag av Invacare.

QR
Code

Tel: +46 8 761 70 90
Fax: +46 8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66
163 91 Spånga

Trusted Solutions,
Passionate People

