

matrx[®]
SEATING SERIES

Invacare Matrx Libra[®]



Nästa generations sittdyna -
Överlägsen komfort med optimal
tryckavlastning och positionering

INVACARE
Yes, you can.[®]

- Förbättrad design kombinerar skum och silikonbaserad gel för att ge en hög nivå av skydd mot tryck, positionering och justerbarhet för varje individuell användares behov
- Nytt två-lagers geleinlägg utvecklat från *Invacares Flo-tech™* teknik för att motverka skjuvning samt ge tryckavlastning
- Speciellt formad för att ge balans och stabilitet runt bäckenet samt optimera kroppens funktioner
- Lätt och underhållsfri, **Libra** erbjuder både funktionalitet och en aktiv livsstil

Unik design

- Skumbas - anatomiskt formad för ett optimalt bäckenstöd och positionering
- Tåligt höglastiskt skum
- Geleinlägg - dubbla lager med förseglade fack för maximalt skydd runt benutskott



Funktionella fördelar

- Inbyggt främre bäckenstöd som motverkar nerglidning och därmed reducerar skjuvkrafter
- Trochanterhylla som understödjer en lateral stabilitet av bäckenet
- Dynan har en utökad bakre form/radie för att motverka bakåttippning av bäckenet
- Avfasad framkant ger utrymme för strama hamstringar och att sparka sig fram
- Ab- / adductorform för en optimal benposition i mittlinje

Pålitlig och lätt

- Självutjämnande silikongel som inte är temperaturkänslig. Varken knådning eller underhåll krävs
- Med en viktminskning på 40% jämfört med andra högriskdynor t ex *Flo-tech™* dynor, har **Matrx Libra** en låg vikt och lämpar sig för en aktiv livsstil
- För komplexa sittbehov, finns en mängd lättanvända positioneringstillbehör tillgängliga

Egenskaper och tillbehör



Anatomisk sittgrop

Ökad yta för optimal tryckfördelning.



Tryckfördelning

Trycket förflyttas från bäckenet till låren, detta ger lägre tryck på utsatta riskområden.



Nersjunkning

Sittbensknölar sjunker ner i gel inlägget för optimalt skydd.



Motverka skjuvkrafter


Unik design ger stabilitet av bäckenet.

Egenskaper och tillbehör



Avfasad framkant

Vid strama hamstringsmuskler, underlättar när man sparkar sig fram.

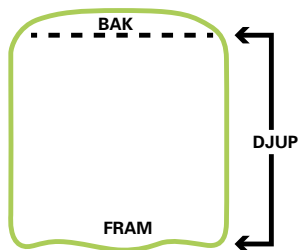

Dynstorlek

Sittdjup mäts längs med dynans långsida.



Utökad bakre form/radius

Den bakre delen av dynan har en utökad radius på 3,8 cm för maximal understödsyta och för att minska avståndet mellan sits och rygg. Stabilisering av gelen i tildad position samt extra avlastning av svanskotan.



Främre kil

För ökad lutning - motverkar nerglidning och skjuvkrafter.



Delad främre kil

Används vid nedsatt flexion i höften och/eller för att underlätta att sparka sig fram.



Avsmalnad kil

För ökat adduktionsstöd.




Avsmalnad kil

Vid assymetri och bäckenrotation, används i den bakre delen av dynan.



Lateral/sidostödskil

Förstärkning lateral för att stabilisera lårens position.

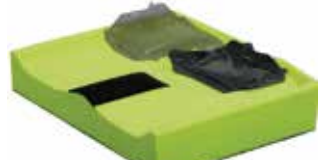

Extra geleinlägg

För extra avlastning eller vid asymmetriskt bäcken. Placeras säkert inuti det existerande geleinlägget i den anatomiska sittgropen.



Bendelare

Används för att förstärka bendelning och positionering av lårens placering i mittlinje.



Sidoficka för säker förvaring

Utrustad med en dragkedja.

Storlekar

Standardstorlekar i cm: bredd x djup Dynans högsta höjd 8 cm Maximal brukarvikt 136 kg						
36 x 31	38 x 41	41 x 41	43 x 41	46 x 41	48 x 41	51 x 41
36 x 36	38 x 46	41 x 46	43 x 46	46 x 46	48 x 46	51 x 46
36 x 41	38 x 51	41 x 51	43 x 51	46 x 51	48 x 51	51 x 51

Tunga brukare storlekar i cm: bredd x djup Dynans högsta höjd 8 cm Maximal brukarvikt 227 kg	
53 x 46	56 x 46
53 x 51	56 x 51
53 x 56	56 x 56

Tekniska data

För mer detaljerad information gällande denna produkt, inkluderat produktens bruksanvisning, var vänlig besök vår hemsida www.invacare.se.


	Dynans vikt	Max brukarvikt	Dynöverdrag	Inre övrerdraget och skumbas
				
Matrx Libra	1.6 kg	Std 136 kg HD 227kg	tvättas i maskin 80°	Avtorkas med fuktig trasa



Överdrag

Black smooth

Spacer

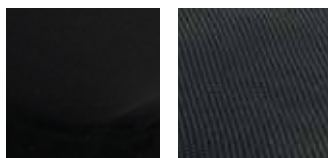

Hygienöverdrag
Ångandas

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden

