

Invacare® **Modulite**™
Individual fit and adaptability



Yes, you can.®




Maximal flexibilitet för anpassning efter individens behov

Grunden i Modullite™-sitsen är den smarta teleskoperande sitsramen. Tack vare dess konstruktion kan sitsen placeras i flera olika lägen för att passa de flesta brukares behov. En person med adekvat bakgrund, t ex arbetsterapeut, hjälpmedelstekniker etc. kan enkelt utföra de nödvändiga justeringarna för att optimera sitsen för brukaren.




Modulbaserad front

Den moduluppbyggda fronten säkerställer bästa möjliga inställning av sido- alternativt mittmonterade benstöd.

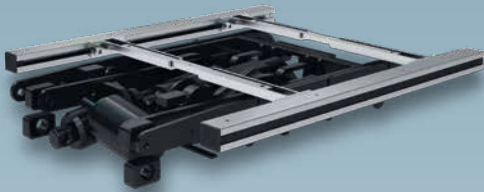

Teleskoperande innerram

Det finns en version vid montering av tilt- och lyftmoduler. Därmed kan brukaren placeras så lågt som möjligt vid exempelvis förflyttning.

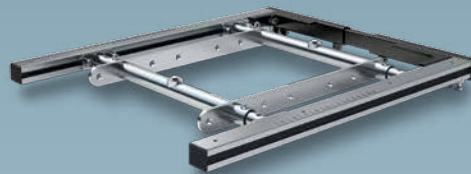


Sidskenor - Rails

Sitsen kan justeras i bredd från 38 cm till 53 cm tack vare den teleskoperande sitsramen. På vardera sidan av sitsen sitter ett skensystem monterat, så kallade rails. Tack vare dessa rails är det möjligt att individanpassa armstödens placering och montera extra tillbehör, t ex knästöd.

Ett stort urval av sittstöd

Det finns en mängd olika sittstöd och dynor till Modullite™ som kan användas för att förbättra brukarens komfort, kroppshållning och positionering.

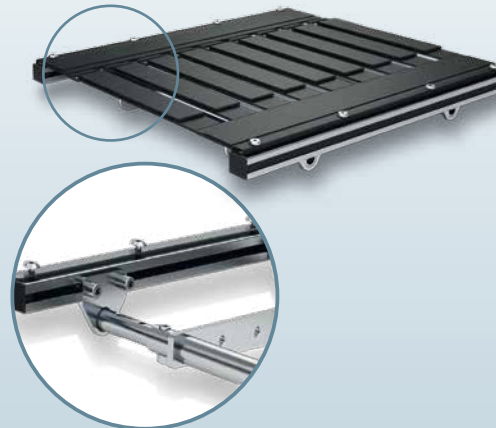

Hängmattesits

Sittytan formas efter brukarens kropp vilket ger bästa möjliga komfort och optimalt stöd.



Prisvärd och flexibel

För brukare med mindre komplexa behov är utgångspunkten för detta modulbaserade system den populära sittplattan i ett stycke, med inbyggda arm- och benstödsinfästningar. Tack vare att den har ett mycket enkelt utförande är den här modellen mycket flexibel och kan kombineras med ett stort antal tillval tack vare den teleskoperande grunden.



d och dynor



Justering av sittplattans djup och bredd

Den här tredelade sittplattan kan justeras steglöst i både längd och bredd.



Matrix® Flo-tech® sittdynor

För att tillgodose alla individuella behov och preferenser erbjuder vi även positioneringsdynor och tryckavlastande dynor från välrenommerade **Matrix® Flo-tech®**.




Ryggstödsjustering och positionering

Modulte™-systemet är mycket flexibelt när det gäller positionering. De runda rören som utgör ryggen är justerbara i bredd, och gör att flera olika ryggstöd kan monteras. Själva ryggfällningen är både naturlig och smidig tack vare den höga ledpunkten, som minimerar skjuvkraften.



Enkel sitsdjupsinställning

De manuellt inställbara ryggstödshållarna skjuts på skensystemet, vilket gör det möjligt att justera sitsdjupet.

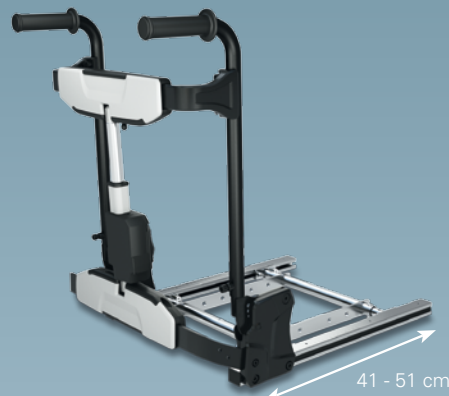

Elektriskt ställbar ryggfällning som tillbehör

Tack vare den höga ledpunkten resulterar ryggfällningen i en naturlig rörelse. Det nedre tvärstaget måste monteras på, och där sitter det nedre fästet till ställdonet integrerat. Eftermontering är möjlig. Ställdonet har snabbkoppling vilket medför att ryggen enkelt kan tas bort vid transport alternativt fällas ned.



Justerbar ryggklädsel

Klädseln kan justeras efter brukarens behov.



Invacare® Matrix®-ryggstöd

De här ryggstöden finns i lättviktsutförande. Tack vare de många olika alternativen kan alla få bästa möjliga positionsstöd och optimalt sittande.



Rea® Flex3-ryggstöd

Flex3-ryggen kan justeras efter brukarens längd och bredd. Breddinställningen motsvarar inställningen av den teleskoperande sittramen.


Egenskaper och Tillval



Sidojusterbara benstöd



Sidojusterbara armstöd

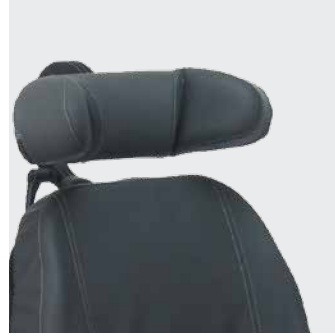

Huvudstöd



Bålstöd

Tekniska data



380 mm, 430 mm¹,
480 mm,
530 mm²



Sittdjup
410, 460,
510 mm



480 mm,
540 mm,
560 mm³



270 mm till
390 mm




90° till 120°

- 1/ Fast sittplatta
- 2/ Varje sittbredd ytterligare 50 mm genom armstödsjustering
- 3/ **Flex3**-ryggar ställbara i olika höjd i steg om 100 mm

Klädsel



LK överdrag

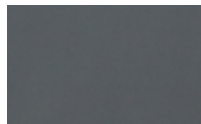

Dartex®



Matrix-överdrag (Mesh)



Justerbart överdrag



Plysch

(tillgängliga färger och tyger beror på val av dyna)

Rullstolsmodeller



Invacare® **Bora**®



Invacare® **Kite**®

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga - Sverige
Tel: +46 8 761 70 90
Fax: +46 8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

© 2013 Invacare International Sàrl
Alla rättigheter är reserverade för
Invacare.
DARTEX is a registered trademark
of Dartex Coatings Ltd.

All information i denna broschyr
stämmer vid tryckningstillfället.
Invacare förbehåller sig rätten att
ändra produktinformation utan
föregående meddelande.

Modulite - SE - 11/2013