



Invacare® **Modulite™**



Mer än bara rörelsefrihet

Invacare **TDX SP** är en elektrisk rullstol för den som vill få ut maximalt av sin fritid och som ställer höga krav på prestanda. Mitthjulsdriften hos **TDX SP** medför bästa tänkbara manövreringsmöjligheter. Med den automatiska "Stability Lock"-funktionen kommer aktiva brukare märka av en god stabilitet och säkerhet på ojämnt underlag samtidigt som SureStep®-funktionen erbjuder en mjuk hindertagning. Tilt-in-space-funktionen ger en optimal tryckavlastning och positionering. **TDX SP** är testad och godkänd för att klara en hög brukarvikt.



Yes, you can.®



Frihet utan kompromisser

Den snäva svänggraden på 560 mm är möjlig på grund av konstruktionen kring mitthjulsdriften. Den här typen av teknik tillhandahåller utmärkta manövreringsmöjligheter och erbjuder en intuitiv körupplevelse. **Invacare TDX SP** är en idealisk följeslagare såväl inom- som utomhus tack vare bra stabilitet och starkt driv över ojämnt underlag.

Prövad, testad och tålig

Den patenterade "Stability Lock"-funktionen håller alla 6 hjulen på marken för maximal stabilitet och säkerhet. SureStep[®] funktionen gör att du smidigt kan ta dig fram även över de tuffaste av hinder. Vid transport borgar de krocktestade förankringspunkterna för en säker sådan.

Designad för tyngre brukare

TDX SP klarar en brukarvikt upp till 180 kg. Tack vare sofistikerad teknik, stadig konstruktion och kraftfulla motorer är

TDX SP slitstark och tålig och idealisk för tuff användning.

Egenskaper och Tillval



Mitthjulsdrift

Den här tekniken reducerar svänggraden och gör det lättare att manövrera i trånga utrymmen.



SureStep

Denna patenterade teknologi lyfter rullstolen upp och över hinder på upp till 75 mm höjd och garanterar en smidig nedåtgående övergång.



"Stability Lock"

Funktionen håller alla sex hjulen på marken för maximal stabilitet och säkerhet och den har också stötdämpande egenskaper.



4-punkts fästpunkter

Fyra starka krokarna håller stolen stadigt på plats under transport. **TDX SP** är krocktestad och godkänd.

Egenskaper och Tillval



Modulite teleskoperande sitttram

Är grunden i **Modulite**-sitsen och tack vare dess konstruktion kan sitsen placeras i flera olika lägen.



Sidskenor - Rails

På vardera sidan av sitsen sitter ett skensystem monterat, sk rails. Dessa gör det möjligt att individanpassa armstödens placering och montering av tillbehör.



Fällbar rygg

Ställdonet till den elektriskt fällbara ryggen har en snabbkoppling som gör att man enkelt kan fälla den vid exempelvis transport.



Modulite™-sitsen

Den nya **Modulite**-sitsen erbjuds nu på **TDX SP**.



Justerbar rygglädsel

Klädseln kan justeras efter brukarens behov.



Rea® Flex3-ryggstöd

Flex3-ryggen kan justeras efter brukarens längd och bredd.



Invacare Matrix® ryggstöd

De här ryggstöden finns i lättviktsutförande. Tack vare de många olika alternativen kan alla få bästa möjliga positionsstöd och optimalt sittande.



Enkel sitsdjupsinställning

De manuellt inställbara ryggstödshållarna skjuts på skensystemet, vilket gör det möjligt att justera sittedjupet.




Sidojusterbara armstöd

Kan justeras sidvägs med 25 mm på varje sida.



Sidojusterbara benstöd

Är justerbart på bredden.

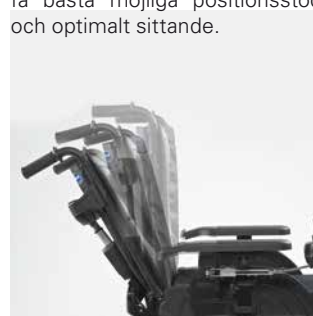

El-tilt

El-tilten har en hög ledpunkt för en naturlig rörelse. Kan eftermonteras.



Teleskoperande innerram

Det finns en version vid montering av tilt- och lyftmoduler. Därmed kan brukaren placeras så lågt som möjligt vid exempelvis förflyttning.

Tekniska data

Standardsits	440 - 480 mm	410 / 460 / 510 mm	450 / 490 mm ^{3,11}	480/540 mm ⁶	250 - 350 / 290 - 390 mm	290 - 475 mm ⁷	0 - 28° ⁴
Contour-sits	440 - 530 mm	410 / 460 / 510 mm	450 / 490 mm ^{3,11}	640 mm	250 - 350 / 290 - 390 mm	290 - 475 mm ⁷	0 - 28° ⁴
Flex-sits	440 - 530 mm	380 / 430 / 480 mm	450 / 490 mm ^{3,11}	550 mm ⁶	250 - 350 / 290 - 390 mm	290 - 475 mm ⁷	0 - 28° ⁴
Modulite™ Hel sitsplatta	440 - 480 mm ¹	410 - 510 mm	450 mm ³	480 mm ⁶	275 - 340 mm	290 - 470 mm ⁷	0 - 8,5°
Modulite™ teleskoperande sitsram	380 - 530 mm ²	410 - 510 mm	450 / 465 mm ^{3,11} 465 - 765 mm ⁵	480, 540, 560 mm ⁶	245 - 310 mm	290 - 470 mm ⁷	0 - 30° ⁴

Standardsits	-10°, 7,5°, 15°, 22,5°, 30°	980 mm ¹¹	640 mm ⁹	1160 mm ⁸	980 mm	180 kg / 160 kg ⁴ / 140 kg ¹⁰	73,6 Ah (C20)
Contour-sits	-10° - 45°	1080 mm ¹¹					
Flex-sits	-10° - 45°	1080 mm ¹¹					
Modulite™ Hel sitsplatta	90° - 120°	1010 mm ¹¹					
Modulite™ teleskoperande sitsram	90° - 120°	1140 mm ¹¹					

1180 mm	75 mm	9° / 16 %	2 x 340 W	32 km (6 km/h) ¹² 39 km (8 km/h) ¹²	8 km/h och 6 km/h	138 kg ¹¹	



- 1/ sittdyna 430 mm
- 2/ ytterligare 50 mm med armstödsjustering
- 3/ golv till sitsplatta utan dyna
- 4/ med sitslyft eller el-tilt
- 5/ med lyft
- 6/ mått från sitsplattan

- 7/ mått från fotplatta till sitsplatta
- 8/ beroende på sitsens position
- 9/ hjulbas
- 10/ 6 km/h-utförande
- 11/ beroende på konfiguration
- 12/ i enlighet med ISO 7176-4:2008

Ramfärg



Röd

Invacare AB
 Box 66
 163 91 Spånga
 Sverige
 Tel: +46 8 761 70 90
 Fax: +46 8 761 81 08
 sweden@invacare.com
 www.invacare.se

© 2013 Invacare International Säril
 Alla rättigheter är reserverade för
 Invacare.

All information i denna broschyr
 stämmer vid tryckningstillfället.
 Invacare förbehåller sig rätten att
 ändra produktinformation utan
 föregående meddelande.

TDX SP - SE - 11/2013



För mer detaljerad information, tekniska data, transport i fordon samt detaljerad information om olika tillval hänvisar vi till bruksanvisningen.

