

Montageanweisung [Mounting instruction]

Ulrich Alber GmbH + Co. KG
Sigmaringer Str. 100
D . 72458 Albstadt
Telefon: +49 7431 . 90 96 0
Internet: www.ulrich-alber.de




Artikelnummer [Article number]: VK336012

Rollstuhl: Bediengeräthalterung Meyra Mobiflex 24"
[Wheelchair:]

Anbauvorschlag; die Lieferung enthält eventuell Material für verschiedene Anbauvarianten.
Die Halterung kann geringfügig von der Abbildung abweichen.
[Mounting suggestion; consignment may contain material for different mounting variants.]
[Please note that the bracket may slightly differ from the drawing.]

e-fix / VK 336012.00

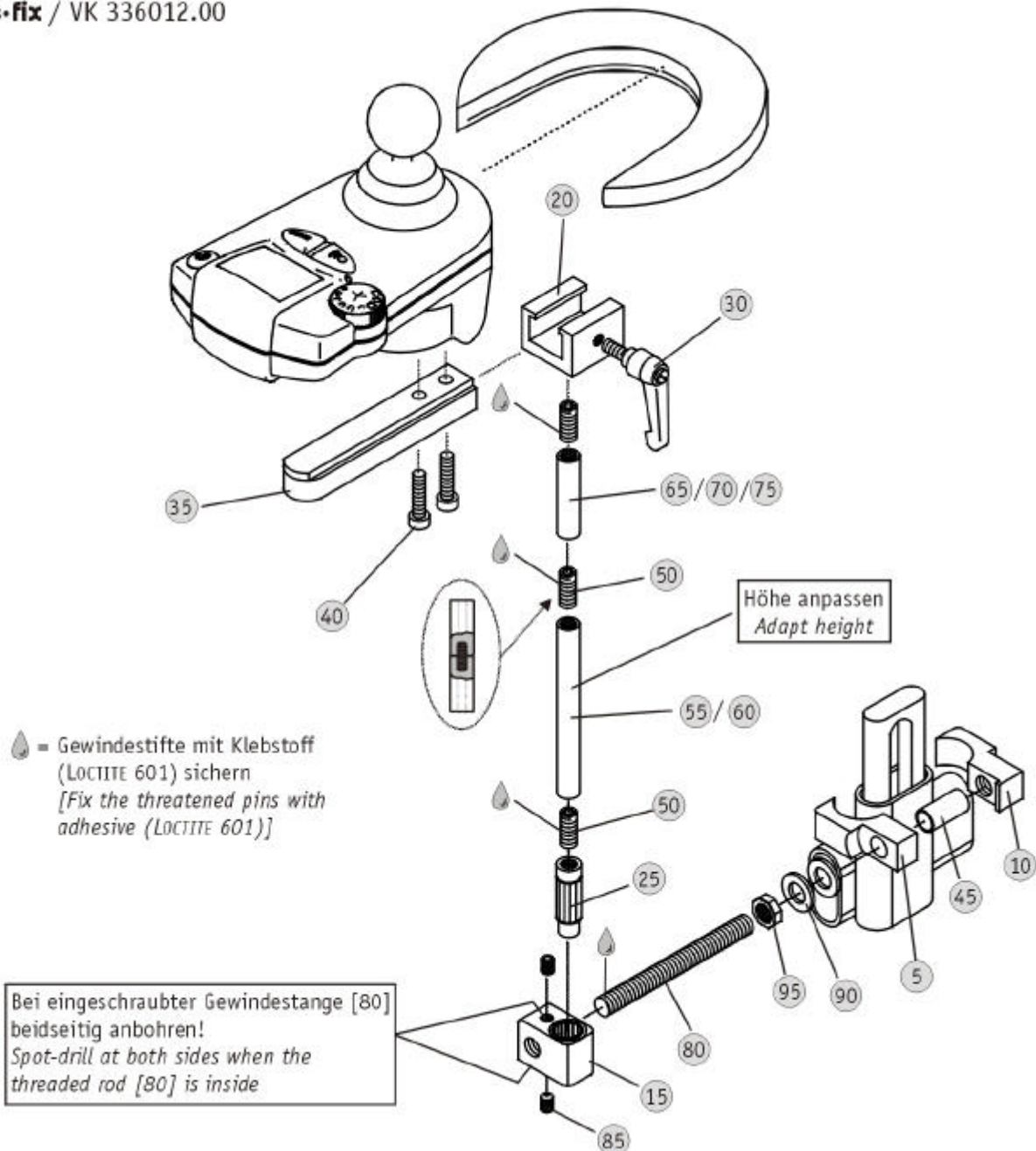

Achtung, der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen !
[**Caution**, any mounting must be done by personnel authorized by the manufacturer !]




Montageanweisung [Mounting instruction]

Ulrich Alber GmbH + Co. KG
 Sigmaringer Str. 100
 D . 72458 Albstadt
 Telefon: +49 7431 . 90 96 0
 Internet: www.ulrich-alber.de



Artikelnummer [Article number]: VK336012

Pos. [Pos.]	Menge [Quantity]	Einheit [Unit]	Art.-Nr. [Art.-No.]	Lagerplatz/Alber [Stock/Alber]	Bezeichnung [Description]	i.O. [O.K]
45	1	Stück [Stück]	203359.0	PROD	Distanzhülse Meyra Mobiflex, verzinkt	○
40	2	Stück [Stück]	010407.0	PROD	DIN 7984 - M 6 x 20 - A2 Zylinderschraube	○
35	1	Stück [Stück]	203250.0	064/02/05	Führungsleiste, verchromt	○
30	1	Stück [Stück]	090011.0	074/03/08	Klemmhebel m. Außengewinde M6 x 10 e-fix	○
25	1	Stück [Stück]	200240.0	063/03/14	Verzahnungsteil Messing e-fix, komplett verzahnt	○
20	1	Stück [Stück]	200046.0	063/01/10	Verschiebeteil e.fix, verchromt Gleitstück für Bediengerätaufnahme	○
15	1	Stück [Stück]	200255.0	062/02/11	Aufnahmeteil, verzahnt und verchromt	○
10	1	Stück [Stück]	200261.0	062/02/23	Klemme R=8,5 mit Gewinde, verchromt	○
5	1	Stück [Stück]	200267.0	062/02/22	Klemme R=8,5 ohne Gewinde, verchromt	○

 **Achtung**, der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen !
 [Caution, any mounting must be done by personnel authorized by the manufacturer !] 