

NordBed™ Essential



HEMLIK DESIGN | FALLPREVENTION | KOMFORT



NordBed Essential har en hemlik design och passar därför in i de flesta vårdboenden. Med avancerad komfort och enkla funktioner erbjuds brukaren smidiga förflyttningar i sängen. NordBed Essential är en trygg all-round säng för vårdboenden, och med en lägsta höjd på 28 cm, skapas förutsättning för att brukarna ska känna sig trygga och säkra under natten.

Komfort och säkerhet

Den inbyggda ryggtillbakaföringen **minskar skjuv** markant när brukaren förflyttas till sittande position och bidrar även till **tryckavlastning**. Sängbottnens optimerade sektionsindelning är baserad på antropometriska mått, vilket gör att den passar de flesta vuxna. För längre brukare finns en integrerad förlängning på 10 cm med möjlighet till ytterligare 10 cm som tillval.

Den låga höjden möjliggör **säkra förflyttningar** och gör att även kortare brukare når ner till golvet, för en säker förflyttning från sittande till stående.



Design

NordBed Essential kan kombineras med flera olika moderna sänggavlar i träfinish eller färg.

Med sitt **hemlika utseende**, passar NordBed Essential in i de flesta vårdmiljöer och kan beroende på behov och personlig smak konfigureras med ett urval långsidor, sänggrindar och annat.



Perfekt arbetsmiljö för vårdpersonal

- ▶ Centralbroms
- ▶ Enkelt att ta bort gavlarna
- ▶ Höjdjusterbar 28 - 82 cm

4

EXKLUSIVA FUNKTIONER

1

Ryggtilbakaföring

- ▶ Standardfunktion för att minska skjuv och öka komfort i samband med höjning av ryggdelen

3

Kombinerad ryggstöds- och knärörelse

- ▶ Minskar risken att brukaren glider nedåt i sängen i samband med förflyttning till sittande
- ▶ Minskar skjuv

2

28 cm lägsta höjd

- ▶ Med 12,5 cm standardhjul
- ▶ Säkra förflyttningar
- ▶ Fallprevention

4

Optimerad sängbotten

- ▶ Sängbottens sektioner är baserade på antropometriska mått, vilket gör att sängen passar de flesta vuxna.

Ytterligare funktioner

- ▶ **Centralbroms**
 - Säker manövrering
 - Enkel hantering för vårdpersonal
- ▶ **Valbar Anti-Trendelenburg och Trendelenburg**
 - Enkelt att anpassa och tryckavlasta
- ▶ **Integrerad förlängningsbar sängbotten 10 cm**
 - Även ytterligare 10 cm förlängning möjlig som tillval





► De enkelt igenkännbara färgerna har tagits fram i samarbete med experter

Manöverdosa ▲

Enkelt igenkännbara färger för brukare som har synsvårigheter


Tekniska data ▼

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida www.invacare.se

	Yttermått Innermått ▼	Ytterlängd Innerlängd ▼	Lyftintervall ▼	Sängbotten- indelning ▼	Frigång under sängen ▼	Lårdelsvinkel ▼
NordBed Essential	100 / 90 cm	213 / 200 cm	28 - 82 cm	80-16-30-64 cm	15 cm	37°
	Bendelsvinkel ▼	Anti- Trendelenburg / Trendelenburg ▼	Max. brukarvikt ▼	Total vikt (utan säng- gavlar) ▼	Tyngsta separata del ▼	
NordBed Essential	5°	+/-15°	170 kg	90 kg	90 kg	

Viktigt: Sängen skall inte användas av brukare under 12 år, eller av brukare vars kroppsstorlek motsvarar en 12-åring eller mindre utan att en individuell dokumenterad utprovning sker av eventuella risker.

Ramfärg ▼

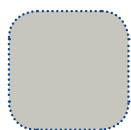

Aluminiumgrå

Träfärg ▼



Bok



Ek



Umbr



Bok/
ljusblå



Ljusblå



Vit

Kundservice: 08-761 70 90

Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



Yes, you can.®

© 2019 Invacare International GmbH. Alla rättigheter är reserverade för Invacare. All information i denna broschyr stämmer vid tryckningstillfället. Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande. NordBed Essential - SE - 06/2019

