

Softform® Premier Active 2

med Active 2 RX pump



Yes, you can.®

En dynamisk tryckavlastande madrass med hög tryckavlastning

Med syfte att erbjuda vården en dynamisk terapeutisk tryckavlastande madrass – som ger en hög nivå av tryckavlastning – har vi adderat Active 2 RX-pumpen till vår skummadrass Softform Premier för att skapa Softform Premier Active 2 RX.

Tillägget av pumpen gör det möjligt för användare att ge optimal support med en knapptryckning via aktiva växlande luftceller.


I samverkan med den kliniskt beprövade* stödytan på skummadrassen Softform Premier hjälper dessa växlande luftceller till att förebygga trycksår genom att ge tillräckligt stöd.

Statisk yta för "Mycket hög risk"

En profilsken, högklassificerad yta av skum. Använder effektiv profileringen för att främja mikroklimatet, och tryckfördelning, vilket erbjuder en komfortabel och effektiv tryckfördelning för brukare med "Mycket hög risk" att utveckla trycksår. Den statiska ytan kan enkelt "uppgraderas" med tillägg av den nya pumpen, som ytterligare understödjer behandlingen av allvarliga trycksår.

En komplett brukar fokuserad lösning

- ▶ Softform Premier Active 2 RX kombinerar tryckomfördelande egenskaper med specialskuren skum profilering på ytan, tillsammans med luftceller under, vilka kan blåsas upp vid behov för att ge aktiv behandling.
- ▶ Denna uppbyggnad säkerställer att brukaren alltid är stödd av omslutande, hög specificerat skum, oavsett om pumpen (som driver luftcellerna) är påslagen eller avstängd. Det komfortabla skummet med hög specifikation ger effektiv tryckfördelning som säkerställer att komforten upprätthålls hela tiden.
- ▶ Softform Premier Active 2 finns tillgänglig i olika storlekar för att ge ett säkert och optimalt stöd för brukare som behöver en bredare madrass.

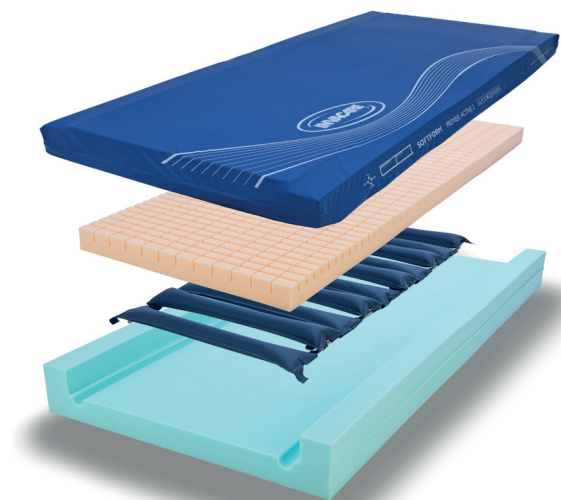

* mer information finns på <https://invacarerest.com/europe-en/knowledge/clinical-evidence/>

** (NICE Clinical Guideline 179, September 2014)

5


VIKTIGA FUNKTIONER I KORTHET

Från den moduler konstruktionen
och pumpen - klar att använda direkt

1

Högspecificerat statiskt skumlager på ytan

Brukaren kommer alltid ligga på
en "mycket hög risk" yta när det
gäller förebyggande av trycksår i
händelse av strömavbrott.

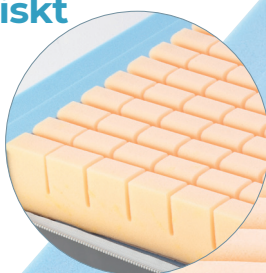


2

Klar att användas direkt Digital pump

En intuitiv användarvänlig display
gör det enkelt att installera och
sätta igång.




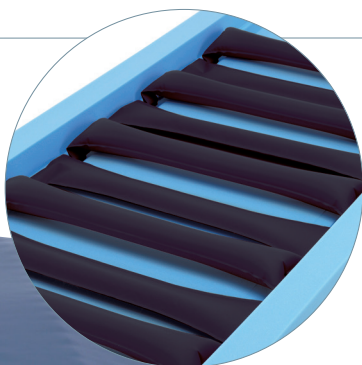

3

Kostnadsbesparing Modulär konstruktion

Alla komponenter är enkla och ekonomiskt utbytbara vilket bidrar till en lägre kostnad gällande produkten

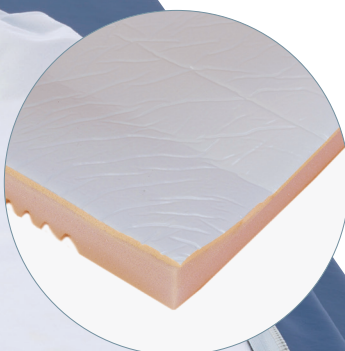

4

Motverkar skjuvkrafter med en lågfriktionsyta

En innovativ lågfriktionsyta reducerar skjuvkrafter signifikant vid användandet av en elektriskt reglerbar säng. EPUAP rekommendation är att motverka tryck och skjuvkrafter för att undvika vävnadskada båda krafterna är faktorer som bidrar till utvecklingen av trycksår (EPUAP, 2014).

5

Självjusterande system

Inga inställningar av trycket behövs, Active 2RX pumpen ger det optimala trycket

Hybrid madrass med pump

Det finns vanligtvis två typer av
hybrida madrasser med pump.

1

Högspecificerat skum
lager över ett antal
dynamiska luftceller

Hybrid madrass i "statiskt" läge



- › Högspecificerat skum lager inuti en tömd luftcell



2

Högspecificerat skum
lager över ett antal
dynamiska luftceller

Hybrid madrass i "alternerande" läge



- › Tömd luftcell under ett högspecificerat skumlager



- › Den första typen av hybrid madrass liknar en hybrid utan pump, men erbjuder... ytterligare möjlighet att koppla till en pump.

Pumpen har två viktiga funktioner:

- 1 Att förhindra att luft läcker ut från den yta som ger stöd
2. Att erbjuda en form av växlande tryckstöd som en upptrappning av behandlingen

Den växlande tryckavlastningen som tillhandahålls har en lägre amplitud. Detta beror på att luftcellerna är fyllda med ett låg-densitetskum i kärnan. Därför är avlastning en viktig del av tryckväxlingen som är mindre optimalt jämfört med traditionellt tryckväxlande produkter

Tekniska data ▼

För mer information om denna produkt, inklusive användarmanualen, besök vår webbplats:


www.invacare.se



Bredd ▼



Längd ▼

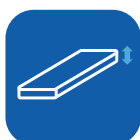

Höjd ▼



Totala produktens vikt ▼



Max brukarvikt ▼



Max tvätttemperatur ▼

Softform Active 2 RX madrass

83, 85, 88, 90, 103, 105, 115, 120 cm

200 cm

15 cm

14 kg

247 kg

95° C



Djup ▼



Bredd ▼



Höjd ▼



Vikt ▼

Pump

10,5 cm

27,5 cm

15,5 cm

1.75 kg

Färg ▼



Baltic blå

Vänligen observera. Färgen kan variera något jämfört med det som visas ovan

Madrassen är tillverkad enligt
European Standard: BS EN 597-1 Cig
European Standard: BS EN 597-2 Låga
BS7177:1996 Crib 5.

Pump
Ljudnivå: ≤ 24 dB*
Växlingstid: Var 10 minut (1 i 2 cykler)

Brandförekrafts standard
BS7177:2008
* testrapport kan fås på begäran

Regulatoriska uppgifter ▼

Övrig information ▼

- ▶ Högkvalitativt profilerad skummaterial på ytan
- ▶ Aktivt stöd vid behov
- ▶ Kliniskt beprövad för alla kategorier av trycksår
- ▶ Lämplig för brukare med mycket hög/mycket hög
- ▶ Alternativa flamskyddstestade överdrag Crib 5 eller Crib 7
- ▶ Max brukarvikt 247 kg
- ▶ Finns i olika storlekar

Grundläggande omvårdnad är avgörande vid förebyggande av trycksår. Denna madrass kommer att bidra positivt till resultatet av en vårdplan för förebyggande av trycksår. Utbildning, kliniskt omdöme och handlingsbaserad planering baserat på en riskanalys är grundläggande faktorer gällande förebyggande av trycksår. En rad av olika risk skalor kan användas som en formell metod för att behöma risk gällande utveckling av trycksår, och bör användas i kombination med en informell bedömning (omvårdnadsbedömning)

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 – 163 91 Spånga
Sweden



Yes, you can.®