

Softform[®] Premier Active 2 RX



**Kliniskt väldokumenterat hybrid
madrassystem**



Softform Premier Active 2 RX hybrid madrass system erbjuder omfördelning av tryck, till brukare med låg till hög risk för att utveckla sår som ett resultat av tryck eller tryck och skjuv i kombination. Den kliniskt väldokumenterad **Softform Premier** madrassen i kombination med ett lager av alternerande luftceller är extremt effektiv i förebyggande och som komplement gällande behandling av trycksår. Madrassens yta ger ett optimalt stöd för brukaren utan att kompromissa gällande komfort och minsta möjliga störning och vibration. Med ett enkelt tryck på en knapp ansluts **Active 2 RX** pumpen och de växlande luftcellerna aktiveras. Detta ökar fördelningen av trycket och därmed är behandlingen anpassad till ett ökat behov.



En reaktiv madrass - för brukare i hög risk

Skum av hög kvalitet med skuren profilering, för ökad omfördelning av tryck under extremiteterna, fyrkantig skuren profilering under bålen som ger omfördelning av tryck på denna, en något tyngre del av kroppen. Skärningarna är "ihåliga" för att öka ventilation och optimera mikroklimatet. Formen och designen är särskilt lämplig för brukare med medel och hög risk för att utveckla trycksår. Den reaktiva madrassen kan enkelt anpassas till brukaren tillfällig eller permanent vid ökad risk för tryck och / eller med svåra trycksår, varigenom madrasssystemet "uppgraderas" från en reaktiv madrass till en aktiv madrass.

Aktiv madrass - för brukare med extra hög risk

Med denna "uppgraderade" -funktion ändras madrassen, som nu erbjuder en aktiv omfördelning av trycket. Med ett tryck på en knapp, anslut **Aktiv 2 RX** pumpen och växlande luftceller aktiveras. Detta ökar omfördelningen av trycket under brukaren. Denna kombination av hög kvalitets skum och växlande luftceller rekommenderas för brukare med hög, extra hög risk för utveckla trycksår och / eller med befintliga trycksår.

Egenskaper



Design av luftceller

De flexibla luftcellerna anpassar sig till kroppens form och möjliggör för brukaren att sjunka ner i madrassen med följande omfördelning av trycket för kroppens alla delar.



Insluten luftslang

Luftslangen mellan madrass och pumpen är helt insluten av ett material med svetsade sömmar. Detta optimerar infektionskontrollen och minskar risken för skador på luftslangen. När pumpen inte är inkopplad fäst fast luftslangen på kortsidan av madrassen med en tryckknapp.



Nätkabelhantering

Ett enkelt tryckknappssystem längs långsidan av madrassen säkerställer att nätkabeln inte kommer i kläm eller faller i golvet.

Egenskaper



“Step Up / Step Down” med Active 2 RX-pumpen

Anslut strömmen och tryck på ON-knappen - så enkelt är det!
Pumpen justerar automatiskt trycket i cellerna till den enskilda brukarens behov och i samband med lägesändring. Pumpen är extremt tyst och så stör inte brukarens sömn.




Uppbyggt i sektioner

Softform Premier Active 2 RX består av individuellt utbytbara sektioner. Således kan hållbarheten förlängas och ekonomin optimeras.



Innovativt “glid” system

Skjuvkrafter är mycket viktiga gällande utvecklingen av trycksår (EPUAP Clinical Practice Guidelines, 2014). **Softform Premier Active 2 RX** erbjuder ett innovativt glidsystem, mellan skum och luftceller som signifikant minskar skjuvning när madrassen används med reglerbara vård sängar.

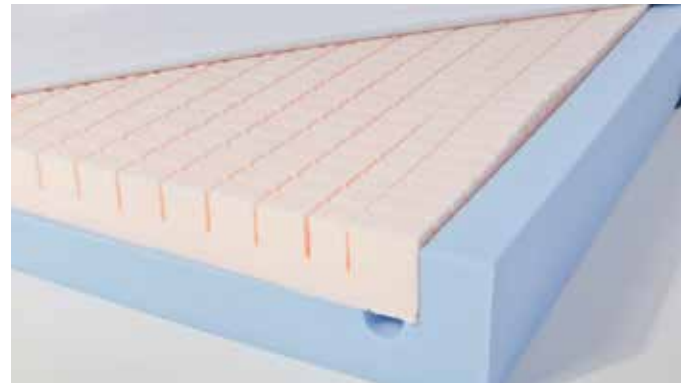

Högelastiskt skuminlägg

I det osannolika fallet av strömavbrott, kommer brukaren förbli stödd av skum med hög specifikation. Detta minskar behovet av brådska åtgärder och madrass ersättning









Softform Premier Active 2 RX - En lösning som sätter brukaren i fokus.

Softform Premier Active 2 RX kombinerar en väldokumenterad omfördelning av tryck, med uppbyggnad av ett högkvalitativt skuret skum, med ett inlägg av växlande luftceller som kan aktiveras vid behov. Det betyder att madrassen med stor fördel kan tillämpas på alla riskgrupper. Uppbyggnaden av madrassen, med alternerande luftceller placerade under skummet, ger dessutom stöd till brukarens egen rörlighet.

Tekniska data

För mer information, tekniska data etc. om denna produkt, se bruksanvisningen som finns för nedladdning www.invacare.se.

	Bredd	Längd	Höjd	Vikt	Max brukarvikt	Rengöring
						
Softform Premier Active 2	830 - 900 mm	1810 - 2100 mm	152 mm	14 kg	247.6 kg	80°

Madrasen är tillverkad enligt:

European Standard: BS EN 597-1 Cig
European Standard: BS EN 597-2 Låga
BS7177:1996 Crib 5.

Pump

Ljudnivå: 24 Db
Cykeltid: 10 min. (Princip: 1 upp 1 ner)

Färg

Baltisk blå



Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



Yes, you can.®



© 2019 Invacare International Sàrl. Alla rättigheter är reserverade för Invacare. All information i denna broschyr stämmer vid tryckningstillfället. Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande. Premier Active 2 RX - SE - 04/2019