

# Küschall® K-SERIES



## **UNLIMIT YOUR WORLD**

Vi på Kuschall tror att allt är möjligt så länge du ges rätt förutsättningar. Kuschall K-serie erbjuder dig möjlighet till anpassning efter dina behov för maximal prestanda. Full kraft, all frihet, **Unlimit your world.**

## **KÜSCHALL K-SERIES**

K-serien är en ikon. För sin design, för den trendsättande monotube ramkonstruktionen och för ett dynamiskt sittsystem som anpassas efter dina behov. Allt för att ge dig den bästa körprestandan.

## **HYDROFORMNING**

Den hydroformade ramen med sina nya linjer tar designen på din K-serie till en ny nivå. Den nya tekniken är mer än bara design. Det mer styrka och ökad vridstyvhet, allt för en oöverträffad körprestanda. Addera allt detta och du har en ny tidlös ikon.

## HYDROFORMNING KNÄVINKEL

- Genom hydroformning så har Kuschall skapat ett ergonomiskt grepp, idealiskt vid förflyttningar både i rullstolen men också till och från rullstolen. Ramvinklarna är 90° och 75°

## BROMS ACTIVE LIGHT

- Den nya bromsen gjord helt i aluminium med låg vikt (vikt 164gr), en minimalistisk design och enkel funktion.

## INSVÄNGD RAM

- Med en insvängd ram blir din rullstol mer tight, allt för att kunna följa och stödja din kropp.

## FOTBÅGE

- I helt ny design med en plan yta för bättre avlastning och positionering för fötterna.



# Küschall® K-SERIES

## NY RYGGBÅGE

- Ny design med ett större djup, perfekt för MatrX ryggstöd. Perfekt att greppa i när man t.ex. ska lyfta rullstolen i och ur bilen.

## RYGGSTÖD

- Fällbart ryggstöd som automatiskt låser i nedfällt läge har nu sex möjliga ryggvinklar. Nytt är 94grader för olika positioneringsbehov.

## SITTENHETEN

- Är hjärtat i K-serien. Sittenheten erbjuder alltid fem positioner av balanspunkten och möjlighet att justera sitthöjden fram och/eller bak. Allt för att din rullstol ska passa just dig.

## LÄNKHJULHUS

- Ny hydroformad aluminiumprofil svetsad direkt på ramfronten i samma design som övriga rullstolen.

## LÄNKHJULSGAFFEL

- En ny och ren design och med integrerade lager som avsevärt reducerar ansamling av smuts, allt för ett enklare underhåll.

# EGENSKAPER

## IKONISK

Med sin ikoniskt minimalistiska öppna ram och rena design ger

K-serien dig möjligheten att göra det du vill; oavsett om det är att komma till och från jobbet, skolan eller något spännande fritidsintresse, K-serien ger dig friheten att vara du.





## JUSTERBAR

Med justeringen av balanspunkten osynligt placerad under sitsenheten innebär att du kan flytta sitsen fram och tillbaka i fem olika positioner. Balanseringen kan ändras vid ett senare tillfälle om behov uppstår och det utan att extra komponenter krävs. Allt för att passa just dig

## DYNAMISK

Ramen har en konstant perfekt geometri mot marken, så det finns inget behov av att justera något på ramen.

Hjulen förblir alltid i samma position på ramen. Den mycket vridstyva konstruktion leder till bra köregenskaper.

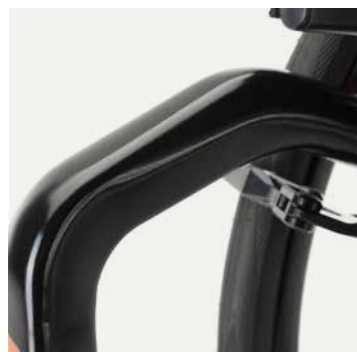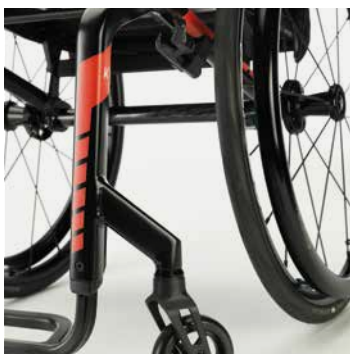

## HYDROFORMAD RAM

Tekniken med hydroformning har gjort K-serien ännu mer personlig. En ikonisk look som idag blir ännu mer igenkänd tack vare den nya designen. När ramen blivit mera vridstyv så blir rullstolens köregenskaper och din körupplevelse mer sensationell än någonsin.

# STYLING

## 1 RAMFÄRG



Pure White



Anthracite Grey



Space Black



Carmine Red



Azure Blue

## 2 DEKAL



## 3 DEKALFÄRG



Red



Black



Light Grey



Gold



Red



Blue



Dark Grey



Black

# TEKNISK DATA

## SITTBREDD

320 – 500 mm  
I steg om 20 mm



## SITTDJUP

350 – 525 mm  
I steg om 25 mm



## UNDERBENSLÄNGD

290 – 480 mm  
I steg om 10 mm



## RYGGHÖJD

270 – 480 mm  
I steg om 15 mm



## RYGGVINKEL

74° / 78° / 82° /  
86° / 90° / 94°



## SITTHÖJD

Fram: 450 – 520 mm  
Bak: 390 – 490 mm  
I steg om 10 mm



## RAMVINKEL

75° / 90°  
V-ram eller insvängd



## TOTALBREDD

SB + 170 mm



## TOTALBREDD

75°: ca 830 - 1055 mm  
90°: ca 760 - 985 mm



## BALANSPUNKT/ COG

80 mm / 95 mm / 110 mm /  
125 mm / 140 mm



## CAMBER

0° / 3° / 6°



## TOTALVIKT

ca 7.8 kg



## TRANSPORTVIKT

ca 5.1 kg



## BRUKARVIKT

130 kg



## KROCKTESTAD

Godkänd/uppfyller  
ISO 7176-19



Alla angivna mått och vikter är baserade på sittbredd 400 mm och sittdjup 400 mm i den lättaste och mest kompakta konfigurationen. Vikt och mått kan ändras med olika konfigurationerna. För mer information, se bruksanvisning på vår webbplats.



**/ UNLIMIT YOUR WORLD**

**Kundservice: 08-761 70 90**  
Fax 08-761 81 08  
sweden@invacare.com  
www.invacare.se

Invacare AB  
Box 66 – 163 91 Spånga  
Sweden