



Confidence in posture solutions

Azalea[®] / Azalea[®] Assist



Erbjuder utmärkt komfort och flera justeringsmöjligheter!




Rea Azalea är det naturliga valet för den mer aktiva brukaren likväl som för den passiva. Det komfortabla sitssystemet gör det möjligt för brukaren att vid behov förändra sitt sittande med bibehållen komfort. Detta i kombination med goda köregenskaper gör att *Rea Azalea* är det perfekta valet. *Rea Azalea* är en rullstol man kan köra själv med stora drivhjul i storlek 22" eller 24", men som alternativ finns en transportversion med drivhjul i 16" storlek, kallad *Rea Azalea Assist*.

Tilt och ryggstödvinkling gör livet mer komfortabelt

Rea Azalea och *Rea Azalea Assist* har 21° respektive 26° sitstill och 30° ryggvinkling. Både tilt och ryggvinkling kan enkelt justeras manuellt eller elektriskt av vårdaren, och den med el-funktion kan brukaren själv justera. *Rea Azalea Assist* har en utökad sitstill som gör det möjligt att uppnå en bättre positionering och tryckavlastning, vilket innebär maximal komfort och vila. På alla Azalea komfortrollstolar har leden till ryggstödet infästningen placerats så att ryggstödet ska följa brukaren naturliga rörelse när ryggvinkeln justeras. Det kallas att ha höga ledpunkter. Som gör att brukaren får en naturlig rörelse när ryggvinklingen justeras.

Egenskaper och Tillbehör

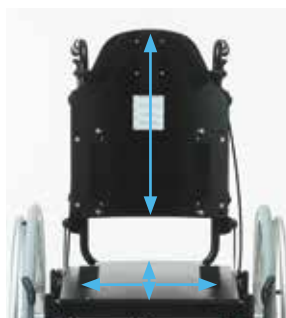

Storlekar

Sitsen är justerbar i bredd och djup. Ryggen är höjddjusterbar för att tillgodose olika behov.



Drivhjul-positionering

Sitshöjden och drivhjulbalanseringen kan justeras individuellt.



Steglös breddjustering

Individuell breddjustering av arm- och benstöd.


Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

	Sittbredd	Sittdjup	Sitthöjd	Ryggstödhöjd	Intervall armstödshöjd	Benstödslängd	Sitsvinkel	Backrest angle
<i>Rea Azalea & Azalea Assist</i>	390-440/ 440-490/ 490-540 (390-490/440-540/ 490-590 mm)	430 - 500 mm	400/450 mm	Backrest plate: 560-790 mm Tension adjustable backrest: 540-715 mm	240 - 360 mm	330 - 500 mm	-1° to 23° (+1° to 25°)	0°-30°

	Hjulbas	Totalhöjd	Totallängd inkl fotplatta	Vikt	Max brukarvikt	Transportvikt	Krocktestad	Max lutning vid användning av parkeringsbroms
<i>Azalea Assist 16"</i> <i>Azalea 22"-24"</i> u vb <i>Azalea 22"-24"</i> m vb	SB + 220mm (16") SB + 240mm (22" o 24" u VB) SB + 270mm (22" o 24" m VB) (mått med smal gaffel)	900-1250 mm	950-1020 mm	34 kg (SW 440 mm)	Max 135 kg	16,5 kg ¹	ISO 7176-19	7°
								1. Med elektrisk sits och ryggvinkling så ökar transportvikten med 4,2 kg.

Ramfärg

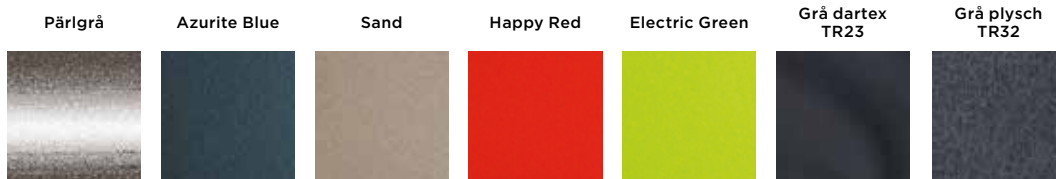

För övriga tillbehör till *Rea Azalea* hänvisas till *Rea Azalea* tillbehörsbroschyren. *Rea*, *Rea design* och *DSS* (Dual Stability System) är av Invacare registrerade varumärken.

Kundservice: 08-761 70 90 | Invacare AB
 Fax 08-761 81 08 | Box 66 - 163 91 Spånga
sweden@invacare.com | Sweden
www.invacare.se

Klädsel

