

# **Dacapo** Sortiment

*Kvalitets madrasser i skum*



Flexibilitet & komfort



Invacare **Dacapo** är ett brett sortiment av madrasser designade för att uppfylla kundernas behov inom hemsjukvård och på sjukhus. De är uppbyggda av högelastiskt, miljövänligt skum med hög densitet, alternativt viscoelastiskt skum inom segmenten standard, komfort och tryckavlastning.

**Dacapo** har utvecklats för att erbjuda optimal liggkomfort samt tryckavlastning utan kompromiss gällande hygien och användarvänlighet.

---

## Invacare **Dacapo Standard**

---

**Dacapo Standard** är en basmadrass som uppfyller de grundläggande kraven för en god liggkomfort. Madrassen består av högelastiskt skum med god bärighet.

**Dacapo** standard är 10 cm hög.



### **Dacapo Standard Överdrag**

- ▶ 100% bomull
- ▶ Maskintvätt 40 grader

---

## Invacare **Dacapo Basic**

---

**Dacapo Basic** är en basmadrass utrustad med hygienöverdrag som väl uppfyller de grundläggande kraven på liggkomfort och med hög hygienisk standard. Det högelastiska miljövänliga skummet erbjuder ett stöttande underlag med stor följsamhet och hållbarhet.

**Dacapo Basic** är 12 cm hög.



### **Dacapo Basic Överdrag**

- ▶ 100% vätsketätt
- ▶ Polyuretan med polyester
- ▶ Luftgenomsläppligt/ ångandas
- ▶ Töjbart i två riktningar
- ▶ Maskintvätt 95 grader

---

## Invacare **Dacapo Heavy User Light**

---

**Dacapo Heavy User Light** är uppbyggd för att möta tyngre brukares behov och erbjuder ett fast, komfortabelt stöttande underlag.

Madrasen är uppbyggd av tre skikt. Det undre skiktet består av höglastiskt skum som upprätthåller madrassens stabilitet. Det mittersta skiktet även det av höglastiskt skum fast något mjukare. Det övre skiktet är av viscoelastiskt skum som ger extra god tryckavlastning och komfort.

**Dacapo Heavy User Light** är 15 cm hög.



### **Dacapo Heavy User Light** Överdrag

- ▶ 100% vätsketätt
- ▶ Polyuretan med polyester
- ▶ Luftgenomsläppligt/ ångandas
- ▶ Töjbart i två riktningar
- ▶ Maskintvätt 95 grader

**Dacapo Heavy User Light** finns även i en variant som klarar 350 kg brukarvikt.


---

## Invacare **Dacapo Comfort**

---

The **Dacapo Comfort** är en komfort madrass som väl uppfyller de grundläggande kraven för en god liggkomfort. Det höglastiska miljöskummets volymvikt ger en ökad möjlighet för en god återhämtning samtidigt som madrassens unika öppna cellstruktur tillåter kroppen att andas. Madrassen är skuren i olika stora fyrkanter som är individuellt flexibla. Denna profilering gör det möjligt för kroppens konturer att sjunka ner i materialet så att optimal liggkomfort uppnås.

**Dacapo Comfort** är 12 cm hög.

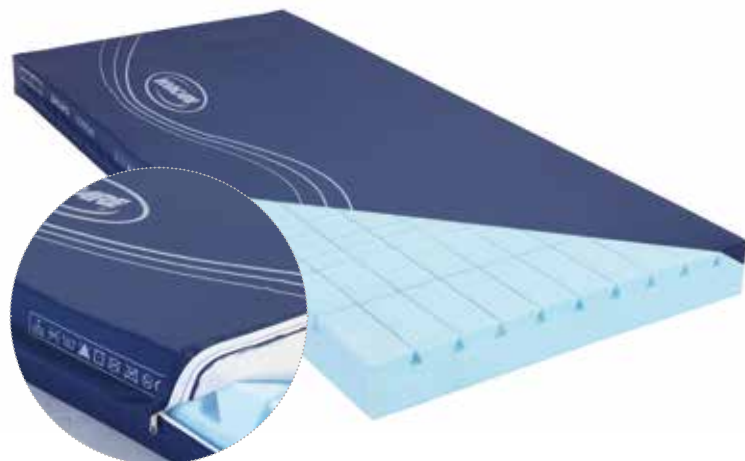


### **Dacapo Comfort** Överdrag

- ▶ 100% vätsketätt
- ▶ Polyuretan med polyester
- ▶ Luftgenomsläppligt/ ångandas
- ▶ Töjbart i två riktningar
- ▶ Maskintvätt 95 grader

## Invacare **Dacapo Comfort Plus**

The **Dacapo Comfort Plus** är en trycksårspåbyggande madrass som understödjer behandling av trycksår. Det höglastiska miljöskummets volymvikt ger en ökad möjlighet för en god återhämtning samtidigt som madrassens unika öppna cellstruktur tillåter kroppen att andas. Madrassen är skuren i olika stora fyrkanter som är individuellt flexibla. Denna profilering gör det möjligt för kroppens konturer att sjunka ner i materialet så att optimal liggkomfort uppnås.

**Dacapo Comfort Plus** är 14 cm hög

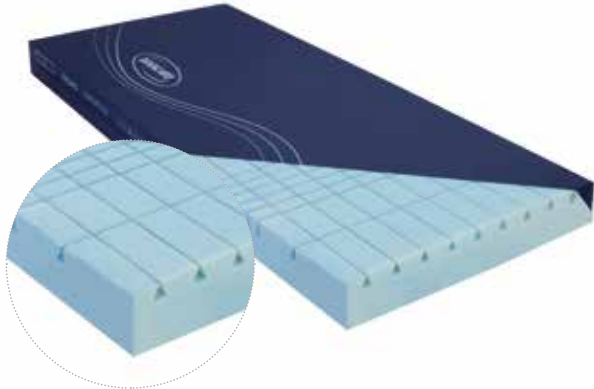


### **Dacapo Comfort Plus Överdrag**

- ▶ 100% vätsketätt
- ▶ Polyuretan med polyester
- ▶ Luftgenomsläppligt/ ångandas
- ▶ Töjbart i två riktningar
- ▶ Maskintvätt 95 grader

## Invacare **Dacapo Child**

**Dacapo Child** är en enskikts madrass uppbyggd av ett höglastiskt miljövänligt skum. Madrassen är designad för lättare, yngre brukare och tillåter kroppens konturer att sjunka ner. Madrassens volymvikt ger en ökad möjlighet för god återhämtning.

**Dacapo Child** är 8 cm hög.

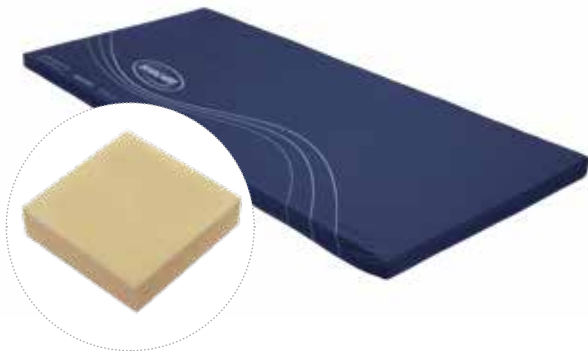

### **Dacapo Child Överdrag**


- ▶ 100% vätsketätt
- ▶ Polyuretan med polyester
- ▶ Luftgenomsläppligt/ ångandas
- ▶ Töjbart i två riktningar
- ▶ Maskintvätt 95 grader

\*Finns även med bomullsöverdrag

## Invacare **Dacapo Kid**

**Dacapo Kid**-madrassen är speciellt utformad för **NordBed Kid** vårdsäng, tillgänglig i 6 storlekar för att passa sängar både med och utan polstring. Baserad på **Dacapo Child**-designen med ett skikt hög elastiskt skum. **Dacapo Kid**'s fyrkantsskurna profilering minskar skjuvning och omfördelar trycket samt ger ett bättre mikroklimat. Sist men inte minst så ger madrassen en komfortabel och hållbar lösning för små barn.

**Dacapo Kid** är 10 cm hög.

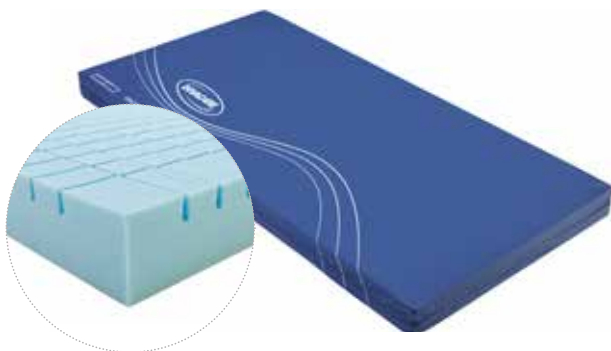

### **Dacapo Kid Överdrag**

- ▶ 100% vätsketätt
- ▶ Polyuretan med polyester
- ▶ Luftgenomsläppligt/ ångandas
- ▶ Töjbart i två riktningar
- ▶ Maskintvätt 95 grader
- ▶ Svetsade sömmar

---

## Invacare **Dacapo Premier**

---

**Dacapo Premier** har ett unik profilerat löst skuminlägg som ger utmärkt komfort och optimerar tryckavlastningen. Madrassöverdraget är tvåvägs stretch och hjälper till att minska skjuv- och friktionskrafterna. Skuminlägget stöds av en u-kärna med fast ram av skum som underlättar patientförflyttning genom att ge effektivt sidostöd.

**Dacapo Premier** är 15 cm hög.



### **Dacapo Premier Överdrag**

- ▶ 100% vätsketätt
- ▶ Polyuretan med polyester
- ▶ Luftgenomsläppligt/ ångandas
- ▶ Töjbart i två riktningar
- ▶ Maskintvätt 95 grader

---

## Invacare **Dacapo Top Pro**

---

**Dacapo Top Pro** är en högkvalitativ tryckavlastande madrass och har en skumkärna som har oberoende, geometriskt skuren profilering. Skumkärnan har större, mer stödjande profilering i mitten och mindre profilering vid varje ände. Detta gör det möjligt för topp madrassen att uppnå jämn tryckfördelning genom att anpassa sig till formen och kroppens form och utskjutande delar.

**Dacapo Top Pro** är 7 cm hög.



### **Dacapo Top Pro Överdrag**

- ▶ 100% vätsketätt
- ▶ Polyuretan med polyester
- ▶ Luftgenomsläppligt/ ångandas
- ▶ Töjbart i två riktningar
- ▶ Maskintvätt 95 grader

---

## Nyckelfunktioner och alternativ

---

### ◀ Olika alternativa överdrag

---



#### **Hygienöverdrag**

Hygienöverdraget är en kombination av polyuretan och polyester. Överdraget är töjbart i två riktningar och följsamt mot kroppen. Materialet är luftgenomsläppligt och ångandas. Överdraget är allergitestat och behandlat mot dammkvalster.

#### **Hygienöverdrag med evakueringsfunktion**

Evakueringsöverdraget är en kombination av polyuretan och polyester. Överdraget är töjbart i två riktningar och följsamt mot kroppen. Materialet är luftgenomsläppligt och ångandas. Överdraget är utrustat med handtag på alla fyra sidorna. På överdragets långsidor finns säkerhetsremmar som vid nödläge sveps över brukaren för säker fastsättning.

Överdraget är allergitestat och behandlats mot dammkvalster.

#### **Bomullsöverdrag**

Bomullsöverdraget är tillverkat i ren bomull och är tvättbart i 40°C.



### ◀ Högelastiskt skum

---

Polyuretanskum varierar i cellstruktur och densitet. Hög densitet har relativt jämn och tät cellstruktur som gör att den kan ge bra stöd när den belastas, samt bibehålla sin form när den är obelastad.



### ◀ Enkel att hantera

---

Handtag underlättar ytterligare enkel hantering av Dacapo-sortiment.



### ◀ Blixtlås

---

Diskret dragkedja på tre eller 4 sidor beroende på modell försedd med överlappande droppkant.

## Tekniska data ▼


För mer detaljerad information gällande denna produkt, inkluderat produktens bruksanvisning, var vänlig besök vår hemsida [www.invacare.se](http://www.invacare.se).



Produktvikt ▼



Max brukarvikt ▼

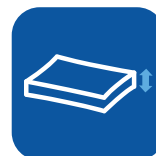

Höjd ▼

	Produktvikt ▼	Max brukarvikt ▼	Höjd ▼
Standard	7 - 10.5 kg	100 kg	10cm
Basic	8.5 - 12.5 kg	130 kg	12cm
Heavy User Light	11 - 16.5 kg	250 kg	15cm
Heavy User	12 - 17.5 kg	350 kg	15cm
Comfort	11.5 - 17kg	130 kg	12cm
Comfort Plus	13.5 - 19kg	140 kg	14cm
Child	3 kg	100 kg	8cm
Kid	6 kg	70 kg	10cm
Premier	14 kg	180 kg	15cm
Top Pro	4.5 - 5 kg	150 kg	7cm

1. Madrassens vikt varierar beroende på storlek. Medelvärde är utsatt som en indikation.
2. Madrasserna är tillgängliga i flera olika storlekar beroende på marknadens krav. Kontakta Invacare för mer information

Brandtestad i överensstämmelse med den europeiska standarden EN 597 - 1 och den europeiska standarden EN 597 - 2. Är tillämplig på alla Dacapo-modeller med ett polyuretanöverdrag.

**Kundservice: 08-761 70 90**  
Fax 08-761 81 08  
[sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com)  
[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Invacare AB  
Box 66 - 163 91 Spånga  
Sweden



**Yes, you can.®**