

Dolomite[®] Gloss



Kombination av design, lätt vikt och styrka!

LÄTT VIKT | MÅNGSIDIG | MODERN DESIGN



Gå med Gloss

Lätt, stark och robust!

Dolomite har vidareutvecklat serien av rollatorer genom att nu introducera den nya stabila lättviktsrollatorn. **Dolomite Gloss** familjen. Den är designad för att ge stöd och stabilitet, för att stärka självständigheten att kunna ta sig an vardagen. Dolomite Gloss utgår ifrån alla beprövade kärnvärden som användarna redan värderar högt i befintliga Dolomite rollatorer. Dessutom är Dolomite konceptet vidareutvecklat, för att än mer passa, användarnas behov i vårt moderna och mobila samhälle

Gloss finns i 4 olika storlekar med sitthöjder från 450mm - 680mm, **Dolomite Gloss** har en kapacitet på upp till 160 kg maximal användarvikt men har endast en produktvikt från 5,9 kg till 6,8 kg, beroende på storlek. Dessutom finns många olika tillbehör, för att enkelt anpassas till de flesta användarnas olika behov av gångstöd.

Trots en användarvikt upp till 160kg, så är Dolomite Gloss produktvikt låg, tack vare den lätta och smidiga aluminiumramen. Den kryssfällda designen ger användaren en flexibelt stöd i vardagen då den är lätt att fälla ihop, lätt att transportera och ger alltid gång- och sittstöd när än den behövs.

Med en mångfald, kvalitet och stabilitet, **Dolomite Gloss** ger alla användare möjlighet att promenera säkert och stilfullt.

Gå med Gloss!



Lätt att transportera - lätt att förvara



Dolomite Gloss är lätt att fälla ihop och enkel att förvara. Tack vare kryssfällningen kan den även stå i ihopfällt läge.

Dolomite Gloss kan på ett smidigt och enkelt sätt läggas in i bagageutrymmet på en personbil, vilket gör att vardagen blir lite enklare och användare får lite mer frihet.

NYCKEL

FUNKTIONER



1

Stort gångutrymme

- ▶ Generöst gångutrymme inne i rollatorn, mellan handtagen. Rollatorramen ger mycket bra gångstabilitet och är lätt att styra.

2

Höjjusteringsbara och ergonomiska handtag

- ▶ framåtvända handtag med en ergonomisk design. Handtagen kan enkelt justeras för att anpassas till användarens behov.

3

Kryssfäld ihopfällning lättviktare

- ▶ Kanske marknadens lättaste rollator familj! Mäter endast 190 mm på bredden i ihopfällt läge. Lätt att lyfta, lätt att förvara.

4


Stort urval av storlekar

- ▶ Finns i 4 olika storlekar, med olika höjder på sits och handtag. Ett stort utbud av tillbehör borgar för att kunna tillgodose många olika användarbehov.

Ytterligare **nyckel** funktioner:

- ▶ Bromshandtagen ger bra hävkraft och gör det lättare att bromsa
- ▶ Tygkorgen är lätt att nå, och följer med ihopfällningen av rollatorn.
- ▶ Diskreta vajrar och en modern design
- ▶ Tillbehören passar hela Gloss familjen
- ▶ Låsfunktion vid ihopfällning

4 nyckel funktioner och fördelar

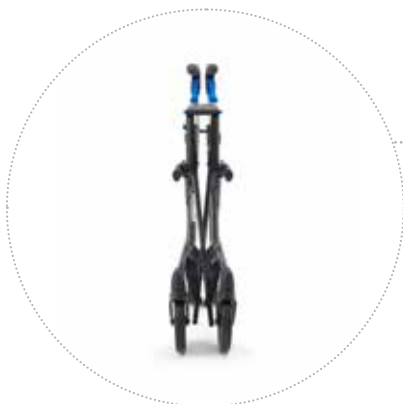

◀ Kryssfällning och lätt vikt

Förutom att **Gloss** är mycket lätt, har den en imponerande kapacitet och klarar en maximal användarvikt på 160 kg.

Fäller man ihop rollatorn så blir den smal och enkel att förvara. Den kan förvaras stående i ihopfällt läge och säkerhetsbandet håller ihopfällningen på plats.

Tack vare den lätta vikten, så kan användare eller vårdgivare lätt lyfta in **Gloss** i bagageutrymmet på bilen.



◀ Variation för individuella behov

Dolomite Gloss finns i 4 olika storlekar. Rollatorerna har olika sitthöjd, handtagshöjjustering, djup bredd och vikt. Det innebär att anpassningen till användarens kropp blir optimal. Rollatorernas variationsmöjligheter förbättras ytterligare av de många tillbehören som finns att tillgå och lätt kan monteras på hela Gloss familjen.



◀ Generöst gångutrymme

Ett vedertaget signum för Dolomite rollatorer är ett generöst gångutrymme. Så även med Gloss. Designen förbättrar möjligheten att gå inne i rollatorn med handtagen som ett tryggt stöd nära kroppen. Dolomite Gloss främjar ett upprätt gångmönster och du kan obehindrat ta ut stegen för bästa möjliga gång. Dolomite Gloss ger dig trygghet på promenaden!



◀ Höjjusterbar, ergonomiska handtag

Höjden på handtagen kan enkelt justeras på **Gloss**. De ergonomiska framåtvända handtagen kan vinklas i 20 grader inåt mot sittplattan, beroende på vilka olika behov användarna har.

Introducerar **Dolomite Gloss** familjen

En ny familj av Dolomite rollatorer.
 Med en modern design.

**Gloss 450****Gloss 520****Gloss 600****Gloss 680**

Handtags höjd	635 - 770 mm	725 - 860 mm	795 - 920 mm	915 - 1050 mm
Max brukarvikt	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg
Sitt höjd	450 mm	520 mm	600 mm	680 mm
Produkt vikt	5.9 kg	6.3 kg	6.5 kg	6.8 kg

Tillbehör med Gloss kompatibilitet för alla storlekar.

Tillbehör för att möta användarens behov:

- ▶ Ryggband: Ett bra och bekvämt stöd för kroppen när man sitter ner.
- ▶ Kåpphållare: Gör kåppen åtkomlig utan att vara ivägen. Fastsättning av kåpp eller krycka.
- ▶ Korg: är tillverkad av mjukt material och följer ihopfällningen av rollatorn. Klarar 5 kg.
- ▶ Bricka: Löstagbar bricka.
- ▶ Steghjälp; Ett tillbehör som förenklar att komma upp på trottoarkanter eller liknande.
- ▶ HP handtag: Anpassning för enhands- eller stroke patienter.
- ▶ Släpbröms: en trygghet så rollatorn inte rullar iväg från användaren, perfekt vid gångträning eller enhandslösningar.
- ▶ Underarmsstöd: De skålade armstöden ger ett behagligt stöd vid exempelvis gångträning eller vid artrit.
- ▶ Brömsförstärkare: Ger extra bromskraft till svag hand.
- ▶ Hård korg: möjlig att beställa till Gloss 520 & 600, och 680.



Teknisk data ▼

Ytterligare information om produkten och dess tillbehör, som t.ex manualer, finns på hemsidan; www.invacare.se.



total bredd ▼



Djup ▼



Bredd mellan hjulen ▼



Total höjd ▼



Sitt höjd ▼

Dolomite Gloss ⁴⁵⁰	518 mm	615 mm	423 mm	635 - 770 mm	450 mm
Dolomite Gloss ⁵²⁰	595 mm	675 mm	501 mm	725 - 860 mm	520 mm
Dolomite Gloss ⁶⁰⁰	602 mm	720 mm	509 mm	795 - 920 mm	600 mm
Dolomite Gloss ⁶⁸⁰	609 mm	790 mm	501 mm	915 - 1050 mm	680 mm



Sitt bredd ▼



Hjul diameter ▼



Max brukarvikt ▼



Produkt vikt* ▼

Dolomite Gloss ⁴⁵⁰	370 mm	200 mm	160 kg	5.9 kg
Dolomite Gloss ⁵²⁰	445 mm	200 mm	160 kg	6.3 kg
Dolomite Gloss ⁶⁰⁰	445 mm	200 mm	160 kg	6.5 kg
Dolomite Gloss ⁶⁸⁰	445 mm	200 mm	160 kg	6.8 kg

*Excludes any accessories

Färg ▼



Grå

Kundservice: 08-7617090
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66
163 91 Spånga, Sverige



Yes, you can.®

© 2019 Invacare International Sarl Alla rättigheter är reserverade för Invacare. Invacare reserverar sig för eventuella ändringar gjorda efter tryck. All information är korrekt vid tiden för tryckning. Dolomite Gloss - SE - 06/2020