

Dolomite[®] Gloss[®]



Dolomite Gloss säkerställer den perfekta balansen mellan riskbedömning och maximalt oberoende genom innovativ och kreativ design.



Viktiga funktioner:

- Lättvikt, bara 6.5kg*
- Hög maximum brukarvikt på upp till 160 kg
- Hanterar handtagshöjd från 635-1050mm**
- 4 olika sitshöjder
- Omfattande tillbehörssortiment för bästa anpassning
- Endast 190 mm smal vid hopfälld!***

* Gloss 600

** Gloss 450 – Gloss 680

*** Gloss 450mm är 240mm bred ihopfälld.

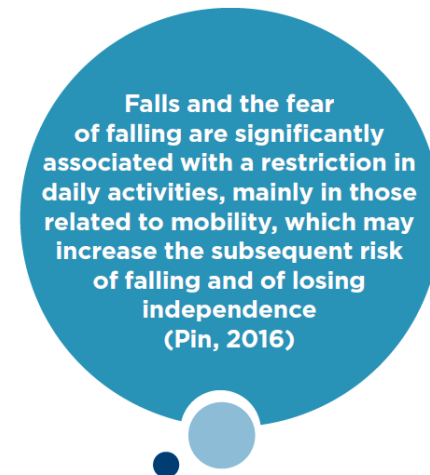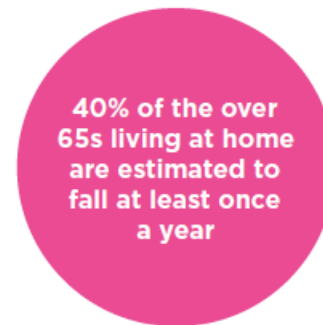

NYCKEL FUNKTIONER



Making the right choice maximises independence, safety and long-term health & well-being.

Ytterligare nyckel funktioner:

- Bromshandtag som ger bra hävkraft och gör det lätt att bromsa
- Diskreta vajrar och en modern design
- Låsfunktion vid ihopfällning
- Tygkorgen är lätt att nå, och följer med ihopfällningen av rollatorn.
- Tillbehören passar hela Gloss familjen

3 modeller i 1 rollator

- Standardrollator – inne/ute
Dolomite® Gloss®
- Lättviktsrollator
Dolomite® Gloss®
- ”Tunga” brukare
Dolomite® Gloss®



Gångutrymme & åtkomlighet

- **Generöst gångutrymme** – Gloss har ett nätt yttermått men ett generöst innermått. Detta ger fördelar att framföra rollatorn och obehindrat kunna ta ut stegen för att få bästa möjliga gång.
- **Framåtvända handtag** – förbättrar möjligheten att gå inne i rollatorn med handtagen nära kroppen. Detta främjar ett upprätt gångmönster som minskar skador på axlar och rygg.
- **Rak bakkant** - Förflyttning i och ur rollatorn förenklas av att rollatorn har en rak bakkant och därmed ingen snubbelrisk över bakhjul eller dylikt. Rollatorn kan även backas intill en köksbänk eller liknande.





Rätt höjd för sitsen

Att säkerställa att sitsens höjd från golvet är i rätt och i säker position är av största vikt för användaren. En enkel vägledning att få till den rätta höjden är att mäta från användarens knä till golvet. Det är detta som är den korrekta* höjden för sitsen.

*Användarens fötter ska vara helt platta mot golvet när de sitter på rollatorn.

Dolomite[®] Gloss[®]

- **Fällfunktion** – lätt att förstå & greppa reglaget för fällning som enkelt fälls ihop/ut. Tack vare kryssfällning står den i hopfällt läge.
- **Höjjustering** – steglös justering med tydlig markering tillåter en mer exakt inställning i höjd och vinkel. Tack vare att handtagen är riktade framåt kan handtagen vinklas 20° inåt för att händer med felställningar ska få ett bättre grepp.
- **Bromsar** – en mjuk och tydlig bromsspak med kort slaglängd som är lätt att nå utan tyngdförflyttning.
- **Handtagsgrepp** – ergonomiskt formade för att ge avlastning för hela handflatan och av material som ger friktion så att händerna inte glider.
- **Sits** – med mjukt rundade kanter för att ge komfort. Ger obegränsat med utrymme då inga stag finns som hindrar att kroppen får plats.
- **Stabilitet** – är beroende av hjulbasens storlek samt spårvidden i förhållande till höjden på handtagen därav finns Glossen i olika storlekar



Att anpassa rollatorn till att matcha brukarens individuella behov

Dolomite Gloss tillbehörssortiment:

- **Ryggband**
- **Kryckkäpphållare**
- **Väska:** som kan sitta kvar vid ihopfällt läge
- **Korg**
- **Bricka**
- **Steghjälp**
- **Bromsförstärkare:** Ger extra bromskraft till dem som har svaga händer.
- **Släpbroms:** En extra säkerhet för att förhindra att rollatorn rullar för snabbt
- **Tvärgrepp:** Gör det möjligt att använda rollatorn med en hand
- **Underarmsstöd:** Ger extra stöd till de med t ex artrit, halvsidig försvagning
- **Hemiplegi handtagsset:** enhandsbroms till exv stroke patienter
- **Syrgashållare**
- **Droppställning**

Gå med Gloss

Lätt, stark och robust!

Teknisk data ▼


Gloss 450
Gloss 520
Gloss 600
Gloss 680

Handtags höjd	635 - 770 mm	725 - 860 mm	795 - 920 mm	915 - 1050 mm
Max brukarvikt	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg
Sitt höjd	450 mm	520 mm	600 mm	680 mm
Produkt vikt	5.9 kg	6.3 kg	6.5 kg	6.8 kg

Tillbehör med Gloss kompatibilitet för alla storlekar.



total bredd ▼



Djup ▼


 Bredd mellan
hjulerna ▼


Total höjd ▼



Sitt höjd ▼



Sitt bredd ▼



Hjul diameter ▼



Max brukarvikt ▼




Produkt vikt* ▼

Dolomite Gloss 450	518 mm	615 mm	423 mm	635 - 770 mm	450 mm
Dolomite Gloss 520	595 mm	675 mm	501 mm	725 - 860 mm	520 mm
Dolomite Gloss 600	602 mm	720 mm	509 mm	795 - 920 mm	600 mm
Dolomite Gloss 680	609 mm	790 mm	501 mm	915 - 1050 mm	680 mm

370 mm	200 mm	160 kg	5.9 kg
445 mm	200 mm	160 kg	6.3 kg
445 mm	200 mm	160 kg	6.5 kg
445 mm	200 mm	160 kg	6.8 kg

*Vi tror på att människor
som fortsätter att gå
håller sig friskare!!!*

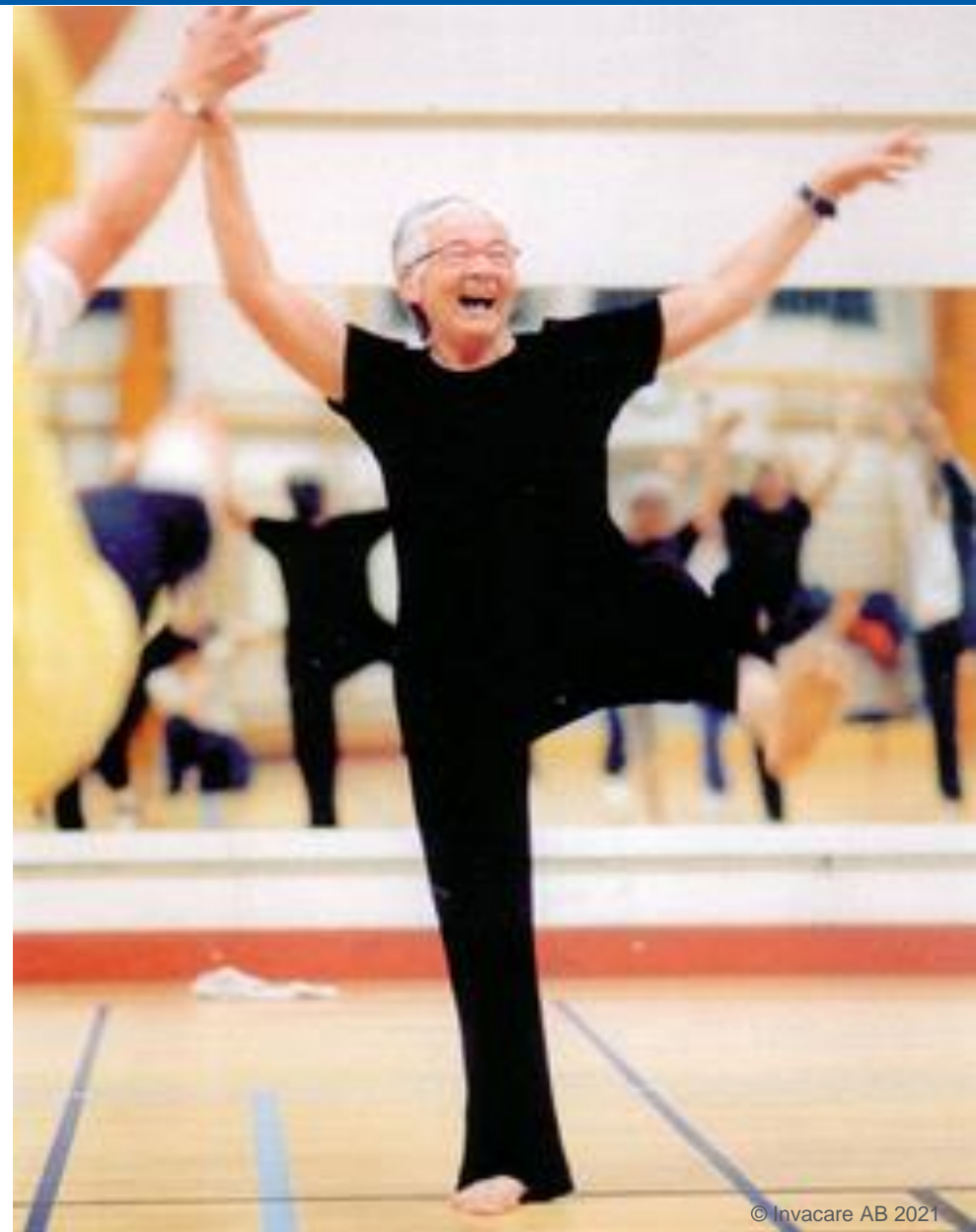



Yes, you can.®