

matrx[®]

Huvudstöd



Matrx huvudstöd

Enkla och intuitiva justeringar



Yes, you can.[®]

matrix® LOXX™



Det senaste tillskottet i familjen

Matrix® Loxx™ är ett enkelt och intuitivt huvudstöd som erbjuder ett elegant och effektivt huvudstöd. Med 4 justeringspunkter är det konfigurerbara huvudstödet en lösning lämplig för en mängd olika behov.

Enkel installation

Skapa rätt support första gången med justeringsspaken, vilket tillåter enkel och intuitiv positionering. Handvred för borttagning eller höjdjustering.

Mycket justerbart huvudstöd

Måttlig kyfos och asymmetriska felställningar kan lätt anpassas.

Säkerhet


Huvudstödet är krocktestat.

Ytterligare egenskaper

- > Dubbla kulleleder med glidstång för djupjustering av dynan
- > Böjd vertikal stolpe för lateral respektive främre monteringsposition
- > Synlig skyddande skumknopp för förbättrad säkerhet



Inställningsmöjligheter

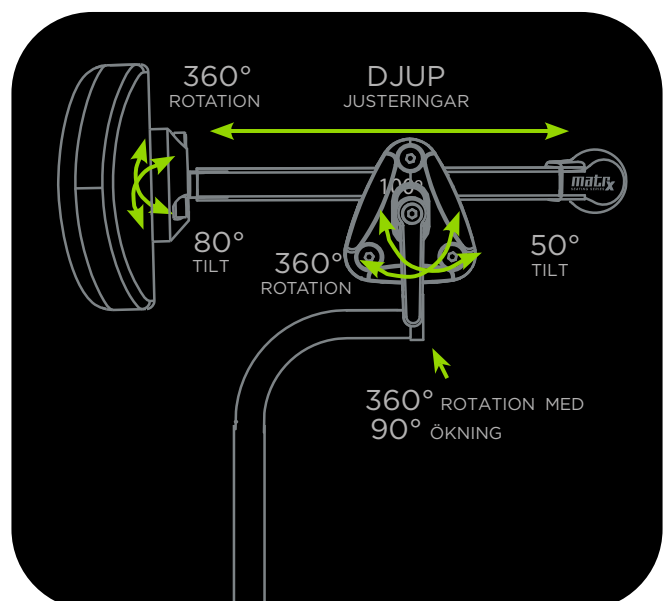

matrix[®] ELAN[®]

Prisbelönt design

Matrix[®] Elan är ett kompakt och lätt huvudstöd med flera inställningsmöjligheter som ger maximalt stöd och komfort. Med 6 justeringspunkter är Elan vårt mest justerbara huvudstöd. Elan erbjuder en lösning för de flesta användare.

Justerbar design

Det innovativa huvudstödet erbjuder många positioneringsmöjligheter för mer komplexa behov inklusive extrem kyfos samt swing away-funktion för enklare anpassning.

Justeringar utan verktyg

Montera snabbt och effektivt med ett enda insexnyckelverktyg medan justeringsspakarna gör det enkelt att ändra position. Handvred för borttagning eller höjdjustering.

Innovativ låsfunktion

Denna krocktestade design har en innovativ låsfunktion som ger betydande och tillförlitlig hållfasthet.




Ytterligare egenskaper

- > 2 stolpalternativ: standard (380 mm) och mini (280 mm) för barn och vuxna
- > Böjd vertikal stolpe för lateral respektive främre monteringsposition
- > Längre stolpe finns också för att nå allvarigare kyfos - innehåller en extra länk



Justering av huvudstöd

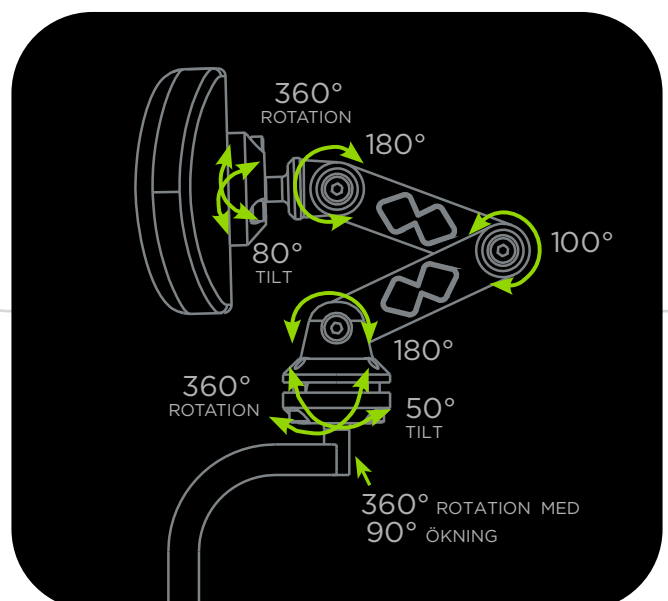

Huvudstödsdynor



Komfort

Skum med hög densitet tillåter insjunkning förhindrar att bottna igenom



Hållbar

Formgjutet skum som omsluter huvudstödsplattan för extra skydd.



Låg vikt

Minst halva vikten jämfört med stålblätrade dynor



Mångsidig

Aluminiumplattan kan formas till önskad form



Överdrag

Dragkedja, fuktbeständig, ångandas-Startex tyg som standard alternativt infektionsöverdrag (omvänd Startex) tillgänglig



Pannband

Komfortabelt pannstöd i neopren. Nyckelhålsfäste för enkel fastsättning Insidan av bandet består av en halkfri yta.



2 olika occipital dynor

Ger format stöd till occipital och sub-occipital områden på huvudet.

Finns i två storlekar.



3 olika Ellipse formade dynor

Kan formas för att passa formen på användarnas huvud både bak och som stöd på sidorna

Finns i 3 storlekar.



4-punktsstöd

Ger 4 punkter av stöd till occipitala och temporala områden på huvudet.

Finns i två olika storlekar.

Avancerad teknologi

Branschledande design

Vårt Matrix sitt- och positionerings-sortiment erbjuder kliniskt effektiva, banbrytande lösningar som inkluderar några av de mest pålitliga, modulära och funktionella produkterna på marknaden. Vi presenterar vår nya Matrix® Loxx™ huvudstöd som tillsammans med vårt prisbelönda Matrix® Elan huvudstöd erbjuder högt konfigurerbara alternativ i kombination med våra populära huvudstödsdynor.



Montering och kompatibilitet

Till både Matrix Elan och Loxx huvudstöd ingår en monteringsplatta med en ergonomisk låg profil Handvred som tillåter vår Matrix® huvudstöd att fästas på de flesta fasta ryggstöd inklusive vårt välkända Matrix® E2-sortiment.

Monteringsplattan består även av ett mellanlägg för användning när ytterligare utrymme krävs. Alternativt kan huvudstöden monteras på våra Flex 3 ryggar. 2 olika adapters för fasta respektive ställbara ryggar.



Tekniska data


Invacare kan nu erbjuda en komplett lösning: sittedyna, ryggstöd, bälte/sele och huvudstöd. Du kan utforska hela sortimentet genom att besöka www.invacare.se.



Matrix Loxx ▼



Matrix Elan Standard ▼

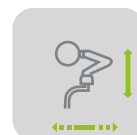

Matrix Elan Mini ▼

Monterings-
alternativ

380 x 115 mm**

380 x 260 mm**

280 x 260 mm**



Ellipse dyna ▼



Occipital dyna ▼



4 Punkts dyna ▼

Val av dyna

150 mm Ellipse dyna
150 x 90 mm

230 mm Occipital dyna
230 x 180 mm

4 Punkts dyna
280 x 260 mm

250 mm Ellipse dyna
250 x 130 mm

310 mm Occipital dyna
310 x 200 mm

360 mm Ellipse dyna
360 x 130 mm



Överdrag

* Invacare® Matrix® Elan® och Invacare® Matrix® Loxx™ huvudstöd är godkänd enligt Frontal Impact Sled Testing. Testning i enlighet med ISO7176-5 (2019) Rullstolssystem för användning i motorfordon och ISO 16840-4 (2009) Rullstolsäten - Del 4: Sittsystem för användning fordon i rörelse.

** 70 mm lateral räckvidd



Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



© 2022 Invacare International GmbH. Alla rättigheter förbehållna.
All information anses vara korrekt vid tryckningstillfället.
Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer
utan föregående samråd. Invacare Matrix Huvudstöd - EU - 04/2022 - V2

