

alber

erivo®

Den lätta & hopfällbara
elrullstolen

Följ med:
Känn friheten.



+ **erivo**. always there.

eleg

+ erivo® design



I vår alltmer uppkopplade värld är det en sak som räknas över allt annat: rörlighet. Det är därför vi behöver transportmedel som passar vår livsstil och hjälper oss att övervinna hinder. De ska vara pålitliga, flexibla och användarvänliga – och naturligtvis bekväma.



Topmodern

erivo är både dynamisk och modern. Med sin form, färg och sitt högkvalitativa material sätter den nya normer inom design och garanterar ett alltid elegant intryck.

- ✓ **Tvåfärgat chassi**
champagne & mattsvart
- ✓ **Robust ramdesign**



ant & praktisk

+ erivo® komfortabel



Perfekt passform

En av de viktigaste faktorerna att ta i beaktande vid val av en elrullstol är sittkomforten. erivo erbjuder en genomtänkt ergonomi och bra materialval. Sittdynan har ett högkvalitativt skum som garanterar en god sittkomfort och ger ett bra stöd. Dynöverdraget är i ett material som andas.

✓ Ergonomisk

Sittdyna med skum i god kvalitet på en fast sitsplatta

✓ Material som andas



Fortsätt rulla

Bakhjulsupphängning med fjädring i kombination med luftfyllda däck tryggar en enastående åkkomfort. De stora framhjulen är punkteringsfria och idealiska då man ska övervinna små hinder.

✓ Fjädring och stora luftdäck 12 1/2" bakhjul

✓ Punkteringsfria däck 8" framhjul



easy

+ erivo® funktionell



Smart hopfällningsteknik.

I en handvändning fälls erivo ihop för att spara utrymme. Knappt större än en resväska, passar den in i vilken nisch som helst – och kan enkelt följa med dig på din resa.

✓ **Fälls ihop i en handvändning**

✓ **Enkel förvaring & spar utrymme**

Manöverenheter, armstöd & fotstöd.

erivo erbjuder mycket stor flexibilitet med sin undanfällbara manöverenheter och de uppfällbara armstöden. Detta tillsammans gör att man kan komma nära bord eller förflytta sig i- eller ur- sin rullstol med lätthet. Fotstödet är också uppfällbart och ställbart i höjdlid.

✓ **Höjjusterbart fotstöd**


✓ **Smidig manöverenheter & armstöd**

Batteripaket.

Batteripaketet sitter under sätet och kan enkelt tas bort utan verktyg även då man sitter i sin elrullstol. Med den medföljande laddaren kan man ladda batteriet, antingen sittandes kvar på elrullstolen eller separat. Laddtid är ungefär 6 timmar (~6,5h för R11).

✓ **Max. laddningstid: 6 timmar***

✓ **Räckvidd: upp till 17km****

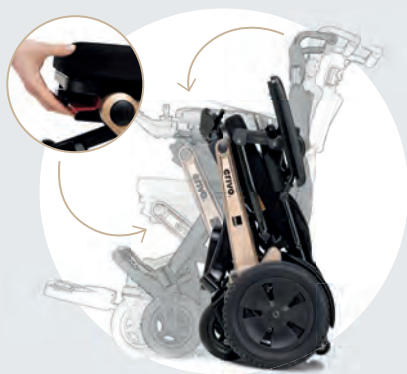

& flexibel

+ erivo® dynamisk



Intuitiv kontroll

Den intuitiva manöverenheten erbjuder steglös och exakt kontroll. Detta gör att erivo kan manövreras lika säkert i trånga utrymmen som att göra det möjligt att leka tillsammans med barnbarnen i parken på ett säkert sätt.

- ✓ Exakt & smidig manövrering
- ✓ Steglöst val av hastighet (1,5–6 km/h)



Vårdarstyrning
finns som tillval



erivo – product features

Inte bara till utflykt eller vid långresa: Använd erivo dagligen

Återupplev dina favoritplatser.

erivo hjälper inte bara i det dagliga livet. Dess kompakta storlek och att den kan fällas ihop gör att den enkelt kan tas med i de flesta transportmedel, och blir således en perfekt följeslagare vid din nästa resa.

Oavsett om det är en sedan länge planerad familjesemester eller en spontan resa med vänner – så är du och din erivo alltid redo för att kunna dela upplevelsen.

Skulle batteriet ta slut så är det fullt uppladdat igen inom 6 timmar, och man är redo för ett nytt äventyr.



bil



flygplan



båt



buss



husvagn



tåg



alber

Simply mobile.



Följ med: Känn friheten.

Maximera upplevelsen

Den fälls ihop i en handvändning och erivo kan enkelt tas med i de flesta transportmedel – att fälla upp den är lika enkelt. Upptäck nya miljöer eller hitta en ny favoritplats att njuta på utan bekymmer.

Under utvecklingsstadiet lades stor vikt på god sittkomfort. Detta säkerställs av fjädringen, de stora bakhjulen med luftpumpade däck och det ergonomiska sätet. Ta plats och upplev fantastiska stunder med lite hjälp från erivo.



+ erivo® översikt

Undanfällbar manöverhet

Ger förutsättningar till att exempelvis komma nära ett bord



Smart hopfällningsteknik & kompakt design

Mått hopfäld (b x h x d)
62 x 93 x 47cm

Batteripack

Räckvidd 17/35km
Max. laddningstid:
6/6,5h

Uppfällbara armstöd

Underlättar i- och
urstigning



Fotstöd

Uppfällbart
fotstöd, ställbart i
höjdlöd.

Manöverhet

Intuitiv kontroll. Steglös
hastighetsjustering från 15
till 6km/h

Bra köregenskaper

Punkteringsfria 8" framhjul
Luftpumpade 12,5" bakhjul.
Stötdämpare bak.

Sittergonomi

Fast sitsplatta. Dyna av god
kvalitet med överdrag i
andningsbart material.

Innovativ design

Elegant och sportigt chassi
i champagne och mattsvart
färg





Vår kvalitetsstandard: Din säkerhet!
Vårt företag är certifierat i enlighet med gällande kvalitetsledningssystem ISO 13485 för medicintekniska produkter.

Vi säkerställer en miljömässigt ansvarsfull tillverkning av våra produkter med vårt miljöledningssystem, certifierat i enlighet med ISO 14001.

erivo är CE-kompatibel enligt European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745 och testad och certifierad på frivillig basis av TÜV Süd, enligt den aktuella utgåvan av produktstandarden EN 12184.

Tekniska data

Transportvikt

Elrullstol utan batteri: från 27,3kg

Vikt batteripaket erivo R10: 2,4kg

Vikt batteripaket erivo R11: 4,6kg

Batterikapacitet

batteripaket erivo R10: 11,0 Ah
(Godkänt för flyg)

batteripaket erivo R11: 30,15 Ah

Körsträcka erivo R10: 17km

Körsträcka erivo R11: 35km

Max hastighet: 6km/h

Max lutning: 6° (10,5%)

Max. brukarvikt: 150kg

Sitsbredd: 45cm

Sitsdjup: 47cm

Rygghöjd: 45cm

Motoreffekt: 250 watt

Skyddsklass: IPX4 (stänkskyddad)

erivo®

alber

Den lätta & hopfällbara
elrullstolen



As at 08/2022 @Alber GmbH, Albstadt. Subject to technical modifications.

+ erivo. always there.