

NordBed™ Ultra

Designad för personer med demens



ERGOMOVE™ TECHNOLOGY | TRYGG & SÄKER | FALLFÖREBYGGANDE



NordBed Ultra kan anpassas för att möta de särskilda behov som finns hos personer med demens.

För att erbjuda en trygg och säker miljö för dementa är det viktigt att vårsängen möjliggör oberoende och underlättar mobilisering.

Med den låga höjden på endast 25 cm i kombination med belysning under sängen, minskar risken för att brukaren skadas vid försök att ta sig ur sängen nattetid. För ytterligare säkerhet kan även en madrass placeras på golvet intill sängen. Sänggrindar kan användas till de brukare som inte riskerar att försöka klättra över.

För att erbjuda en bra arbetsmiljö för vårdpersonalen kan **NordBed Ultra** höjas upp till 85 cm. NordBed Ultra kan enkelt anpassas för att fungera för olika stadier av demenssjukdomen.

Hemlikt utseende

Utrustad med textilöverdrag på sänggavlar och långsidor ger **NordBed Ultra** en hemlik och ombonad känsla. Det mjuka överdraget har en mjuk, mönstrad yta som brukaren kan känna på. Den något ojämna ytan erbjuder en taktill stimulans.

Personer med demens kan ha svårt att känna igen omgivningarna. Att anpassa **NordBed Ultra** för att efterlikna brukarens invanda miljö så mycket som möjligt är viktigt.

Det stora utbudet av sänggavlar, långsidor och sänggrindar i olika färger gör att sängen kan anpassas på olika sätt för att möta individuella behov.



Perfekt för brukare med demens

- ▶ Den låga höjden erbjuder en säker miljö för rörliga brukare
- ▶ Den konfigurerbara sängen kan anpassas:
 - För att mer efterlikna en vanlig säng
 - För att passa in tillsammans med andra, moderna sängar
 - Mjukt överdrag för en ombonad, trygg och säker miljö
 - Belysning under sängen för att minska risken av skador vid förflyttning i och ur sängen

4

**EXKLUSIVA
FUNKTIONER**

1

ErgoMove technology

- ▶ Förflyttar på ett behagligt sätt brukaren från liggande position till aktivt sittande utan att brukaren glider nedåt och utan behov av ompositionering
- ▶ Minskar skjuv

3

Up-and-Out™

- ▶ Erbjuder säkra och smidiga förflyttningar
- ▶ Understödjer det funktionella rörelsemönstret

2

25 cm lägsta höjd

- ▶ Möjliggör säkra förflyttningar och ökar fallpreventionen - med 10 cm hjul som standard

4

Optimerad indelning av sängbotten

- ▶ Baserad på antropometriska mått för ökad komfort

Ytterligare funktioner

- ▶ **RememberMe™:**
 - Programmerbar LCD manöverdosa
 - ErgoMove och Up-and-Out kan anpassas till individuella behov
- ▶ **Integrerat förlängningsbar sängbotten**
 - Ytterligare 10 cm i huvud- respektive fotände möjliggör anpassning till olika behov
- ▶ **Anti-Trendelenburg och Trendelenburg som tillval**
 - Underlättar för vårdpersonal vid förflyttning i säng
 - Smidig tryckavlastning
- ▶ **Belysning under sängen**
 - Enkelt att sätta på belysningen
 - För fallprevention/säkerhet



Manöverdosa ▲

Enkelt igenkännbara färger för brukare som har synsvårigheter

- ▶ De funktioner som brukaren använder mest frekvent har färger som tagits fram i samarbete med experter och som är enkla att identifiera
- ▶ För att underlätta för brukaren lyser respektive knapp upp när en funktion är vald, detta ger tydlighet dag som natt
- ▶ För enkel hantering är knapparna för de vanligaste funktionerna placerade överst på manöverdosan och justering görs genom att trycka på upp/ner knapparna
- ▶ Manöverdosan är låsbar som standard


Tekniska data ▼

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida www.invacare.se

	Ytermått Innermått ▼	Ytterlängd Innerlängd ▼	Lyftintervall ▼	Sängbotten- indelning ▼	Frigång under sängen ▼	Lårdelsvinkel ▼
NordBed Ultra	100 / 90 cm	213 / 200 cm	25 - 85 cm	80-17-30-65 cm	15 cm	0 - 49°
	Bendelsvinkel ▼	Anti- Trendelenburg / Trendelenburg ▼	Max. brukarvikt ▼	Total vikt (utan sänggavlar) ▼	Tyngsta separata del ▼	Kan maskintvättas ▼
NordBed Ultra	0 - 19°	+/- 15°	200 kg	105 kg	55 kg	Ja

Viktigt: Sängen skall inte användas av brukare under 12 år, eller av brukare vars kroppsstorlek motsvarar en 12-åring eller mindre utan att en individuell dokumenterad utprovning sker av eventuella risker.

Ramfärg ▼

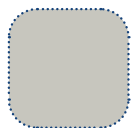

Aluminiumgrå

Träfärg ▼



Bok



Ek



Umbra



Bok/
ljusblå



Ljusblå



Vit

Kundservice: 08-761 70 90

Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



Yes, you can.®

© 2020 Invacare International GmbH. Alla rättigheter är reserverade för Invacare. All information i denna broschyr stämmer vid tryckningstillfället. Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande. NordBed Ultra Dementia - SE - 04/2020