

Dacapo Sortiment

Kvalitets madrasser i skum



Flexibilitet & komfort




Invacare **Dacapo** är ett brett sortiment av madrasser designade för att uppfylla kundernas behov inom hemsjukvård och på sjukhus. De är uppbyggda av högelastiskt, miljövänligt skum med hög densitet, alternativt viscoelastiskt skum inom segmenten standard, komfort och tryckavlastning.

Dacapo har utvecklats för att erbjuda optimal liggkomfort samt tryckavlastning utan kompromiss gällande hygien och användarvänlighet.

Invacare **Dacapo Standard**

Dacapo Standard är en basmadrass som uppfyller de grundläggande kraven för en god liggkomfort. Madrassen består av högelastiskt skum med god bärighet.

Dacapo standard är 10 cm hög.

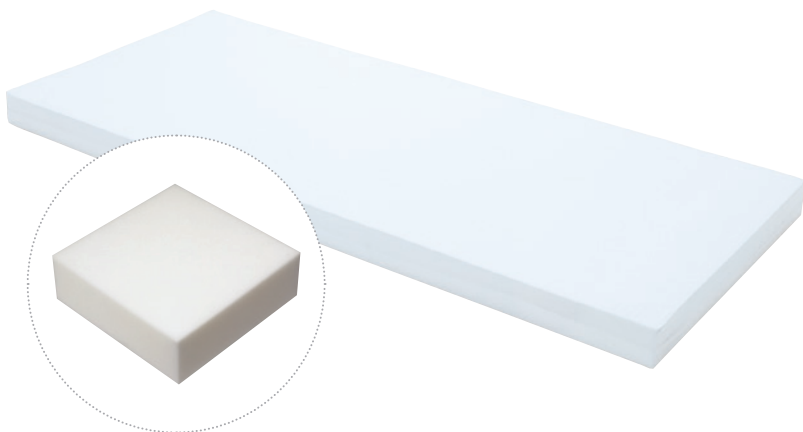

Dacapo Standard Överdrag

- ▶ 100% bomull
- ▶ Maskintvätt 40 grader

Invacare **Dacapo Basic**

Dacapo Basic är en basmadrass utrustad med hygienöverdrag som väl uppfyller de grundläggande kraven på liggkomfort och med hög hygienisk standard. Det högelastiska miljövänliga skummet erbjuder ett stöttande underlag med stor följsamhet och hållbarhet.

Dacapo Basic är 12 cm hög.



Dacapo Basic Överdrag

- ▶ 100% vätsketätt
- ▶ Polyuretan med polyester
- ▶ Luftgenomsläppligt/ ångandas
- ▶ Töjbart i två riktningar
- ▶ Maskintvätt 95 grader

Invacare **Dacapo Heavy User Light**

Dacapo Heavy User Light är uppbyggd för att möta tyngre brukares behov och erbjuder ett fast, komfortabelt stöttande underlag.

Madrassen är uppbyggd av tre skikt. Det undre skiktet består av höglastiskt skum som upprätthåller madrassens stabilitet. Det mittersta skiktet även det av höglastiskt skum fast något mjukare. Det övre skiktet är av viscoelastiskt skum som ger extra god tryckavlastning och komfort.

Dacapo Heavy User Light är 15 cm hög.



Dacapo Heavy User Light Överdrag


- ▶ 100% vätsketätt
- ▶ Polyuretan med polyester
- ▶ Luftgenomsläppligt/ ångandas
- ▶ Töjbart i två riktningar
- ▶ Maskintvätt 95 grader

Dacapo Heavy User Light finns även i en variant som klarar 350 kg brukarvikt.

Invacare **Dacapo Comfort**

The **Dacapo Comfort** är en komfort madrass som väl uppfyller de grundläggande kraven för en god liggkomfort. Det höglastiska miljöskummets volymvikt ger en ökad möjlighet för en god återhämtning samtidigt som madrassens unika öppna cellstruktur tillåter kroppen att andas. Madrassen är skuren i olika stora fyrkanter som är individuellt flexibla. Denna profilering gör det möjligt för kroppens konturer att sjunka ner i materialet så att optimal liggkomfort uppnås.

Dacapo Comfort är 12 cm hög.

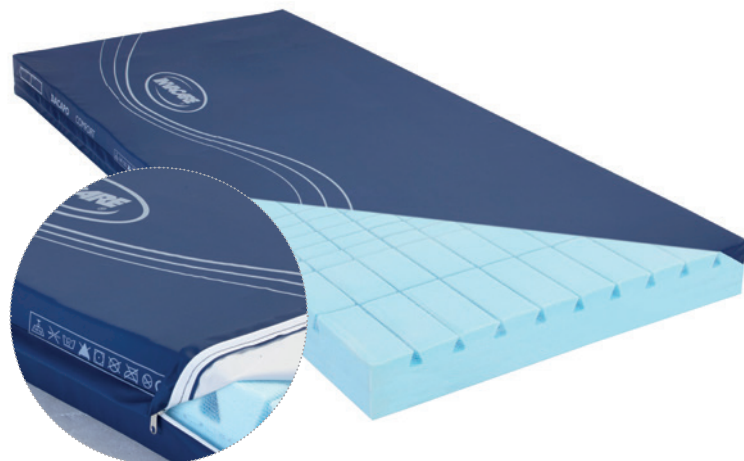


Dacapo Comfort Överdrag

- ▶ 100% vätsketätt
- ▶ Polyuretan med polyester
- ▶ Luftgenomsläppligt/ ångandas
- ▶ Töjbart i två riktningar
- ▶ Maskintvätt 95 grader

Invacare **Dacapo Comfort Plus**

The **Dacapo Comfort Plus** är en trycksårspåbyggande madrass som understödjer behandling av trycksår. Det högelastiska miljöskummets volymvikt ger en ökad möjlighet för en god återhämtning samtidigt som madrassens unika öppna cellstruktur tillåter kroppen att andas. Madrassen är skuren i olika stora fyrkanter som är individuellt flexibla. Denna profilering gör det möjligt för kroppens konturer att sjunka ner i materialet så att optimal liggkomfort uppnås.

Dacapo Comfort Plus är 14 cm hög

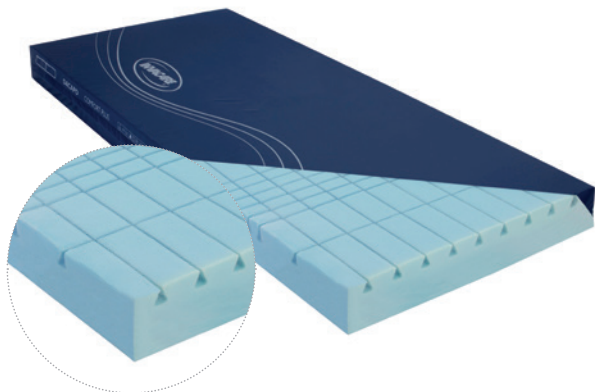


Dacapo Comfort Plus Överdrag

- ▶ 100% vätsketätt
- ▶ Polyuretan med polyester
- ▶ Luftgenomsläppligt/ ångandas
- ▶ Töjbart i två riktningar
- ▶ Maskintvätt 95 grader

Invacare **Dacapo Child**

Dacapo Child är en enskikts madrass uppbyggd av ett högelastiskt miljövänligt skum. Madrassen är designad för lättare, yngre brukare och tillåter kroppens konturer att sjunka ner. Madrassens volymvikt ger en ökad möjlighet för god återhämtning.

Dacapo Child är 8 cm hög.

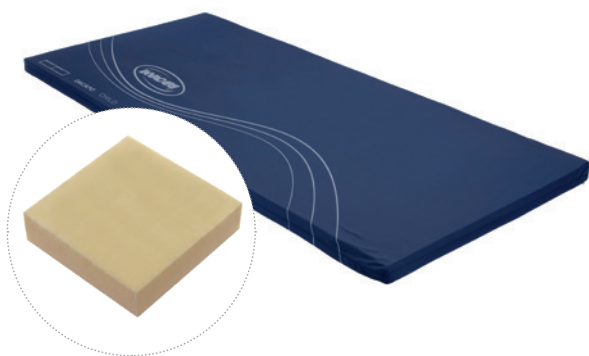


Dacapo Child Överdrag

- ▶ 100% vätsketätt
- ▶ Polyuretan med polyester
- ▶ Luftgenomsläppligt/ ångandas
- ▶ Töjbart i två riktningar
- ▶ Maskintvätt 95 grader

*Finns även med bomullsöverdrag

Invacare **Dacapo Kid**

Dacapo Kid-madrassen är speciellt utformad för **NordBed Kid** vårdsäng, tillgänglig i 6 storlekar för att passa sänggramens olika varianter. Baserat på **Dacapo Child**-designen med ett skikt hög elastiskt skum. **Dacapo Kid**'s fyrkantsskurna profilering minskar skjuvning och omfördelar trycket samt ger ett bättre mikroklimat. Sist men inte minst madrassens ger en komfortabel och hållbar lösning för små barn.

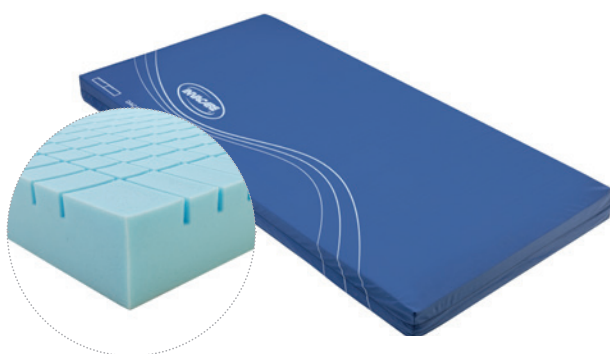


Dacapo Kid Överdrag

- ▶ 100% vätsketätt
- ▶ Polyuretan med polyester
- ▶ Luftgenomsläppligt/ ångandas
- ▶ Töjbart i två riktningar
- ▶ Maskintvätt 95 grader
- ▶ Svetsade sömmar

Invacare **Dacapo Premier**

Dacapo Premier har ett unik profilerat löst skuminlägg som ger utmärkt komfort och optimerar tryckavlastningen. Madrassöverdraget är tvåvägs stretch och hjälper till att minska skjuv- och friktionskrafterna. Skuminlägget stöds av en u-kärna med fast ram av skum som underlättar patientförflyttning genom att ge effektivt sidostöd.

Dacapo Premier är 15 cm hög.

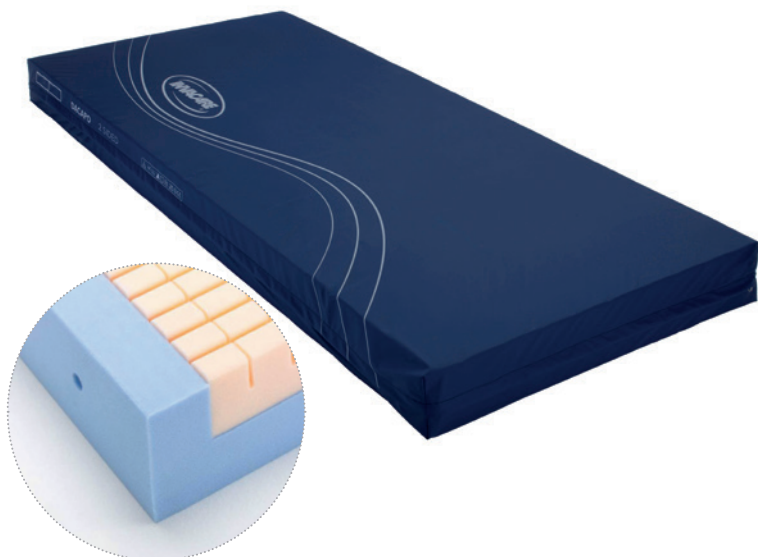


Dacapo Premier Överdrag

- ▶ 100% vätsketätt
- ▶ Polyuretan med polyester
- ▶ Luftgenomsläppligt/ ångandas
- ▶ Töjbart i två riktningar
- ▶ Maskintvätt 95 grader

Invacare **Dacapo Top Pro**

Dacapo Top Pro är en högkvalitativ tryckavlastande madrass och har en skumkärna som har oberoende, geometriskt skuren profilering. Skumkärnan har större, mer stödjande profilering i mitten och mindre profilering vid varje ände. Detta gör det möjligt för topp madrassen att uppnå jämn tryckfördelning genom att anpassa sig till formen och kroppens form och utskjutande delar.

Dacapo Top Pro är 7 cm hög.

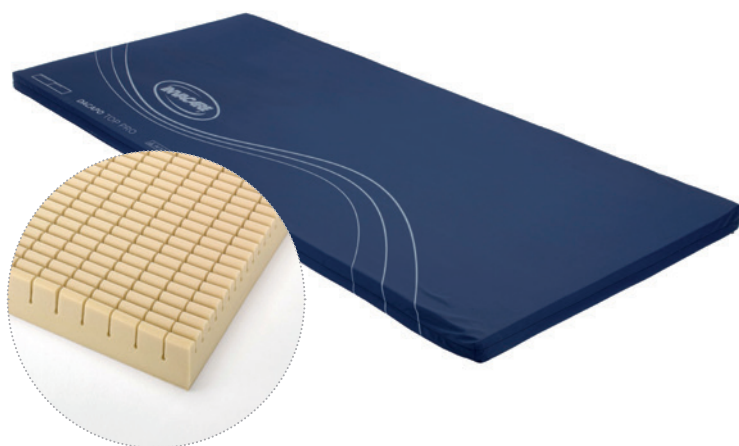

Dacapo Top Pro Överdrag

- ▶ 100% vätsketätt
- ▶ Polyuretan med polyester
- ▶ Luftgenomsläppligt/ ångandas
- ▶ Töjbart i två riktningar
- ▶ Maskintvätt 95 grader

Nyckelfunktioner och alternativ

◀ Olika alternativa överdrag



Hygienöverdrag

Hygienöverdraget är en kombination av polyuretan och polyester. Överdraget är töjbart i två riktningar och följsamt mot kroppen. Materialet är luftgenomsläppligt och ångandas. Överdraget är allergitestat och behandlat mot dammkvalster.

Hygienöverdrag med evakueringsfunktion

Evakueringsöverdraget är en kombination av polyuretan och polyester. Överdraget är töjbart i två riktningar och följsamt mot kroppen. Materialet är luftgenomsläppligt och ångandas. Överdraget är utrustat med handtag på alla fyra sidorna. På överdragets långsidor finns säkerhetsremmar som vid nödläge sveps över brukaren för säker fastsättning.

Överdraget är allergitestat och behandlats mot dammkvalster.

Bomullsöverdrag

Bomullsöverdraget är tillverkat i ren bomull och är tvättbart i 40°C.



◀ Högelastiskt skum

Polyuretanskum varierar i cellstruktur och densitet. Hög densitet har relativt jämn och tät cellstruktur som gör att den kan ge bra stöd när den belastas, samt bibehålla sin form när den är obelastad.



◀ Enkel att hantera

Handtag underlättar ytterligare enkel hantering av Dacapo-sortiment.



◀ Blixtlås

Diskret dragkedja på tre eller 4 sidor beroende på modell försedd med överlappande droppkant.

Tekniska data ▼


För mer detaljerad information gällande denna produkt, inkluderat produktens bruksanvisning, var vänlig besök vår hemsida www.invacare.se.



Produktvikt ▼



Max brukarvikt ▼

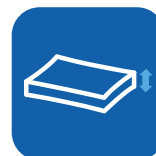

Höjd ▼

	Produktvikt ▼	Max brukarvikt ▼	Höjd ▼
Standard	7 - 10.5 kg	100 kg	10cm
Basic	8.5 - 12.5 kg	130 kg	12cm
Heavy User Light	11 - 16.5 kg	250 kg	15cm
Heavy User	12 - 17.5 kg	350 kg	15cm
Comfort	11.5 - 17kg	130 kg	12cm
Comfort Plus	13.5 - 19kg	140 kg	14cm
Child	3 kg	100 kg	8cm
Premier	14 kg	180 kg	15cm
Top Pro	4.5 - 5 kg	150 kg	7cm

1. Madrassens vikt varierar beroende på storlek. Medelvärde är utsatt som en indikation.

2. Madrasserna är tillgängliga i flera olika storlekar beroende på marknadens krav. Kontakta Invacare för mer information

Brandtestad i överensstämmelse med den europeiska standarden EN 597 - 1 och den europeiska standarden EN 597 - 2
Är tillämplig på alla Dacapo-modeller med ett polyuretanöverdrag.

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



Yes, you can.®