

# Etude<sup>®</sup> Plus Etude<sup>®</sup> Plus Low



En god natts sömn



**Etude Plus** vårsäng med sin flexibla design och enkla hantering är idealisk för vård i hemmet. Alla beprövade funktioner i den populära **Etude**-serien, såsom stabilitet, säkerhet och enkel hantering finns även hos denna nya modell. **Etude Plus** är lätt att transportera på speciella transportbeslag och kan lätt monteras och demonteras i hemmet utan att kompromissa med brukarens komfort och säkerhet.

Med *Invacare* **Etude Plus Low** erbjuds dubbla fördelar tack vare den extra låga monteringsmöjligheten av sängbotten på 20 cm, vilket innebär extra säkerhet och minimerar risk för fallskador.



### Modern och flexibel

Sängen kan konfigureras med sänggrindar i olika utföranden. **Etude Plus** har som standard ryggtillbakaföring för ökad komfort och minskad risk för skjuvning och friktion av ömtålig hud. De inbyggda sängbottenhöjderna på **Etude Plus** och **Etude Plus Low** är standard och utformade för att passa varje brukares individuella behov vid t ex överflyttning. **Etude Plus** har därför monteringsbar sängbottenhöjd på 33 cm alternativt 40 cm och **Etude Plus Low** 20 cm alternativt 27 cm.

### Enkel hantering och lagring

Sängen är lätt att sköta och förvara. Uppbyggnaden förenklar montering/demontering, transport och förvaring. Om sänggavlarna och sängbotten monteras på transportbeslag blir **Etude** lätt och smidig att hantera för en person eftersom varje del väger mindre än 25 kg.

### Högsta möjliga säkerhetsnivå

**Etude Plus** uppfyller IEC60601-2-52, standarden för sängar. Detta är den högsta graden av säkerhet för både brukare och vårdare. **Etude Plus** är testad och godkänd av TÜV mekaniskt. **Etude Plus** är kompatibel med tre olika serier av grindar, Britt V, Line samt fällbara Scala 2. Samtliga uppfyller kraven på ökad styrka vilket krävs i den nya säkerhetsstandard för sängar.

### Egenskaper och tillbehör



#### Dubbla sängbottenfästen Enkelt underhåll

Snabb och enkel fastsättning av sängbotten i sänggavlarna med olika höjder för olika ändamål.



IPX6 motorerna kan enkelt demonteras utan verktyg. Kablaget mellan elektronik och motorn är lätt att komma åt och byta ut.



#### Ryggtillbakaföring

Ökad komfort för brukaren med mindre sjuvkrafter och friktion.



#### Manöverdosa

Ergonomisk och smidig manöverdosa. Finns med eller utan låsbara funktioner.

## Egenskaper och tillbehör



### Etude Plus

**Etude Plus** har alternativa sängbottenhöjder 33-73 cm och 40-80 cm.



### Etude Plus Low

De extra låga sängbottenhöjderna är en fördel med **Etude Plus Low** vilket ökar säkerheten och reducerar risken för skador för de brukare som riskerar att falla ur sängen. **Etude Plus Low** har alternativa sängbottenhöjder 20-60 cm samt 27-67 cm.



### Transport och förvaring

Lätt att förvara och transportera när den placeras på transportbeslagen.



### Förlängningsmöjligheter

Sängen kan förlängas. Välj mellan 10 eller 20 cm förlängningsdel.



### Grindskydd

Polstrat eller nätgrindskydd för integrerade grindar. Grindskyddet kan sitta kvar på grinden då denna sänks. Finns i längderna standard och förlängd +10 samt +20 cm.



### Sänggrind Britt V

Integrerad sänggrind i bok.



### Sänggrind Line/Line förlängningsbar

Sänggrind i aluminium.



### Grindförhöjning +15 cm

Monterbar förhöjningsribba som höjer sänggrinden med 15 cm. För madrasshöjd upp till 33 cm. Två olika utföranden, passande till Line alternativt Britt V.




### Transportbeslag till Etude

Kompleta beslag för transport och förvaring/lagring av Etude sängen.


## Egenskaper och tillbehör

Fällbara sänggrindar i metall. Finns i beige och alu-silver.

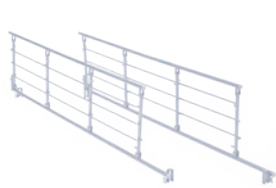

**Sänggrind  
Scala Basic 2**

För standardmadrass.

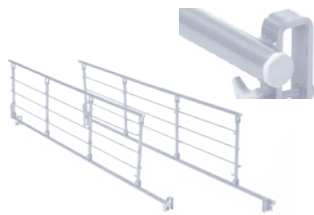


**Sänggrind  
Scala Basic Plus 2**

Sänggrind med snabbkoppling.



**Sänggrind  
Scala Medium 2**

För hög madrass.

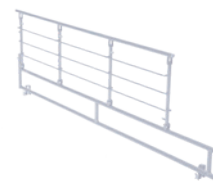

**Sänggrind  
Scala Decubi 2**

För extra hög madrass.

Samtliga sänggrindar uppfyller standard IEC60601-2-52

## Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

	Utvändig bredd Invändig bredd/ rek madrassbredd	Utvändig längd Invändig längd	Sängbotten höjdställning	Sängbotten indelning	Ryggstöds vinkel	Lårdels vinkel	Bendelsvinkel över horisontalplan
<b>Etude Plus</b>	1020 mm 900 mm	2190 mm 2070 mm Rek madrasslängd: 2000mm	330 - 730 mm or 400 - 800 mm	850 - 240 - 350 - 560 mm	0 - 70°	0 - 18°	0 - 25°
<b>Etude Plus Low</b>			200 - 600 mm or 270 - 670 mm				

	Tiltmöjlighet <sup>1</sup>	Total vikt	Max brukarvikt	Tyngsta separata del
<b>Etude Plus / Etude Plus Low</b>	11°	75,4 kg	SWL 200 kg 165 kg	24,6 kg

Uppfyller kraven i IEC 60601-2-52

1. Vänligen notera att tiltfunktionen endast används efter läkarordination och under övervakning.

### Viktigt!

Sängen är avsedd för vuxna brukare som är minst 146 cm långa, som väger minst 40 kg och som har ett BMI-värde (kroppsmasseindex) på minst 17.

## Ramfärg och träslag

Aluminiumgrå

Bok



Väligen notera att färgerna kan variera något från de som visas ovan.

Kundservice: 08-761 70 90  
Fax 08-761 81 08  
[sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com)  
[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Invacare AB  
Box 66 - 163 91 Spånga  
Sweden

**INVACARE**  
Yes, you can.®

