



**Soft Tilt™**

Innovativ lösning för  
tryckavlastning

**INVACARE**  
Yes, you can.®

Invacare **Soft Tilt** är ett nytt innovativt system som designats för att automatiskt tända brukarens läge i sängen samtidigt som det underlättar för personalen i samband med förflyttningar i det dagliga vårdarbetet.

**Soft Tilt** installeras enkelt på de flesta sängarna från Invacare, och fungerar tillsammans med sängens övriga funktioner och madrass.

- ▶ Automatisk tryckavlastning
- ▶ Endast en vårdare behövs
- ▶ Optimerad brukar- och vårdarkomfort



## Automatisk tryckavlastning

**Soft Tilt** kan programmeras för att under natten automatiskt, med förbestämda tidsintervall och vinklar ändra brukarens läge. Användning minskar tryck och förebygger utvecklingen av trycksår. Vid automatisk användning kommer vingarna aldrig att höjas mer än 40°, detta för att garantera optimal säkerhet och komfort medan brukaren sover.

### Endast en vårdare behövs

**Soft Tilt** kan hanteras manuellt av en person vilket gör den idealisk för användning i vård situationer med begränsade resurser. Den lätthanterade manöverdosan tillåter vårdaren att höja vingarna upp till 80°, vilket underlättar omvårdnad och applicering av glidlakan. När **Soft Tilt** används tillsammans med sängens övriga funktioner hjälper den vårdaren att med minsta ansträngning, på ett säkert sätt förflytta brukaren från liggande i säng till sittande på sängkant och stående.

### Optimerad brukar- och vårdarkomfort

Tack vare de tysta, smidiga och automatiska rörelserna hos **Soft Tilt**, möjliggörs en lugnare och mer ostörd sömn. Dessutom förbättras vårdarens arbetsmiljö och risken för arbetsskador i samband med förflyttning och omvårdnad kan minskas.



## Huvudfunktioner och fördelar




### ▲ Profilering

*Soft Tilt* fungerar i kombination med sängbottens rörelser för att göra det bekvämt för brukaren och underlätta vid förflyttningar.



### ◀ Bekväm och automatisk tryckavlastning

Vid användning av det automatiska programmet kommer den motsatta vingen att höja sig något för att ge ytterligare stöd för brukaren. Så snart brukaren förflyttats till önskad position återgår den motsatta vingen till horisontalläge.

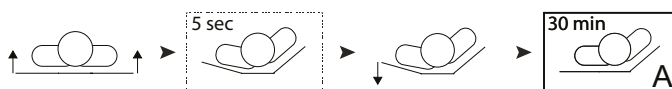

### ▲ Manuell hantering

Vid manuell hantering via manöverdosan kan vingarna höjas till 80° i samband med förflyttning, omvårdnad och placering av lyftsele och glidlakan.



### ◀ Programmerbar kontrollbox

Den lätthanterade kontrollboxen levereras med ett förinställt program (auto) och två program som kan anpassas för individuella brukarbehov. Efter programmering aktiveras programmet genom att aktuell knapp trycks in.



### ▲ Lägesändring för komfort

*Soft Tilt* kan programmeras för att med båda vingarna höjda samtidigt försiktigt vända brukaren från sida till sida.



### ▲ Intuitiv manöverdosa

Tydlig och lättanvänd manöverdosa för manuell hantering. En intuitiv knapp som aktiverar båda vingarna för en bekväm manuell vändning.



### ▲ Överdrag

Blått överdrag med elastiska band som håller madrassen på plats. Tvättbart i maskin i upp till 80 grader.

# Invacare sängar kompatibla med **Soft Tilt**



▶ Invacare® **SB 755**



**NordBed Familjen:**

- ▶ Invacare® **NordBed Optimo**,
- ▶ Invacare® **NordBed Ultra**



▶ Invacare® **Medley Ergo**



▶ Invacare® **Etude Plus**

## Tekniska data ▼

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, [www.invacare.se](http://www.invacare.se)



Maxvinkel i manuellt läge ▼

80°



Maxvinkel i automatiskt läge ▼

40°



Tidsintervall i automatiskt läge ▼

0 - 180 minuter



Max brukarvikt ▼

116 - 165 kg \*  
SWL 145 - 185 kg \*



Produktens tyngsta del ▼

18 kg



Tvättbart överdrag ▼

80°

**Soft Tilt**

Uppfyller kraven i IEC 60601-2-52

\* Beroende på vilken säng Soft Tilt används tillsammans med. Se bruksanvisning för Soft Tilt i kombination med önskad säng

## Färg ▼



Vit

Vänligen notera att färgen kan variera något från den som visas till vänster.

**NB:** Sängen skall inte användas av brukare under 12 år eller av brukare vars kroppsstorlek motsvarar en 12-åring eller mindre.

**Soft Tilt** kan endast användas i kombination med **SB 755**, **NordBed Optimo**, **NordBed Ultra**, **Medley Ergo** and **Etude Plus**. OBS! Soft Tilt kan inte flyttas mellan de olika sängmodellerna eftersom det är olika monteringsätt beroende på sängbottens utseende.

**Soft Tilt** tillverkas av GDV Technology på uppdrag av Invacare.

**Kundservice: 08-761 70 90**  
Fax 08-761 81 08  
[sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com)  
[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Invacare AB  
Box 66 - 163 91 Spånga  
Sweden



**Yes, you can.®**