



Confidence in posture solutions

# Azalea<sup>®</sup>-familjen



En stor familj







Invacare® Rea komfortrollstolar erbjuder brukarna individuella lösningar och ett komfortabelt sittande, med ett stort urval av modeller, tillbehör och kompatibilitet inom familjen.

Rea **Azalea** är originalmodellen av denna komfortrollstol och har i sitt sortiment en rad nischade varianter. Varje modell är en del av **Azalea-familjen**, och med några små skillnader, kan de erbjuda brukaren den perfekta individuella lösningen för varje enskilt behov.

Alla stolar kan enkelt justeras och är utrustade med **Dual Stability System**® (DSS) och har en lång och väl beprövad erfarenhet av säkerhet och kvalitet.

För att ge brukaren den bästa passformen, förutom nischmodellerna, erbjuder **Azalea** individuell storleksjustering för bättre hållning. Förutom den populära bredd- och djupjusteringen av sitsen kan vi nu också erbjuda samma justering på ryggstödet. Detta ger en unik kombination av möjligheter då justeringarna är oberoende av varandra.

Ta reda på vilket behov av posturalt stöd som finns så kan Rea **Azalea-familjen** uppfylla det.

### Rekommendation av ryggbas, fast eller ställbar (med velcro) ryggplatta

Fast (Ställbar)	Fast (Ställbar)	Fast Ställbar	Fast (Ställbar)	(Fast) Ställbar	(Fast) Ställbar	(Fast) Ställbar	Ställbar	Ställbar	(Fast) Ställbar
<b>Kort</b> Alla inställningar så nära som möjligt	<b>Lång</b> Högt ryggstöd och förlängt sittdjup	<b>Medel</b> Inställningar av sits och rygg i standardposition	<b>Bred</b> Ryggstöd och sits breddade	<b>Bred upptill</b> Övre del av ryggstöd breddat, nedre del samt sits är smal	<b>Bred nertill</b> Nedre del av ryggstödet samt sitsen breddad	<b>Stor framtill</b> Övre del av ryggstödet vänt för att ge mer utrymme för skuldrorna	<b>Större baktill</b> Nedre del av ryggstödet vänt för att ge utrymme för utskjutande rumpa	<b>Kyftotisk rygg</b> Mer utrymme i ryggstödet i mittdel och snävare stöd i den nedre delen	<b>S-formad rygg</b> Den lägre mittsektionen snäv medan övriga delar följer ryggradens S-form

### Ryggstödsval Flex 3



Den ställbara ryggen har en bredd- och höjjusterbarhet. Ryggroren justeras individuellt. Den övre respektive nedre delen av ryggstödet har olika form och är vändbart. Detta möjliggör utrymme antingen nedtill för rumpan alt. ovanför för överkroppen.



Det fasta ryggstödet är för brukare som kräver ett mer stabilt stöd än vad den ställbara ryggen kan ge. Ryggstödet är givetvis steglöst justerbart i bredd och höjd.

## Rea® Azalea® och Azalea® Assist



### Erbjuder utmärkt sittkomfort och många inställningsmöjligheter!

Rea **Azalea** är det naturliga valet för den måttligt aktiva brukaren samt för de mer passiva. Det komfortabla sittsystemet gör det möjligt för brukaren att vid behov förändra sitt sittande med bibehållen komfort. Detta i kombination med goda köregenskaper gör **Azalea** till det perfekta valet.

### Tilt och ryggstödsvinkling gör livet bekvämt

Rea **Azalea** och Rea **Azalea Assist** har 25° sitstilt och 30° ryggvinkling. Både tilt och ryggvinkling kan enkelt justeras manuellt eller elektriskt av vårdaren och de med el-funktion kan brukaren själv justera.



#### Rea **Azalea**

Originalen med stora drivhjul, som du kan köra själv.



#### Rea **Azalea Assist**

Transportversionen med drivhjul i storleken 16".


## Tekniska data

För mer information om denna produkt, inklusive produktens bruksanvisning, hänvisar vi till [www.invacare.se](http://www.invacare.se).

	Sittbredd	Sittdjup	Sitthöjd	Ryggstödhöjd	Intervall armstödhöjd	Benstödslängd	Sitsvinkel	Intervall ryggstödsvinkel
Rea <b>Azalea</b> & <b>Azalea Assist</b>	390-440/ 440-490/490-540 (390-490/440-540/ 490-590 mm)	430 - 500 mm	400/450 mm	Fast rygg: från 560-790 mm Ställbar rygg: från 540-715 mm	240 - 360 mm	330 - 500 mm	-1° - 23° (+1° - 25°)	0°-30°
	Hjulbas	Totalhöjd	Totallängd inkl fotplatta	Vikt	Max brukarvikt	Transportvikt	Krocktestad	Max lutning vid användning av parkeringsbroms
<b>Azalea Assist</b> 16" <b>Azalea</b> 22"-24" u vb <b>Azalea</b> 22"-24" m vb	SB + 220mm (16") SB + 240mm (22") o 24" u VB)	900-1250 mm	950-1020 mm	34 kg (SW 440 mm)	Max 135 kg	16,5 kg <sup>1</sup>	ISO 7176-19	7°

1. Transportvikten ökar med 4,2 kg vid val av elektrisk tilt och ryggvinkling.

## Ramfärg

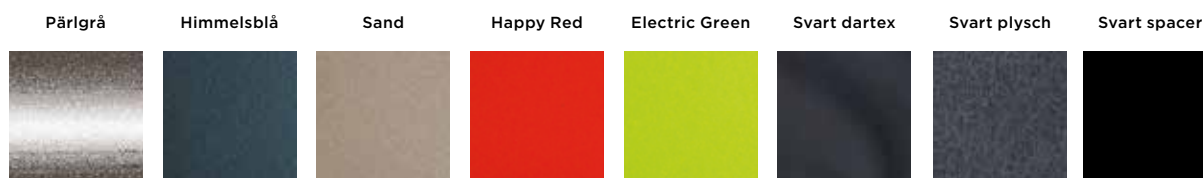

## Klädsel



## Rea® Azalea® Base och Azalea® & Alber viamobil V25



### Rea Azalea Base

Framtagen för brukare som söker en skräddarsydd sits kombinerat med en förstklassig rullstolsbas. **Rea Azalea Base** är utvecklad från vår modell **Rea Azalea** och är en robust rullstol med samma egenskaper; som t ex tilt och glidande balanspunkt. En nyckelegenskap är att basen är utrustad med "Tilt in space function" - en viktfordelningsmekanism som ger stabilitet för brukaren.

### Rea Azalea och Alber viamobil V25

Till skillnad från många andra drivaggregat hindrar inte **viamobil** tiltningsfunktionen hos **Rea Azalea** (med en sitthöjd på 450 mm). Rullstolens alla funktioner förblir tillgängliga. Det är därför **viamobil** kan sitta kvar på rullstolen efter en promenad utan att dess funktioner begränsas.

### Rea Azalea Base



Idealisk för dem som behöver en stabil och säker stol med skräddarsydd komfort. Base kan användas tillsammans med alla delar och tillbehör till övriga **Rea Azalea**-modeller (utom bålstöd).
















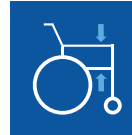


### Rea Azalea & Alber viamobil V25

För information och tekniska data hänvisas till produktbladet för **Alber viamobil**.

## Tekniska data

För mer information om denna produkt, inklusive produktens bruksanvisning, hänvisar vi till [www.invacare.se](http://www.invacare.se).

	Sittbredd	Sittdjup	Sitthöjd	Ryggstödshöjd	Intervall armstödshöjd	Benstödslängd	Sitsvinkel	Intervall ryggstödsvinkel
<b>Rea Azalea Base</b>	 340/390/ 440/ 490 mm (+ 50/100 mm)	 380 - 450 mm <sup>1</sup> 430 - 500 mm	 400/450 mm	 600 1/ 700 mm	 240 - 360 mm	 330 - 500 mm	 -1° till 23° (22 / 24") +1° till 25° (16")	 0°-30°
<b>Azalea Assist 16"</b> <b>Azalea 22"-24"</b> u vb <b>Azalea 22"-24"</b> m vb	 SB + 220mm (16") SB + 240mm (22") o 24" u VB)	 1300 <sup>1</sup> / 1400 mm	 930 - 1040 <sup>1</sup> / 950 - 1070 mm	 20 kg	 Max 135 kg	 15 kg	 ISO 7176-19	 Max lutning vid användning av parkeringsbroms 7°

1. Transportvikten ökar med 4,2 kg vid val av elektrisk tilt och ryggvinkling.
2. Rea Azalea Minor har mindre mått.

## Ramfärg



## Klädsel





## Rea® Azalea® Tall och Azalea® Minor



### Rea Azalea Minor – utvecklad för små vuxna och tonåringar

Rea Azalea Minor är utvecklad för brukare som behöver ett kortare sittdjup och en smalare sittbredd. Anpassad från Rea Azalea, kan Azalea Minor med stolthet stå för alla fördelar med en pålitlig, tiltbar rullstol med en unik glidande balanspunkt. Denna modell är idealisk för alla brukare som behöver en pålitlig, stabil rullstol.

### Rea Azalea Tall – Ingen begränsning av komforten för långa brukare

Rea Azalea Tall är speciellt utvecklad för att möta behoven hos långa brukare och brukare som kräver en sitstilt samt längre och högre stödytor. Liksom Rea Azalea har Rea Azalea Tall alla de fördelar när det gäller säkerhet vid tiltning av rullstolen.



#### Rea Azalea Minor

Körhandtagen är utåtvecklade för att ge ett utökat utrymme för vårdaren.



#### Rea Azalea Tall

Finns med både 24" och 16" drivhjul.

## Tekniska data

För mer information om denna produkt, inklusive produktens bruksanvisning, hänvisar vi till [www.invacare.se](http://www.invacare.se).

	Sittbredd	Sittdjup	Sitthöjd	Ryggstödhöjd	Intervall armstödhöjd	Benstödslängd	Sitsvinkel	Intervall ryggstödvinkel
<b>Rea Azalea Tall</b>	390-450/440-500/ 490-550 mm (390-490/440-540/ 490-590 mm)	480 - 550 mm	500 mm	Fast rygg: 560 - 790 mm Ställbar rygg: 540 - 715 mm	240 - 360 mm	330 - 500 mm	-1° till 23° (+1° till 25°)	0° - 30°
<b>Rea Azalea Minor</b>	340 - 440 mm	380 - 450 mm	400/450 mm	550 - 650 mm	240 - 360 mm	330 - 500 mm	+1° till 25°	0° - 30°
	Hjulbas	Totalhöjd	Totallängd inkl fotplatta	Vikt	Max brukarvikt	Transportvikt	Krocktestad	Max lutning vid användning av parkeringsbroms
<b>Rea Azalea Tall</b>	SB + 220mm SB + 240mm SB + 270mm	1000 - 1300 mm	950 - 1070 mm	34 kg (SB 440 mm)	Max 135 kg	18,7 kg <sup>1</sup>	ISO 7176-19	7°
<b>Rea Azalea Minor</b>	SB + 220mm SB + 240mm SB + 270mm	900 - 1250 mm	900 - 970 mm	32 kg	Max 75 kg	14,5 kg	ISO 7176-19	7°

1. Rea Azalea Minor
2. Transportvikten ökar med 4,2 kg vid val av elektrisk tilt och ryggvinkling.

## Ramfärg



## Klädsel





### En skräddarsydd lösning för tyngre brukare

*Rea Azalea Max* är en ny komfortrollstol, med tilt och ryggvinkling, för brukare upp till 180 kg, utan att kompromissa med inställningsmöjligheterna. *Rea Azalea Max* är framtagen för att möta behovet hos brukare med extra vikt. *Rea Azalea Max* är en nischad produkt som är ett komplement till den övriga *Rea Azalea-familjen* från Invacare®.

### Fortsatt kompatibilitet

*Rea Azalea Max* erbjuder samma funktion som den övriga *Rea Azalea-familjen*, t ex tiltning med glidande balanspunkt och DSS® (Dual Stability System). Stabiliteten i denna rollstol kommer från kroppslängdskompenseringen i ryggstödet samt benstöden. Detta är till fördel för brukare som har en liten eller begränsad rörelseförmåga samt har svårigheter att byta position.



Framtagen för att möta behovet hos brukare upp till 180 kg.



### Vändbart ryggstöd

Den övre respektive nedre delen av ryggstödet har olika form och är vändbart. Detta möjliggör utrymme antingen nedtill för rumpen alt. ovanför för överkroppen.

## Tekniska data

För mer information om denna produkt, inklusive produktens bruksanvisning, hänvisar vi till [www.invacare.se](http://www.invacare.se).

	Sittbredd	Sittdjup	Sitthöjd	Ryggstödhöjd	Intervall armstödhöjd	Benstödslängd	Sitsvinkel	Intervall ryggstödsvinkel
<i>Rea Azalea Max</i>	550; 610 + 50 mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	500 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 500 mm	1° - 20°	0°-30°
<i>Max Assist</i>	550; 610 + 100 mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	500 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 500 mm	1° - 20°	0°-30°

	Hjulbas	Totalhöjd	Totallängd inkl fotplatta	Vikt	Max brukarvikt	Transportvikt	Max lutning vid användning av parkeringsbroms
<i>Rea Azalea Max</i>	SB + 270mm	1020 - 1240 mm	1050 - 1120 mm	54 kg	max. 180 kg	33 kg	7°
<i>Max Assist</i>	SB + 220 mm	1020 - 1240 mm	1050 - 1120 mm	54 kg <sup>1</sup>	max. 180 kg	37 kg	7°

1. Transportvikten ökar med 4,2 kg vid val av elektrisk tilt och ryggvinkling.

## Ramfärg



## Klädsel



Kundservice: 08-761 70 90  
 Fax 08-761 81 08  
[sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com)  
[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Invacare AB  
 Box 66 - 163 91 Spånga  
 Sweden

