

Invacare Slings



Lyftselar med
Optimal passform & Optimal komfort



Lyftselfamiljen

Med den optimala passformen

Vårt nya urval av lyftselar har designats för att erbjuda brukaren en säker, trygg och bekväm förflyttning. Vi erbjuder olika modeller, storlekar och material för att garantera att det går att hitta den perfekta lyftselen till varje brukare, oavsett funktionsnivå och behov av stöd - från låg sele till hög med huvudstöd.

Vårt expertteam med arbetsterapeuter och vårdpersonal har tagit aktiv del i utvecklingsarbetet för att försäkra att lyftselarna är intuitiva och enkla att hantera. Lyftselarna är lätta att applicera, vilket gör att det går smidigt och ökar känslan av säkerhet.


Familjen består av femton olika modeller, varje modell i upp till sex storlekar samt upp till tre olika material att välja mellan.

Detta stora urval gör att det finns en lyftsele för varje brukare och situation; olika vardagliga förflyttningar, från säng till rullstol/stol, till toalett eller dusch och bad.



4

NYCKEL FUNKTIONER

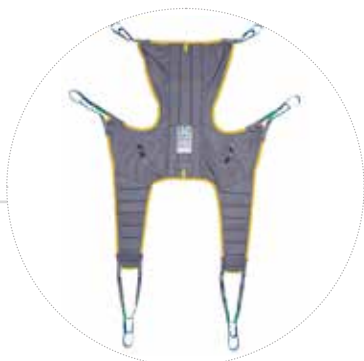

◀ Optimal passform

- ▶ Rätt sele till varje unik brukare och typ av förflyttning
- ▶ Stort urval med 15 modeller, 6 storlekar och 3 material
- ▶ Genomtänkta former för att stödja de tänkta kroppsdelarna
- ▶ Alla lyftselar har flera öglor och går att kombinera med olika lyftbyglar

Ökad säkerhet och trygghet ▶

- ▶ Filmer som visar applicering tillgängliga via QR kod
- ▶ Tydliga etiketter med intuitiva bilder som förklarar applicering
- ▶ Certifierat och miljövänligt flamskyddsmedel för Comfort In Situ selarna



◀ Optimal komfort

- ▶ Mjukt material för ökad komfort
- ▶ Stoppning i rygg och ben för optimal vaddering
- ▶ Extra vaddering under armhålorna

Enkla att applicera ▶

- ▶ Positioneringsficka underlättar placering av selen mellan brukare och ryggstöd i sittande
- ▶ Två mittmarkörer indikerar rätt position över ryggraden
- ▶ Färgkodade öglor underlättar val av positionering




Välja rätt lyftsele

Huvudsyftet med denna guide är fungera som stöd vid val av lyftsele som **ger optimalt stöd**.

Invacare **Slings** är designade för att stödja de delar av kroppen där muskeltonus och kroppskontroll är påverkade. De huvudsakliga kroppsfunktionerna som behöver riskvärderas är ben, höft, bål och huvudkontroll. Följande tabell ger en översikt över vilken modell av lyftsele som kan vara aktuell beroende på brukarens fysiska förmåga.

Kroppskontroll bedömning ▼

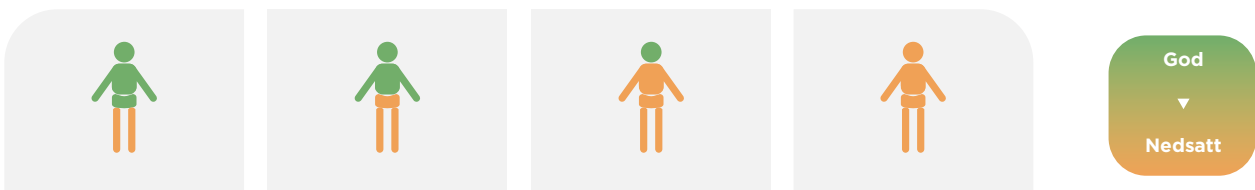

Kroppsstöd från olika modeller av **Invacare Slings** ▼

Mycket lätt ▼	Lätt ▼	Medium ▼	Fullt ▼	Avsedd Användning
	Universal Low	Universal Standard	Universal High	Universal Standard
		Amputee	Universal High Plus	Mindre optimalt*
		Comfort Standard	Easy-Fit	Optimalt
		Comfort In Situ	Comfort High	
Dress Toileting Low				
Dress Toileting High				
Light Transfer Support				
Standing Transfer Vest				
Standing Transfer Vest with Groin band				
Stand Assist				
Transfer Stand Assist				


***Mindre optimalt**
Det är viktigt att tänka på att brukaren vid valet av sele har större fysisk förmåga än vad lyftselen tillåter. Det finns därför risk att detta bidrar till onödig passivitet och immobilisering. Dessutom används mer material än nödvändigt, vilket gör det onödigt svårt att applicera lyftselen.

Välja rätt storlek

Höftbredd och rygghöjd mätt i sittande är de viktigaste måtten för att välja rätt storlek. För selar med bälten behöver man även ta hänsyn till midjemåttet.

Brukarens vikt bör beaktas med avseende på selens maxbelastning. Det går dock inte att bestämma selens storlek enbart baserat på vikten.

I Invacare Selection Guide finns en mer ingående översikt över mått per modell och storlek.

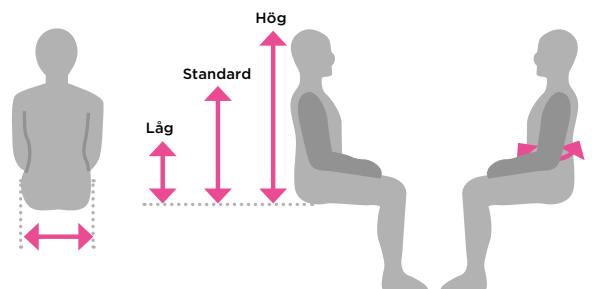

► Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
► SWL	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	250 kg	300 kg

Invacare Slings för mobila och stationära lyftar - passiva lyft

Universal familjen

Allroundselar för vardagliga situationer.



◀ Universal Low

- Stödjer höft och nedre delen av ryggen
- För brukare med god bål- och huvudkontroll
- Används vid förflyttning från sittande till sittande



◀ Universal Standard

- Stödjer hela kroppen inklusive axlarna
- För brukare med god huvudkontroll
- Används vid förflyttning från liggande, lyft från golv förutsatt att brukaren har god huvudkontroll och från sittande till sittande



◀ Universal High

- Stödjer hela kroppen inklusive huvudet
- Brukaren får en lätt tillbakalutad position
- För brukare med nedsatt höft-, bål- och huvudkontroll
- Används vid förflyttning från liggande, lyft från golv och från sittande till sittande



◀ Universal High Plus

- Samma funktion som Universal High men möjliggör att brukaren har sina armar utanför selen och kan vara mer interaktiv

Lyftselar med mindre öppning

För brukare i behov av en lyftsele med mindre öppning.



◀ Amputee

- Stödjer höfterna och bålen
- För enkel- och dubbelamputerade med god huvudkontroll
- Passar inte spastiska brukare
- Brukaren får en lätt tillbakalutad position
- Används vid förflyttning från sittande till sittande och liggande till sittande



◀ Easy-Fit

- Stödjer hela kroppen och huvudet
- För brukare med nedsatt höft-, bål- och huvudkontroll
- Separata benstöd gör den enklare att placera än komfortlyftselarna
- Brukaren får en relativt upprätt position

Lyftselar med större öppning

Stor öppning för att möjliggöra toalettbesök och enkel applicering.



◀ Dress Toileting Low

- För brukare med höft-, bål- och huvudkontroll
- Bälte som ger ökat stöd runt kroppen för säker positionering
- Används vid förflyttning från sittande till sittande



◀ Dress Toileting High

- Samma funktion som Dress Toileting Low men har även huvudstöd för brukare med nedsatt huvudkontroll

Comfort familjen

Selar med odelade benstöd är idealiska för brukare med kronisk smärta. Dessa lyftselar är även användbara för brukare som är amputerade ovanför knät. Comfort In Situ lyftselen är det bästa valet när selen behöver lämnas kvar under brukaren efter förflyttning till sittande.



◀ Comfort Standard

- Stödjer hela kroppen
- För brukare med god huvudkontroll
- Välplacerade handtag



◀ Comfort High

- Stödjer hela kroppen inklusive huvudet
- För brukare med nedsatt höft-, bål- och huvudkontroll
- Välplacerade handtag



◀ Comfort In Situ

- Stödjer hela kroppen
- För brukare med god huvudkontroll
- Designad utan handtag för att kunna lämnas kvar under brukaren i sittande
- Tillverkad av ett speciellt certifierat flamskyddat material i tre olika tyger; polyester, spacer polyester och nät
- Miljövänlig
- Obereonde testad enligt EN 1021 del 1 och 2



Lyftband

För aktiva brukare som vill förflytta sig smidigt på egen hand eller som extra stöd för arm eller ben.



◀ Light Transfer Support

- För brukare med god kropps- och huvudkontroll
- Används vid förflyttning från sittande till sittande
- Kan användas som lyftband eller som stöd för en arm eller ett ben och vid behov som extra stöd i kombination med en annan lyftsele

Väst för balans-, stå- eller gåträning

Enkel att applicera och ta bort, används som säkerhet och extra stöd för brukare som kan stödja på benen.



◀ Standing Transfer Vest

- Appliceras runt bålen med brukarens fötter stadigt i golvet
- För brukare med viss ståförmåga och med minskad balans och/eller gåförmåga.
- Tillbehör: Grenband som bidrar till att hålla lyftselen på plats och som extra säkerhet

Invacare Slings för uppresningslyftar - aktiva lyft



◀ Stand Assist

- För brukare med viss ståförmåga men som inte kan stå/förflytta sig självständigt
- Brukaren ska kunna samarbeta samt ha god bål- och huvudkontroll
- Extrapolstrad för ytterligare komfort
- Anti-halkmaterial i ryggen



◀ Transfer Stand Assist

- Samma funktion som Stand Assist lyftselen men med ytterligare support för benen

Tillbehör ▼



Förlängningsband

- ▲ Förlänger lyftbanden för att ge ytterligare möjligheter till positionering. Finns i 20 eller 30 cm längd.



Öglemarkörer

- ▲ Smidig märkning för att enkelt identifiera de öglor som provats ut. Levereras i 4-pack.

Storlekar & Material ▼


Familj	Modell	Storlek						Material		
		XS	S	M	L	XL	XXL	Polyester	Nät	Spacer
Universal	Universal Low	◆	◆	◆	◆	◆		●	●	●
	Universal Standard	◆	◆	◆	◆	◆		●	●	●
	Universal High	◆	◆	◆	◆	◆	◆	●	●	●
	Universal High Plus	◆	◆	◆	◆	◆		●	●	●
Liten öppning	Amputee	◆	◆	◆	◆	◆		●		
	Easy Fit	◆	◆	◆	◆	◆		●		●
Stor öppning	Dress Toileting Low	◆	◆	◆	◆	◆		●		
	Dress Toileting High	◆	◆	◆	◆	◆		●		
Komfort	Comfort Standard	◆	◆	◆	◆	◆		●	●	●
	Comfort High	◆	◆	◆	◆	◆		●	●	●
	Comfort In Situ	◆	◆	◆	◆	◆	◆	●🔥	●🔥	●🔥
Lyftband	Light Transfer Support		◆		◆			●		
Stå-/gå-/balansträning	Standing Transfer Vest	◆	◆	◆	◆	◆		●		
Uppresningsseklar	Stand Assist	◆	◆	◆	◆	◆		●		
	Transfer Stand Assist		◆	◆	◆	◆		●		

Material ▼



Hel Polyester

▲ Standardmaterial som är enkelt att arbeta med - glider lätt och torkar snabbt efter tvätt.

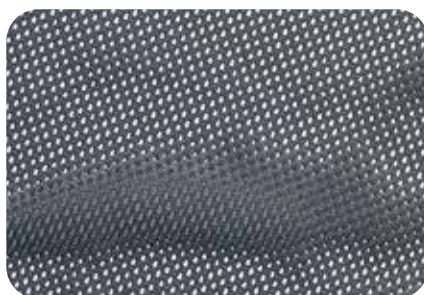

Nät

▲ Praktiskt att använda vid bad och dusch, släpper igenom vatten och torkar snabbt.



Spacer

▲ Elastiskt material som formar sig efter brukarens kropp vilket ger ytterligare komfort och stöd. Lämpat för brukare med känslig hud.

Tekniska data ▼

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se



Max brukarvikt ▼



Max tvätttemperatur ▼



Blek ej ▼



Torktumling ▼

Invacare Slings

XS, S, M, L = 200 kg
XL = 250 kg
XXL = 300 kg

90° C

Låg temperatur

Alla lyftseklar ska provas ut och anpassas för den enskilde brukaren för att garantera optimal komfort och säkerhet.

En riskbedömning måste genomföras innan lyftseklar används tillsammans med en lyft från annan tillverkare.

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



Yes, you can.®