

**matrix**<sup>®</sup>  
SEATING SERIES

# Mini Seating Serie



Förvandla barns sittande



Invacare Matrx Mini Rygg och Mini PS Sittdyna är utformade för att ge optimalt stöd med maximal rörelsefrihet. Varje del av detta sittsystem har noggrant utformats och konstruerats för att möta barnens behov. Viktiga funktioner:

- Låg vikt, konturerad hållbart ryggstöd
- Hög elastisk, konturerad sittdyna



### Låg vikt, konturerad hållbart ryggstöd

Invacare Matrx Mini ryggen ger komfort, stabilitet och förbättrar användare positionering. Mini ryggens monteringsbeslag installeras och justeras på några minuter och quick release mekanismen gör den lätta ryggen enkel att ta av. Invacare Matrx Mini ryggen erbjuder möjlighet att anpassa sig till barnets tillväxt och de justerbara monteringsstiften kan anpassas att passa till stolar med samma eller 25 mm bredare rygg.



### En formad högelastisk skumdyna

Invacare **Matrx Mini PS** är en anatomiskt formad skumdyna med hög kvalitet, med ett våffel liknande mönster under sittbensknölna som ger optimal avlastning, positionering och komfort. Det formgjutna skummet ger en tredimensionell form och erbjuder ett förbättrat stöd och stabilitet till användaren. Det formgjutna skummet är mycket hållbart, vilket ökar produktens livslängd.



## Funktioner och tillbehör



### Överdrag

Rygg - Vattentålig och luftigt med ett attraktivt Kid \* ab \* ra- mönster. Sittdyna - Komplet med dragkedja Startex överdrag på insidan och Kid \* ab \* ra mönstrat överdrag på utsidan. Det är lätt att ta bort för att tillåta anpassningar/ändringar och tvätt.



### Mini monteringsbeslag

Tillåter 100 mm av djupjustering för att anpassas till barnet tillväxt Kan vinklas upp till 30 ° samt roteras Monteringsbeslaget passar 25 mm, 22 mm & 19 mm diameter ryggrör.



### Mini Swing-away Lateralstöd

Höjd, bredd och djup justerbar lateralstöd för ökad stabilitet och positionering. Quick release mekanismen tillåter stödet att roteras ut för att underlätta sidoförflyttning Dynstorlek B110 mm x H82 mm.



### Huvudstödsfäste

Mini ryggarna är förbörade för att tillåta fastsättning av huvudstödet.



### Mini Elan huvudstöd

Elan huvudstöd är oändligt justerbar genom 6 justeringspunkter. Ett komplett utbud av Elan positioneringsdynor är tillgängliga - se Elan huvudstöds broschyr för mer information.












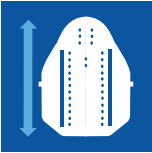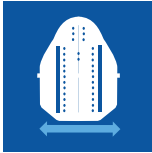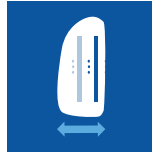


### Monteringsfäste för bröstsele

Monteringsfäste för användning av bröstsele till mini ryggarna.

## Tekniska data

För mer detaljerad information gällande denna produkt, inkluderat produktens bruksanvisning, var vänlig besök vår hemsida [www.invacare.se](http://www.invacare.se).

	Höjd	Bredd	Djup	Djupjustering	Vinkeljustering	Totala produktens vikt	Max brukarvikt
Rygg	 180, 260, 310, 360 mm	 260, 280, 310, 330, 360 mm	 80 mm	 100 mm	 30° vinkel +/- 15°	 400 g and up	 68 kg

	Bredd	Djup	Höjd	Totala produktens vikt	Max brukarvikt
Sittdyna	 260, 280, 310, 330, 360 mm	 260, 310, 360, 410 mm	 50 mm	 150 g och uppåt	 68 kg


## Sittdynor storlekar

Bredd (mm) x Djup (mm)	Bredd (mm) x Djup (mm)
260 x 260 mm	330 x 310 mm
260 x 310 mm	330 x 360 mm
260 x 360 mm	330 x 410 mm
280 x 310 mm	360 x 310 mm
280 x 360 mm	360 x 360 mm
280 x 410 mm	360 x 410 mm
310 x 310 mm	
310 x 360 mm	
310 x 410 mm	



## Överdrag

Kid\*ab\*ra  
mönster

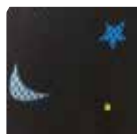

Kundservice: 08-761 70 90  
Fax 08-761 81 08  
[sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com)  
[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Invacare AB  
Box 66 – 163 91 Spånga  
Sweden

