

# SoftCloud™

Alternierende madrasser



Vedertagen teknologi gällande redistribuering av tryck

MÅNGSIDIG | IINTUITIV DESIGN | KOMFORT



# Invacare

## SoftCloud sortiment

---

Alternativ tryckterapi inklusive individ observation och repositionering rekommenderas vid förebyggande och behandling av trycksår, dygnet runt.

Vårdpersonal hamnar ibland i situationer, där brukaren behöver mer frekvent repositionering, än det är möjligt att erbjuda. I sådana fall rekommenderar

EPUAP att brukaren erbjuds ett aktivt madrasssystem som en del av de förebyggande åtgärderna

Invacares **SoftCloud**-sortiment består av en aktivt högkvalitativ topp madrass och ersättnings madrasser avsedda för

användning av högriskbrukare för att utveckla trycksår. Den alternativa tryckterapi i **SoftCloud** madrasserna är utformade för att skapa en repositionering som liknar det naturliga och spontant rörelsemönster. Således omfördelas trycket flera gånger varje timme, även om brukaren inte lägesändrar sig självständigt.

---



---

“Använd en aktiv madrass (topp eller ersättningsmadrass) för brukare med **hög risk att utveckla trycksår** när det är inte möjligt att erbjuda frekvent repositionering ”  
(EPUAP, 2014)

---

# NYA

# EGENSKAPER

1

## Intuitiv design

- ▶ Modern och intuitiv pump



2

## Identifierar och justerar automatiskt

- ▶ Korrekt klinisk behandling med hänsyn till gällande optimal komfort





3

### Digital pump med omvårdnads / max luftpåfyllning

- ▶ Erbjuder en fast liggyta som säkerställer optimala förhållanden under förflyttningar och omvårdnad, för både personal och brukaren



#### ▶ Handtag

Enkel hantering och transport av madrassen

#### ▶ Hörn ringar för lakan

Lossa fastsättning av lakanet för åtkomst till CPR-ventilen

#### ▶ Överdrag med dragkedja på 4 sidor

360 graders dragkedja med quick release funktion som gör det enkelt att demontera samt hygienisk

#### ▶ "Gångjärnsled" vid ryggdelen

Erbjuder ökad och optimal justering i samband med inställningen av ryggdelen (Pro) för att förhindra skjuvning

#### ▶ Avlägsnande av tryck under hälzonen

Erbjuder 5 hälceller (Ace / Pro) och individuellt och permanent avlägsnande av tryck under hälarna (Pro) för utsatta brukare, med existerande hälsår

#### ▶ Kabelhantering

Inga lösa kablar på golvet

#### ▶ CPR-ventilen

Förstärkt och optimalt placerad CPR-ventil för användning i samband med hjärt och lungräddning

#### ▶ Transportskydd

Pumpen kan förses med ett lock som säkerställer att madrassen håller luften vid strömavbrott i upp till 72 timmar



# SoftCloud alternerande madrassortiment

## Sortimentet erbjuder 4 enkla lösningar:



### SoftCloud Top

- ▶ Toppmadrass
- ▶ Uppbyggd av luftceller, som växlar varsamt enligt önskat tryck
- ▶ 12 minuters cykler
- ▶ 1 upp / 1 ner
- ▶ 3 statiska huvudceller
- ▶ Hygienöverdrag ogenomträngligt i i förhållande till fukt och med högfrekvent svetsade sömmar

### SoftCloud Air

- ▶ Ersättningsmadrass
- ▶ Uppbyggd av luftceller, som växlar varsamt enligt önskat tryck
- ▶ 12 minuters cykler
- ▶ 1 upp / 1 ner
- ▶ 3 statiska huvudceller
- ▶ Hygienöverdrag ogenomträngligt i i förhållande till fukt och med högfrekvent svetsade sömmar

### SoftCloud Ace

- ▶ Ersättningsmadrass
- ▶ Uppbyggd av luftceller, som växlar varsamt enligt önskat tryck
- ▶ 10 minuters cykler
- ▶ 2 upp / 1 ner
- ▶ 3 statiska huvudceller
- ▶ Särskilt hälzon för extra känsliga hälar
- ▶ Hygienöverdrag ogenomträngligt i i förhållande till fukt och med högfrekvent svetsade sömmar

### SoftCloud Pro

- ▶ Ersättningsmadrass
- ▶ Uppbyggd av luftceller, som växlar varsamt enligt önskat tryck
- ▶ 10 minuters cykler
- ▶ 2 upp / 1 ner
- ▶ Utrustad med uppblåsta sidoceller för en stabil och komfortabel liggyta
- ▶ 3 statiska huvudceller
- ▶ Särskilt hälzon för extra känsliga hälar
- ▶ Hygienöverdrag ogenomträngligt i i förhållande till fukt och med högfrekvent svetsade sömmar

## Intuitiv pump

Komfortnivån ställs in med SoftCloud pumpens intuitiva display.

SoftCloud madrasspump erbjuder också CLP-inställning (kontinuerligt lågt statiskt tryck) till gagn för exempel brukare i terminalstadiet eller med stark smärta. Trycket i madrassen anpassar sig med självidentifiering och automatisk justering. Audiovisuella larm ger indikation om eventuella fel i form av t.ex. lågt tryck eller strömavbrott, displayens inställningarna kan låsas för ökad säkerhet.



## Tekniska data ▼


Ytterligare information om SoftCloud-sortimentet kan erhållas genom att kontakta Invacare eller från Invacares hemsida [www.invacare.se](http://www.invacare.se)



Bredd ▼



Längd ▼

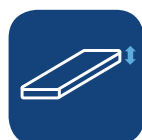

Höjd ▼



Max brukartvikt ▼

<b>SoftCloud Top</b>	83/85/88 cm	200 cm	13 cm	200 kg
<b>SoftCloud Air</b>	83/85/88 cm	200 cm	18 cm	200 kg
<b>SoftCloud Ace</b>	83/85/88/103/116 cm	200 cm	20 cm	220 kg/ 350 kg
<b>SoftCloud Pro</b>	83/85/88 cm	200 cm	20 cm	220 kg



Djup ▼



Bredd ▼



Höjd ▼

<b>Pump 1</b>	12 cm	25 cm	24 cm
<b>Pump 2</b>	12 cm	29 cm	25 cm

## Färg ▼



Mörkblå

## Data

### Producerad i enlighet med:

European Standard: BS EN 597-1 Cig  
European Standard: BS EN 597-2 Match  
BS7177:1996 Crib 5.

### Pump:

Decibelnivå: ≤ 30 dB

## Övrig information ▼

Grundläggande omvårdnad är oerhört viktigt för förebyggande av trycksår. Sortimentet av madrasser kommer säkert att bidra positivt till resultatet av förebyggande vård och behandling. Utbildning, klinisk utvärdering och handlingsbaserad planering med fokus på den de enskilda brukarens bräcklighet och fundamentala faktorer är avgörande. Flera riskbedömningsverktyg finns tillgängliga och bör användas i interaktion med en fortlöpande klinisk bedömning.

OBS! Färgerna kan variera en aning från ovanstående

**Tel: +46 8 761 70 90**  
[sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com)  
[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Invacare AB  
Fagerstagatan 9  
163 91 Spånga  
Sverige



**Yes, you can.®**